

İÇİNDEKİLER





CAD/CAM SİSTEMLERİ



GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLERİ



KÜÇÜK KLİNİK CİHAZLAR &
HİJYEN SİSTEMLERİ



DİŞ ÜNİTLERİ



€14.650,00

INTEGO

- ▶ Intego askılı veya kamçılı 5 çıkışlı hekim tableti, 4 çıkışlı asistan tableti ve özel sensörlü Ledview reflektörlü
- ▶ Dijital tablet üzeri tüm çıkışların hava, su, hız ayarı ve endodontik tork kontrol ayarı yapılabilir.
- ▶ USB çıkışlı
- ▶ Temiz ve hassas kullanıcı Arayüz kontrol paneli.
- ▶ Askı kollu tablet için ekstra alet tepsisi.
- ▶ Temiz su sistemi ve entegre hortum temizleme ile maksimum hijyen sağlar.
- ▶ Çok hareketli tetiyer
- ▶ Koltuğun ve sırtlığın birlikte hareket etmesi, hastanın omurgasındaki baskıyı ve gerilmeyi önler ve tetiyerin sık sık ayarlanması gerekmez.
- ▶ Sökülüp temizlenebilir ve hareketli kreşuar çanağı.
- ▶ Resimde görülen bazı aksesuarlar opsiyoneldir.

INTEGO Pro

INTEGO Pro'da bulunan ekstra özellikler;

- ▶ Hafif ve özel tasarım uzun kamçı kollar
- ▶ Yüksek Çözünürlü dijital kamera
- ▶ Cam ve geniş hareketli kreşuar
- ▶ Dokunmatik kontrol paneli
- ▶ Hortum temizlik sistemi
- ▶ Hijyen sistemleri
- ▶ Apex bulucu

€16.750,00

SIRONA ORTHOPHOS XG3

Panoramik Röntgen



€ 14.950,00

ORTHOPHOS XG 3. Temel Klinik modeli: Muayenehane odaklı röntgenler için değeri kanıtlanmış standart. Yüksek Kalite. Dayanıklı. Güvenilir: ORTHOPHOS XG 3, genel diş hekimlerinin temel klinik 2D görüntüleri için en iyi seçimdir. Röntgen ünitesinin kolay çalıştırılması ve muayenehanenizin günlük rutinlerine sorunsuzca entegre edilmesi, değerli zamanınızdan tasarruf etmenizi sağlayacaktır. Yüksek görüntü kalitesi ve değeri kanıtlanmış SIDEXIS XG yazılımı, bir tanıya hızlı ve kolay bir şekilde ulaşmanızı sağlayacaktır.

SIRONA ORTHOPHOS XG5

Panoramik Röntgen

Kullanım kolaylığı. Çok yönlü özellikler: ORTHOPHOS XG 5, pratisyen diş hekimleri ve ortodontistler için ideal ortaktır. Tüm görüntü parametreleri, özel tanı görevlerine uygun olarak özelleştirilmiştir. Dikey ve yatay olarak indirgenmiş pediatrik panoramik program, minimal dozla muhteşem görüntü kalitesi sunar. Çok sayıda çocuğun tedav edildiği muayenehaneler için idealdir. Opsiyonel sefalometrik kol, ortodonti için bütün anahtar görünümüleri sunar.



€ 25.500,00



€ 1.650,00

VARIO DG

İntraoral Görüntüleme.

VARIODG – basit ve ekonomik intraoral görüntüleme. The VarioDG intraoral röntgen cihazı, ünlü Sirona HELIODENT ürün hattının bir parçasıdır. Konvansiyonel film tabanlı görüntülemeye ek olarak, ekonomik cihaz, dijital görüntüleme için özellikle uygundur.

Kısa pozlama süreleri, dijital görüntüleme için özellikle uygundur. En iyi tanı olasılıkları için mükemmel görüntü kalitesi. Duvar çözümü ve mobil çözümle esnek ofis entegrasyonu.

XIOS SCAN Fosfor Plak Tarayıcı



Denenmiş ve gerçek iş akışı dijital görüntülemenin avantajlarını karşılar 22 satır çifti / mm * ile mükemmel tarama kalitesi Çizilmemiş tarama ve otomatik film algılama

5.550,00

XIOS XG Supreme Sensör RVG

Muhteşem görüntü kalitesi Dynamic Sharpen Slider (Dinamik Keskinleştirici Kaydırıcı) Kablosuz görüntü transferi için WiFi seçeneği (2013 Yazından başlayarak) Kolayca değiştirilebilir kablo Üç sensör boyutu

€ 3.850,00



DAC PROFESSIONAL

Profesyonel sınıf B vakumlu otoklav



- * Onaylanmış sterilizasyon sonuçları
- * Basitleştirilmiş ilk doğrulama dahil çalışma testi
- * Farklı yükleme seçenekleri
- * Yazıcı veya PC yazılımı ile belgeleme olanağı

€ 4,550.00

DAC UNIVERSAL

Başlık Otoklavı



Hijyen gittikçe daha önem kazanıyor, bu işlem günlük işinizde fazla çaba gerektirmemelidir. Bu yüzden hijyen formülümüz: Güvenli, Temiz, Hızlı

DAC UNIVERSAL 6 adet el aletini temizler, yağlar ve sterilize eder- hastanızın korunması için bir tuşla otomatik olarak çalıştırabilirsiniz. Bu görevi yapan diğer cihazlara göre çok yönlüdür.

Evrensel kombine otoklav.

€ 4,250.00

SIROLaser Xtend

İmkanlarınızı genişletin



Ön ayarlı tedavi programları, yardım menüsü, 24 adet serbestçe programlanabilir uygulama 2 kullanıcı için erişim kodları

1 el aleti

Yükseltme olarak mevcut olanlar:

12 adet sık kullanılan için kısayol tuşu,

tedavi dokümantasyonu,

mobil kullanım

için şarj edilebilir batarya

Güç: 10 watt'a kadar

€ 4,250.00

CEREC

İLHAM VERMEK İÇİN YARATILDI.

CEREC dünyadaki rakipsiz en popüler CAD/CAM sistemi. Bununla da kalmıyor. CEREC, her şeyden önce hem diş hekimi hem de hasta için farklı bir tedavi deneyimini temsil ediyor. Dental geleceğe bir sonraki adımı atın: Benzersiz ölçü alma, yenilikçi yazılım, hızlı frezeleme ve üstelik tüm materyal seçenekleriyle.

Dentsply Sirona ile başarılı tedaviler için akıllı çözümler.

CEREC

▶ RESTORASYONDAN
ÇOK DAHA FAZLASI.



Synea Vision türbinler



TÜRBINLER

synea VISION



Yeni Synea Vision türbin serisi: İnnovatif teknoloji ve en yüksek beklentiler için kapsamlı ürün gamı.

- > Ring LED teknolojisi ile tedavi alanında %100 gölgesiz aydınlatma (sadece R0-24 veya R0-34 ile kullanıma uygun)
- > 5 sprej ile tedavi alanının optimum soğutulması
- > Dört kafa çapıyla her vakaya uygun tedavi
- > Özel kaplamasıyla temizlemesi kolay, kapsamlı koruma ve yüksek değer
- > Dünyanın en hafif türbin sistemiyle ağrısız çalışma (türbin ve kupling)
- > Seramik rulmanları ile uzun servis ömrü ve sessiz çalışma
- > pres-buton kilit sistemi 1,6 mm FG türbin frezler için
- > 24 months warranty

led+ Ring LED+ ışıklı

led+ LED+ ışıklı

ışıklı

entegre sprej

termal dezenfektör

sterilize edilebilir

SYNEA VISION TÜRBINLER



TK-100 L
REF 30021000

led+
1.271

Ring LED+, 5 sprejli soğutma, 21 W, kafa çapı Ø 13mm,



TK-98 L
REF 30019000

led+
1.271

Ring LED+, 5 sprejli soğutma, 23 W, kafa çapı Ø 11,5mm,



TK-97 L
REF 30017000

led+
1.271

Ring LED+, 5 sprejli soğutma, 20 W, kafa çapı Ø 10 mm,

SYNEA VISION TÜRBINLER MULTIFLEX® BAĞLANTILI * VE SERAMİK RULMANLI



TK-100 LM
REF 30022000

led+
1.071

cam çubuk, 5 sprejli soğutma, 26 W, kafa çapı Ø 13 mm,



TK-98 LM
REF 30020000

led+
1.071

cam çubuk, 5 sprejli soğutma, 23 W, kafa çapı Ø 11,5 mm,



TK-97 LM
REF 30018000

led+
1.071

cam çubuk, 5 sprejli soğutma, 20 W, kafa çapı Ø 10 mm,



TK-94 LM
REF 30031000

led+
1.071

cam çubuk, 5 sprejli soğutma, 14 W, kafa çapı Ø 9 mm,



ANGLDRUVA VE PIYASEMENLER

syneca VISION



Syneca Vision angldrüva ve piyasesmenler:
dayanıklı, ergonomik ve göze çarpan kalite.

- > İki kafa çapıyla her ihtiyaca uyar
- > Seramik rulmanları ve yaratıcı çark teknolojisiyle uzun servis ömrü ve sessiz operasyon [WK-99LT / WK-93/LT]
- > Özel yüzey kaplaması sayesinde yüksek dayanıklılık değeri
- > Yeni yüzey kaplamasıyla, kapsamlı koruma ve uzun dönemli kalite ömrü
- > Monoblok tasarımı ve profiliyle mükemmel kavrama ve ergonomi
- > Kompakt cam çubuk sayesinde tedavi alanının aydınlatılması
- > Paslanmaz çelik dış parçalarla dayanıklı konstrüksüyon
- > Kolay enstrüman değişimi
- > Sterilize edilebilir ve dezenfeksiyona uygundur
- > 36 ay garanti

- ışıklı
- entegre sprey
- termal dezenfektör
- sterilize edilebilir

SYNECA VISION ANGLDRUVA



WK-99 LT
[seramik rulmanlı]
REF 30023000 **1.332**

1:5, 5 spreyli soğutma,
kafa çapı Ø 9,5mm,
pres-buton kilit
sistemi Ø 1,6 mm FG
frezler için, cam çubuk



WK-93 LT
[seramik rulmanlı]
REF 30024000 **1.332**

1:4,5, 5 spreyli
soğutma, kafa çapı
Ø 9,1 mm, pres-buton
kilit sistemi Ø 1,6 mm
FG frezler için,
cam çubuk



WK-56 LT
REF 30025000 **1.007**

1:1, tek sprey, kafa
çapı Ø 9,5 mm,
pres-buton kilit sistemi
Ø 2,35 mm angldrüva
frezler için, cam çubuk



WK-66 LT
REF 30026000 **990**

2:1, tek sprey, kafa
çapı Ø 9,5 mm,
pres-buton kilit sistemi
Ø 2,35 mm angldrüva
frezler için, cam çubuk

SYNECA VISION ANGLDRUVA



WK-86 LT
REF 30027000 **1.081**

10:1, tek sprey,
kafa çapı Ø 9,5mm,
pres-buton kilit sistemi
Ø 2,35 mm angldrüva
frezler için, cam çubuk

SYNECA VISION PIYASEMEN



HK-43 LT
REF 30028000 **878**

1:1, tek sprey,
döner kilit sistemi,
Ø 2,35 mm piyasesmen
ve angldrüva frezleri için







ANGLDRUVA
KISA VERSİYON

synea VISION



Kısa versiyon: 23 mm kupling uzunluğuna sahip mikromotorlar için belirgin derecede hafif angldruva.

- > %7 daha hafif ve %10 daha kısa
- > Sistemin genelinde mükemmel balansa ve ergonomi
- > İnovatif, çizilmez yüzey kaplaması
- > Türbinlerde iki farklı kafa ebadı
- > Sadece 23 mm veya daha kısa kupling uzunluğuna sahip mikromotorlar için
- > Termal dezenfektöre girebilir ve steril edilebilir
- > 36 ay garanti

-  ışıklı
-  entegre sprey
-  termal dezenfektör
-  sterilize edilebilir

SYNEA VISION ANGLDRUVA
KISA VERSİYON



1:5, 5 spreyli soğutma, kafa çapı Ø 9,5mm, pres-buton kilit sistemi Ø 1,6 mm FG frezler için, cam çubuk

WK-99 LT S
[seramik rulmanlı]
REF 30215000

1.332



1:4,5, 5 spreyli soğutma, kafa çapı Ø 9,1 mm, pres-buton kilit sistemi Ø 1,6 mm FG frezler için, cam çubuk

WK-93 LT S
[seramik rulmanlı]
REF 30216000

1.332



1:1, tek sprey, kafa çapı Ø 9,5 mm, pres-buton kilit sistemi Ø 2,35 mm angldruva frezler için, cam çubuk

WK-56 LT S
REF 30217000

1.007



2:1, tek sprey, kafa çapı Ø 9,5 mm, pres-buton kilit sistemi Ø 2,35 mm angldruva frezler için, cam çubuk

WK-66 LT S
REF 30218000

990



TÜRBİNLER

syneco FUSION



Synea Fusion türbinler – göze çarpan fiyat-performans oranı!
Optimal LED-aydınlatmasıyla vazgeçilmez kullanıcı konforu,
Quattro Sprey ve sessiz, titreşimsiz operasyon.

- > LED+ ile en geniş aydınlatma alanı
- > Optimum ulaşım, en iyi görüş ve mükemmel kafa çapı ile yüksek güç - vazgeçilmez performans
- > Quattro Sprey ile güvenli soğutma (4 lü sprej)
- > Seramik rulmanlarıyla sessiz ve titreşimsiz operasyon
- > Hijyenik kafa sistemi
- > pres-buton kilit sistemi 1,6 mm FG türbin frezler için
- > 12 ay garantili

led+	LED+ ışıklı
	ışıklı
	ışiksiz
	entegre sprej
	termal dezenfektör
	sterilize edilebilir

SYNEA FUSION TÜRBİNLER



Quattro Sprey, 22 W,
kafa çapı Ø 11,5 mm

TG-98 L
[R0-24/R0-34* için]
REF 30001000 **793**

TG-98 L RM
[standard 6-delikli bağlantı]
REF 30198000 **793**

TG-98
[R0-03/R0-04/R0-14* için]
REF 30002000 **657**



Quattro Sprey, 18 W,
kafa çapı Ø 10 mm

TG-97 L
[R0-24/R0-34* için]
REF 30004000 **793**

TG-97 L RM
[standard 6-delikli bağlantı]
REF 30197000 **793**

TG-97
[R0-03/R0-04/R0-14* için]
REF 30005000 **657**

SYNEA TÜRBİNLER NSK BAĞLANTIYA UYGUN



TG-98 L N
REF 30200000



793

cam çubuk, Quattro Sprey,
22 W çıkış gücü, 11,5 mm kafa
çapı, 1,6 mm FG türbin frezleri
için push buton frez sistemi



TG-97 L N
REF 30199000



793

cam çubuk, Quattro Sprey,
18 W çıkış gücü, 11,5 mm kafa
çapı, 1,6 mm FG türbin frezleri
için push buton frez sistemi

SYNEA FUSION TÜRBİNLER MULTIFLEX® BAĞLANTILI*



TG-98 LM
REF 30003000



793

cam çubuk, Quattro Sprey,
22 W, kafa çapı Ø 11,5 mm,
pres-buton kilit sistemi for
Ø 1,6 mm FG türbin frezler için



TG-97 LM
REF 30006000



793

cam çubuk, Quattro Sprey,
18 W, kafa çapı Ø 10 mm,
pres-buton kilit sistemi
Ø 1,6 mm FG türbin frezler için

syneco FUSION

ANGLDRUVA VE PIYASEMENLER

synea FUSION



Synea Fusion – kanıtlanmış Synea kalitesini göze çarpan fiyatla sunar:

- > Seramik rulmanlarıyla uzun ömürlü ve sessiz operasyon WG-99 modeli için geçerlidir
- > Küçük kafa yapısıyla optimum ulaşım en iyi görüş alanı
- > Quattro Spray ile güvenli soğutma (4 spreylili) WG-99 modeli için geçerlidir
- > Monoblok tasarım ile optimum hijyen ve ergonomi
- > Kompakt cam çubuk sayesinde daimi ışık kalitesi
- > Sterilizasyona ve termal dezenfeksiyona uygundur
- > 24 ay garantili

- ışıklı
- ışiksiz
- entegre spray
- termal dezenfektör
- sterilize edilebilir

SYNEA FUSION ANGLDRUVA



WG-99 LT
REF 30007000

1.011

WG-99 A
REF 30008000

766

1:5, Quattro Spray,
kafa çapı Ø 9,5 mm,
pres-buton kilit
sistemi Ø 1,6 mm FG
frezler için, cam çubuk



WG-56 LT
REF 30009000

700

WG-56 A
REF 30010000

615

1:1, tek spray,
kafa çapı Ø 9,5 mm,
pres-buton kilit sistemi
Ø 2,35 mm angldrüva
frezler için, cam çubuk



WG-66 LT
REF 30011000

830

WG-66 A
REF 30012000

679

2:1, tek spray,
kafa çapı Ø 9,5 mm,
pres-buton kilit sistemi
Ø 2,35 mm angldrüva
frezler için, cam çubuk

SYNEA FUSION PIYASEMEN



HG-43 A
REF 30013000

508

1:1, tek spray,
döner kilit sistemi,
Ø 2.35 mm piyasemen ve
angldrüva frezleri için



PİSTONLU ANGLDRUVA

syneo FUSION



W&H Profin angldrüva Dentatus uçlar için:

- > Sement, bond ve dolgu materyal fazlalıklarını biçimlendirmede güvenli, ve etkin
- > Proksimal ve interdental bölgelerin yanısıra subgingival yüzeylerin de temizlenmesi ve cilalanması ve aşıp uçlarla ince cilalama işlemleri yapılır.
- > Kabarcıklı alanların doğal diş formuna kavuşturulması.
- > İç bükey ön dişlerin yüzey aşındırmasında
- > Oluk ve kavtelerin ince cilalanmasında

W&H Intensiv angldrüva Intensiv eğeler için:

- > İnterproksimal ve subgingival bölgelerin, kavite kenarlarının bitirilmesinde
- > Hazırlık kenarlarının ve kavtelerin yivlenmesi
- > Subgingival plakların ve ortodonti striplerinin temizlenmesinde

- ışıklı
- ışiksiz
- entegre sprey
- termal yıkayıcıda dezenfekte edilebilir
- sterilize edilebilir

TÜRBİNLER

alegra



Tedavilerinizde yeni Alegra'nın son derece sessiz çalışmasını keşfetme vakti. Sizin ihtiyaçlarınız doğrultusunda en son teknoloji ile dizayn edildi. Made in Avusturya : En mükemmel tedavi sonuçları için.

- > Kupling üzerindeki jeneratör teknolojisi sayesinde tedavi alanında optimum görüş ve aydınlatma, LED in optimal bir biçimde pozisyonlandırılması ve küçük türbin kafası
- > Türbindeki seramik rulmanlar sayesinde daha sessiz operasyon ve uzun servis ömrü
- > Vibrasyonsuz ve sessiz operasyon
- > İnternal su filtresi sayesinde mükemmel spreyleme fonksiyonu
- > Yüksek tork ile dişte çabuk kesim
- > Tedavi alanının optimal soğutması
- > Kolay ve hızlı frez değişimi
- > Yorulmadan çalışma
- > Basit, push-buton frez değiştirme sistemi, 1,6 mm çaplı FG türbin frezleri ile kullanıma uygun

- LED ışıklı
- ışıklı
- ışiksiz
- entegre sprey
- termal dezenfektör
- sterilize edilebilir

SYNE FUSION PİSTONLU ANGLDRUVA



Profin angldrüva 2:1, tek sprey, stroke 1.1 mm Dentatus uçlar için

WG-67 LT
REF 30084000

887

WG-67 A
REF 30085000

615



İntensiv angldrüva 2:1 tek sprey, stroke 0.9 mm Intensiv eğeler için

WG-69 LT
REF 30076000

887

WG-69 A
REF 30077000

615

ALEGRA TÜRBİNLER SERAMİK RULMANLI VE IŞIKLI



üçlü sprey, 16W, 12.2 mm kafa çapı

TE-98 LQ
REF 30067000

615



üçlü sprey, 14 W, 10.4 mm kafa çapı

TE-97 LQ
REF 30066000

615

JENERATÖRLÜ ROTO QUICK KUPLİNGLER ALEGRA TE-97/98 LQ TÜRBİNLER İÇİN



Borden 2 delik bağlantı, jeneratör ve geri emişi engelleyici su filtresi

RQ-53
REF 10405300

257



Standart 4 delik bağlantı, jeneratör ve geri emişi engelleyici su filtresi

RQ-54
REF 10405400

257

ALEGRA TÜRİNLER SERAMİK RULMANLI



üçlü sprej, pres-buton kilit sistemi,
maks. 20 W, kafa çapı Ø 12.2 mm,
Ø 1.6 mm FG türbin frezler için

TE-98
[R0-03/R0-04/R0-14* için]
REF 30071000 **€ 504**

TE-98 BC
[Borden 2-delikli bağlantı]
REF 30072000 **€ 504**

TE-98 RM
[standard 4-delikli bağlantı]
REF 30073000 **€ 504**



üçlü sprej, pres-buton kilit sistemi,
maks. 14 W, kafa çapı Ø 10.4 mm,
Ø 1.6 mm FG türbin frezler için

TE-97
[R0-03/R0-04/R0-14* için]
REF 30068000 **€ 504**

TE-97 BC
[Borden 2-delikli bağlantı]
REF 30069000 **€ 504**

TE-97 RM
[standard 4-delikli bağlantı]
REF 30070000 **€ 504**

ALEGRA TÜRİNLER ÇELİK RULMANLI



tek sprej, pres-buton kilit sistemi,
maks. 16 W, kafa çapı Ø 12.2 mm,
Ø 1.6 mm FG türbin frezler için


TE-95 BC
[Borden 2-delikli bağlantı]
REF 30074000 **€ 403**

TE-95 RM
[standard 4-delikli bağlantı]
REF 30075000 **€ 403**

ALEGRA TÜRİN İÇİN SATIŞ SONRASI PARÇALAR



bağlantı contası
BC
REF 01000700 **€ 3,04**
RM
REF 02207300 **€ 3,92**

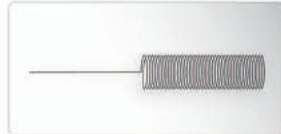

kısa sprej temizleyicisi
türbin, angidruva ve
piyasemenler için
REF 02015101 **€ 3,70**



O-ring seti
Roto Quick kuplajlar için
REF 07508900 **€ 5,56**



Tork anahtarı
kartuş değişimi için
REF 07508800 **€ 62**

ALEGRA TÜRİN İÇİN SATIŞ SONRASI PARÇALAR



altıgen anahtarlı rotor
TE-98 L0, TE-98 için
TE-98 BC, TE-98 RM
REF 06787500
for TE-97 L0, TE-97,
TE-97 BC, TE-97 RM
REF 07234100
for TE-95 RM
REF 07495400
for TE-95 BC
REF 07507300



ANGLDRUVA VE PIYASEMENLER

alegra



Alegra ile hastalarınızın tedavisi tamamen etkin ve son derece güvenli. »Made in Austria« angldrüva ve piyasemenler W&H'in kendini ispat etmiş kalitesi ile dizayn edilmiştir.

- > 360 rotasyon sayesinde yorulmadan çalışma
Ultralight seri = 18 mm eksternal bağlantı çapı
Termal dezenfektöre giren seri = 20 mm eksternal bağlantı çapı
- > Küçük kafa yapısı sayesinde tedavi alanında optimal görüş
- > Push buton frez mekanizması ile kolay ve çabuk frez değişimi
- > Yüksek materyal kalitesi ile maksimum dayanıklılık
- > Zamandan ve maliyetten tasarruf sağlar, çünkü en önemli parçalar sahada değiştirilebilir (kafa değişimi)

led+ LED+ ışıklı

- ışiksiz
- susuz
- termal dezenfektör
- sterilize edilebilir

ALEGRA ANGLDRUVA VE PİYASEMENLER 20 MM BAĞLANTI ÇAPI



1:1, pres-buton kilit sistemi, kafa çapı Ø 10.1 mm, Ø 2.35 mm angldrüva frezleri için

WE-56
REF 30116000



€ 247



1:1, pres-buton kilit sistemi, kafa çapı Ø 10.1 mm, Ø 1.6 mm FG türbin frezleri için

WE-57
REF 30117000



€ 247



4:1, pres-buton kilit sistemi, kafa çapı Ø 10.1 mm, Ø 2.35 mm angldrüva frezleri için

WE-66
REF 30118000



€ 298



1:1, döner kilit sistemi, Ø 2.35 mm angldrüva ve piyasemen frezleri için

HE-43
REF 30119000



€ 226

ALEGRA ANGLDRUVA VE PİYASEMENLER İÇİN AKSESUARLAR



1:4.5, üçlü sprej, pres-buton kilit sistem, kafa çapı Ø 10.1 mm, Ø 1.6 mm FG türbin frezler için

WE-99 LED G
REF 10259900



€ 1.030



1:1, tek sprej, pres-buton kilit sistem, kafa çapı Ø 10.1 mm, Ø 2.35 mm angldrüva frezleri için

WE-56 LED G
REF 10255600



€ 756



4:1, tek sprej, pres-buton kilit sistem, kafa çapı Ø 10.1 mm, Ø 2.35 mm angldrüva frezleri için

WE-66 LED G
REF 10256600



€ 828



HE-43 piyasemen için
3 soğutma hortumlu
sprej klipsi ve sprej temizleyici
REF 07550200 15,30



WE-56, WE-57, WE-66
angldrüvalar için 3 soğutma
hortumlu sprej klipsi ve
sprej temizleyici
REF 06994000 15,30

ALEGRA ANGLDRUVA VE PİYASEMENLER İÇİN SATIŞ SONRASI PARÇALAR



frez eki
REF 01312500



4,-



yivli pin
REF 01312600



2,33

ENTRAN

en:tran



Kablosuz Endo konforu! Kablo yok. Tam güç.
W&H, Entran ile kök kanal hazırlığı için kablosuz başlıktaki yorumunu sunuyor. İster crown-down ister single-legth tekniği tercih edilsin, Entran titiz, sağlam ve güvenli çalışma sağlar.

- > NiTi eğerler için kablosuz Endo motoru – tamamen hareket serbestisi
- > 300 rpm (devir), 5 tork seviyesi (0.5 / 1 / 1.5 / 2.5 / 4 Ncm)
- > »otomatik ters dönüş« / »otomatik ileri« modları
- > Kolay kullanım
- > Hızlı ege değişimi
- > Uzun ömürlü,tekrar şarj edilebilir batarya (Li-ion)

ENTRAN



Kablosuz Endo set içeriği:

- > EB-16 angldruva kafası
- > motor EB-3 H
- > şarj istasyonu
- > tekrar şarj edilebilir Li-ion batarya
- > güç kablosu ve eğerler için genel açıklama

EB-300

REF 12923000

€ 1.145

SATIŞ SONRASI PARÇALAR



Angldruva kafası 16:1
W&H kupling sistemi, Ø 2.35 mm
çaplı 300 devirde döner sistemle
kök kanal hazırlığı için eğerler

EB-16

REF 12321601



€ 363



Egede 300 devir hız veren
motor, 5 farklı tork seviyesi,
şarj edilebilir Li-ion batarya

EB-3 H

REF 12820300

€ 776



Şarj istasyonu elektrik voltajı
100 – 240 V (+/- 10 %),
frekans 50 – 60 Hz
REF 05338300

€ 423



Şarj edilebilir Li-ion
batarya 3.7 V, 680 mAh
REF 05451300

47,80



Başlık tutacı
REF 05882600

29,10

Güç kablosu
REF 05464400

6,30



Angldruva kafası için
Assistina adaptörü
REF 05204600

€ 145

ANGLDRUVALAR

endea



Endea angldrüva başlıklar,ekstra küçük kafası sayesinde tedavi alanına çok daha rahat ulaşım sağlar.Crown-down ve Singlelength tekniklerini kullanarak 360° rotasyonla kök kanal hazırlığı yapmak mümkündür.

- > Çok küçük kafa – tedavi alanına optimal ulaşım
- > Mükemmel erişmiş tutuş profili sayesinde ergonomik şekil
- > Daha güvenli ve daha rahat tutuş
- > Daha kısa eğe sapları ile kombine edildiğinde azaltılmış çalışma yüksekliği
- > Rulmanlı sistem

- ışısız
- susuz
- termal dezenfektör
- sterilize edilebilir

ENDEA ANGLDRUVALAR



16:1,
pres-buton
kilit sistemi

EB-75
REF 12227501

€ 533,



2:1,
pres-buton
kilit sistemi

EB-79
REF 12227901

€ 481

Uygun eğeler
360° rotasyon yapabilen bütün kök kanal eğeleri, özellikle EN ISO 1797-1:1995 e uyumlu, sap çapı 2.35 mm nikel titanyum eğeler.

ANGLDRUVALAR

endo niti



Mekanik kök kanal hazırlığı çok daha önem kazanıyor. Son derece esnek nikel titanyum alaşımli eğeler, döner sistemlerle kök kanal hazırlığı sağlar.

- > Küçük kafa– gelişmiş görüş açısı
- > Pres-buton kilit sistemi
- > Sessiz çalışma ve uzun ömür
- > Monoblok dizaynı sayesinde optimum hijyen

- ışısız
- susuz
- termal dezenfektör
- sterilize edilebilir

ENDO NITI ANGLDRUVALAR



70:1,
pres-buton
kilit sistemi

WD-73 M
REF 10217302

€ 533,



128:1,
pres-buton
kilit sistemi

WD-74 M
REF 10217402

€ 563,

Uygun eğeler
360° rotasyon yapabilen bütün kök kanal eğeleri, özellikle EN ISO 1797-1:1995 e uyumlu, sap çapı 2.35 mm nikel titanyum eğeler.

Yeni eğe siparişi
Yeni eğe siparişini yetkili satıcımızdan veya direkt olarak Sendoline'dan sipariş edebilirsiniz. (www.sendoline.com).

PIEZO SCALER

tigon +



W&H emsali olmayan bir piezo scaler geliştirdi: Tigon+ .Essiz özellikleri sayesinde Tigon+ günlük prosedürü büyük ölçüde kolaylaştırır ve hasta tedavi esnasında hiç olmadığı kadar rahat hisseder.

- > Isı kontrollü soğutma sıvısı
- > Mükemmel koordineli uç gamı
- > 5'li halka LED'li piyasemen
- > Geniş, kolay okunabilir ekran
- > Beş farklı tedavi programı
- > Güvenilir tedavi için üç güç modu

TIGON+
PIEZO SCALER



Tigon+ set içeriği:

- > Kontrol ünitesi (230 V) besleme hortumu ve kuplingiyle
- > 5'li halka LED' li piyasemen
- > Universal uç seti 1 x 1U, 1 x 3U, 1 x 1P [tork anahtarlarıyla birlikte]
- > Endo/implant uç seti 1 x 1I, 1 x 1E [uç anahtarlarıyla birlikte]
- > Ayak pedali C-NF [opsiyonel: ayak pedali S-N1]
- > 400 ml su tankı
- > Filtreli su hortumu
- > Tepsi
- > Piyasemen standı
- > Uç girişi temizleme fırçası
- > Uç kartı
- > Kablo [bütün standart soketler için]
- > O-ring

PA-123 (230 V)
REF 13931000 € 3.285

PIEZO SCALER

tigon



Tigon kullanıcı dostu, kolay operasyonlu ve iyi görümlü bir cihazdır W&H piezo scaler kullanmanın daha başka avantajları da var:

- > Kolay kullanım
- > 5'li halka LED'li piyasemen
- > Piyasemen bütün olarak steril edilebilir ve termal dezenfeksiyona uygundur
- > Durulama fonksiyonu: 30 sn içinde hortumu durular
- > Termal dezenfeksiyona ve sterilizasyona uygun tepsi
- > Dönebilen ve yeri değiştirilebilen piyasemen standı –termal dezenfeksiyon a ve sterilizasyona uygundur

TIGON
PIEZO SCALER



Tigon set içeriği:

- > Kontrol ünitesi (230 V) besleme hortumu ve kuplingiyle
- > 5'li halka LED'li piyasemen
- > Universal uç seti 1 x 1U, 1 x 3U, 1 x 1P [tork anahtarlarıyla]
- > C-NF ayak pedali
- > 400 ml su tankı
- > Uç girişi temizleme fırçası
- > Tepsi
- > Piyasemen standı
- > Uç kartı
- > Kablo [bütün standart soketler için]
- > O-ring

PB-323 (230 V)
REF 13923000 € 2.049



PIEZO SCALER

pyon 2

LED ile hayallerinizin ötesi

Pyon 2: Kendi fiyat aralığında ilk LED II piezo scaler. Tedavi alanında günışığının bütün avantajlarını sunar – cebinize zarar vermeden. Scaling, periodontoloji, endodonti ve restorasyon alanlarında kullanmak üzere tasarlanmıştır.

- > Gün ışığı kalitesinde ışıqla çalışmanızı sağlar
- > 5 ışık yayıcı diyetli LED halka
- > Hastanın diş rengini tam olarak yansıtır
- > Kontrastı daha iyi görmeyi sağlar
- > Kapsamlı uç çeşidi
- > Ergonomik tasarım
- > Rahat temizlik için el parçası ayrılabilir

**PYON 2
PIEZO SCALER**



Pyon 2, beyaz, içeriği:

- > Kuplingli 1.8 m tedarik hortumu ile kontrol ünitesi (230 V veya 115 V),
- > el parçası,
- > ışıklı çalışma için el parçası kapağı,
- > ışiksiz çalışma için el parçası kapağı,
- > universal uç 1U ve uç anahtarı,
- > universal uç 3U ve uç anahtarı,
- > perio uç 1P ve uç anahtarı,
- > ayak pedalı, transformatör (230 V veya 115 V),
- > soğutma filtreli soğutma hortumu,
- > sprey temizleyici iğne,
- > hortum bağlantısı için o-ring,
- > uç kartı

PB-200 LED (ışıklı)
REF 30086000

€ 1.176


PB-200 (ışiksiz)
REF 30087000

€ 903


PYON 2 İÇİN AKSESUARLAR



piyasemen
PB-3 LED
REF 05547600

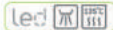

€ 606

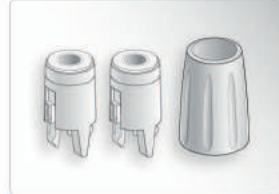

LED soket (2 adet)
piyasemen kepiyle birlikte
REF 06578300



€ 151

piyasemen
PB-3
REF 06915000




€ 455



ayak pedalı C-NF kpl.
REF 04717300*

€ 71

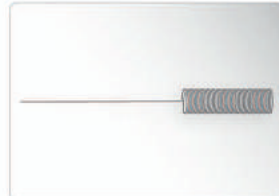

uzun sprey temizleyicisi
REF 00636901*

4,40

PYON 2 İÇİN AKSESUARLAR




soğutma hortumu
REF 05075600*

10,80



O-ring için
soğutma hortumu
REF 02060203*

1,82

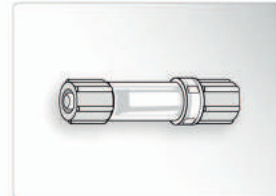

Su filtresi
REF 02675000*

12,30



HAVALI SCALER

proxeo

Hızlı, hassas ve güçlü. Hava ile çalışan scaler entegre spreyi ve 2 büyük optik çıkışı ile plak ve diştaşı kaldırılması için olduğu kadar kök yüzeyinin temizlenmesi için de idealdir. Sonuç: hastalarınız genel olarak daha rahat ve temiz diş yüzeyleri sayesinde de daha öz güvenli hissedeceklerdir.

- > Kademesiz ayarlama
- > Büyük optik çıkışlar
- > Geniş uç aralığı
- > Entegre spreylili
- > Birinci sınıf hijyen
- > Termal yıkayıcıda dezenfekte ve sterilize edilebilir

- ışıklı
- ışiksiz
- entegre spreylili
- termal yıkayıcıda dezenfekte edilebilir
- sterilize edilebilir

PROXEO HAVALI SCALER ROTO QUICK ADAPTÖRE UYGUN



ZA-55 L
REF 10035500



€ 1.381

Güç ayarı ve 1AU, 2AU, 3AU ve 1P uçları ile; uç anahtarı, spreylili temizleyici küçük temizlik fırçası yedek ampul, alüminyum anahtarı ve uç kartı



ZA-55
REF 10035501



€ 880

1AU, 2AU, 3AU ve 1AP uçlara sahip; uç anahtarı, spreylili temizleyici, küçük temizlik fırçası ve uç kartı

PROXEO HAVALI SCALER MULTIFLEX BAĞLANTILI *



ZA-55 LM
REF 10035502



€ 1.381

1AU, 2AU, 3AU ve 1AP uçları ile, güç ayarlı; Uç anahtarı, spreylili temizleyici, küçük temizlik fırçası, uç kartı



ZA-55 M
REF 10035503



€ 880

1AU, 2AU, 3AU ve 1AP uçları ile; uç anahtarı, spreylili temizleyici, küçük temizlik fırçası, uç kartı

PROXEO HAVALI SCALER SIRONA BAĞLANTILI



ZA-55 LS
REF 30227000



€ 1.381

1AU, 2AU, 3AU ve 1AP uçları ile, güç ayarlı; Uç anahtarı, spreylili temizleyici, küçük temizlik fırçası, uç kartı

PROXEO HAVALI SCALER SABİT BAĞLANTILI



ZE-55 BC
REF 11015500



€ 501

1AU [2 adet] uçlara sahip, açık uçlu anahtarı, spreylili temizleyici, küçük temizlik fırçası, uç kartı



ZE-55 RM
REF 11015501



€ 501

1AU [2 adet] uçlara sahip, açık uçlu anahtarı, spreylili temizleyici, küçük temizlik fırçası, uç kartı

ANGLDRUVA VE PIYASEMENLER

proxeo



Profesyonel diş temizliği hastalarınıza ışıldağan bir gülümseme sunan efektif bir metoddur. Proxeo ile, W&H temizleme, cilalama veya flow uygulaması ile ilgili ihtiyacınız olan her şey için kompakt ve kullanımı kolay bir çözüm sunar!

Sistem Avantajları

- > Eşsiz sızdırmazlık sistemi sayesinde uzun ömür
- > Küçük kafa yapısı ile mükemmel görüş
- > Ergonomik tasarım ile etkili tedavi
- > Atravmatik için optimal hız ve etkin cilalama/temizleme
- > Temizlemesi kolay ve hijyen dostu
- > Termal dezenfeksiyona girebilir ve steril edilebilir

- ışiksiz
- susuz
- termal dezenfektör
- sterilize edilebilir

PROXEO ANGLDRUVA SCREW-IN CİLA UÇLARI VE FIRÇALAR İÇİN



WP-64 MU
REF 10216443

€ 401

4:1 redüksiyonlu, bütün standart screw-in uç, fırça ve snap on adaptörler için ve Snap on adaptör ve anahtarlı UNIVERSAL angldrüva sistemi



WP-64 M
REF 10216403

€ 401

4:1 redüksiyonlu, anahtarlı YOUNG angldrüva sistemi, YOUNG screw in kupa ve fırçalar için

PROXEO ANGLDRUVA 2,35 MM



WP-66 M
REF 30190000

€ 401

4:1 redüksiyonlu, 2,35 mm bağlantılı bütün Snap on adaptör, kupa ve fırçalar için

PROXEO ANGLDRUVA KULLAN AT ANGLDRUVALAR İÇİN



HP-44 M
REF 10114403

€ 330

4:1, piyasemen, plastik saplı Young tek kullanımlık angldrüva için, Doriot sistemi

SATIŞ SONRASI PARÇALAR



snap on adaptör
WP-64 MU için
REF 04530600

12,47



anahtar
REF 01957300

1,22

IMPLANTMED
SI-1023

implantmed



Yeni W&H Implantmed, implant uzmanlarına günlük kullanım için mükemmel bir ünite sunuyor. Bu cerrahi ünite implantoloji ve maksillo fasiyal cerrahideki oral cerrahi işlemleri için güvenle kullanılabilir.

- > Kolay anlaşılır kullanıcı ara yüzü
- > Yeni pompa tasarımı
- > Ultra kısa, 6.2 Ncm torklu güçlü motor
- > Motor hız aralığı 200-40,000 rpm
- > Hassas implant stabilitesi ölçümü için W&H Osstell ISO Modülü (aksesuar olarak mevcut)
- > Otomatik tork kontrolü: 5-80 Ncm
- > Otomatik lif kesme fonksiyonu
- > Kablolu elektrikli motor termal dezenfeksiyona ve sterilizasyona uygundur.

IMPLANTMED SI-1023



Implantmed paket içeriği:

- > Kontrol ünitesi (230V)
- > 1.8 m kablolu motor
- > 5 adet klips
- > Ayak pedali S-N2/S-NW
- > Stand
- > Universal destek
- > Güç kablosu
- > 3 adet tek kullanımlık irigasyon hortumu

IMPLANTMED SETİ SI-1023
KABLOLU AYAK PEDALLI



Kablolu ayak pedali S-N2 ışiksiz motor
REF 90000163



€ 2.987

Kablolu ayak pedali S-N2 ışıklı motor
REF 90000165



€ 3.502

IMPLANTMED SETİ SI-1023
KABLOSUZ AYAK PEDALI



Kablosuz ayak pedali S-NW ışiksiz motor
REF 90000164



€ 3.347

Kablosuz ayak pedali S-NW ışıklı motor
REF 90000166



€ 3.862


CERRAHİ PİYASEMEN VE ANGLDRUVALAR

MİNİ LED IŞIKLI VE W&H BAĞLANTILI



Mini LED+ ışıklı ve W&H bağlantılı piyasemen ve angldrular

- > SI-1023, SI-1015 ve SI-1010 Implantmed lerle uyumlu
- > Tüm süreçlerde optimal aydınlatma
- > Ergonomik tasarımı sayesinde ağrısız çalışma imkanı
- > Yüksek kalite paslanmaz çelik ve çizilmelere karşı korumalı kaplaması ile dayanıklı ve uzun servis ömrü
- > Gün ışığı kalitesi ile çalışır
- > Kırmızı tonlarını doğal yansıtır
- > İç temizlik için parçalanabilir gövde
- > Termal dezenfeksiyon ve sterilize edilebilir
- > Sadece W&H EM-19 elektrikli motor ile kullanılır.

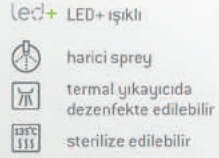

CERRAHİ ANGLDRUVALAR



WS-75 L
REF 30033000

€ 1.215

20:1, hexagon kilit sistem, pres-buton kilit sistem, 2.35 mm angldruga gövdeli cerrahi frez ve kesiciler için (gövde sertliği >50 HRC, >520 HV), Kirschner/Meyer internal soğutma sistemi



WS-56 L
REF 30040000

€ 1.112

1:1, pres buton kilit sistem, 2.35 mm angldruga gövdeli cerrahi frez ve kesiciler için

CERRAHİ ANGLDRUVALAR



WS-91 L
REF 30049000

€ 1.112

1:2.7, 45°kafa açısı, üçlü sprey, pres-buton kilit sistem, FG shank 1.6mm cerrahi frez ve kesiciler için



WS-92 L
REF 30043000

€ 1.112

1:2.7, üçlü sprey, pres-buton kilit sistem, FG shank 1.6 mm cerrahi frez ve kesiciler için

CERRAHİ PİYASEMENLER



S-11 L
REF 30058000

€ 1.194

1:1, düz, manivellalı kilit sistemi, 2.35 mm cerrahi frez ve kesiciler için [aynı zamanda Stryker sistemi]

IMPLANTMED SI-923

implantmed



- > Kolay kullanım: geniş, kolay okunabilen ekran
- > Kısa ,hafif motor: ağrısız operasyon
- > Geniş hız aralığı: 300 – 40.000 rpm
- > Kesin tork kontrolü: 5 – 70 Ncm
- > Otomatik tread cutter fonksiyonu
- > Motor ve kablosu sterilizasyona ve termal dezenfeksiyona uygundur

IMPLANTMED SI-923



Implantmed, içeriği:


- > komple kontrol ünitesi (230 V)
- > 1.8 m kablolu motor
- > 5 adet klips
- > ayak pedalı S-N1
- > stand
- > motor standı
- > elektrik kablosu
- > 2 ad. kilitleme pini ve 3 ad. tek kullanımlık irrigasyon hortumu

SI-923 (230 V)
REF 16929000

€ 2.718

ELCOMED

elcomed

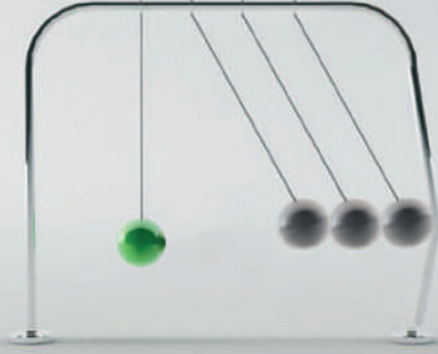

Cerrahin uzmanlık bilgilerinin yanısıra, cerrahi prosedürde başan için çalışma ünitesi kilit faktördür. Elcomed maksillo fasiyal cerrahi, implantoloji, mikrocerrahi ve küçük kemik cerrahisi için yüksek kalitede yenilikçi bir çözümdür.

- > Bütün gerekli parametre ayarları için bir operasyon aşaması
- > USB bellek ile komple dökümantasyon
- > En kısa ve en hafif 50,000 devir motor
- > Frezde 80 Ncm ye kadar tork
- > 6 bağımsız ayarlanabilen program mahallil
- > Otomatik thread cutter (yiv açıcı) fonksiyonu

ELCOMED



Elcomed, içeriği:

- > Dökümantasyonlu veya dökümantasyonsuz komple kontrol ünitesi (220 – 240 V veya 100 – 130 V)
- > değişken ayak pedalı S-N1
- > 1.8 veya 3.5 m kablo ve klipsli motor
- > irrigasyon hortum seti
- > elektrik kablosu
- > motor standı
- > stand
- > kilitleme pinleri
- > Dökümantasyonlu kontrol ünitesi için ilave ekipman: USB bellek

SA-310 Dökümantasyonlu

SA-310 Dökümantasyonsuz

1.8 m kablolu motor
REF 15933100 € 4.517

1.8 m kablolu motor
REF 15933102 € 4.196

3.5 m kablolu motor
REF 15933101 € 4.624

3.5 m kablolu motor
REF 15933103 € 4.303

CERRAHI ANGLDRUVA VE PIYASEMENLER

MINI LED IŞIKLI VE IŞIKSIZ

Mini LED+ ışıklı ve ışiksiz angldruva ve piyasemenler

W&H cerrahi angldruva ve piyasemenler oral, maksillofasiyel cerrahi ve implantoloji için özel olarak dizayn edildi. Özel bir kaplama ile güçlendirilen yüksek kalite paslanmaz çelik angldruva ve piyasemenler artık daha dayanıklı.

- > Ergonomik dizaynı sayesinde ağrısız çalışma imkanı
- > Yüksek kalite paslanmaz çelik ve çizilmelere karşı korumalı kaplaması ile dayanıklı ve güçlü (WI 75 E/KM hariç)
- > İç temizlik için parçalanabilir gövde (WI 75 E/KM hariç)
- > Bütün cerrahi uygulamalar için geniş ürün gamı
- > ISO 3964 (DIN 13.940) kupling sistemi

Mini LED+ ışıklı angldruva ve piyasemenler

- > Gün ışığı kalitesiyle çalışır
- > Kırmızı tonlarını doğal yansıtır
- > Entegre jeneratör ile bağımsız güç kaynağı
- > Geleneksel halojenlere göre daha uzun ömür

led+ LED+ ışıklı

- ışiksiz
- harici sprey
- termal dezenfektör
- sterilize edilebilir



CERRAHI ANGLDRUVALAR



WS-75 L G
REF 30032000

led+
€ 1.345

WS-75
REF 30065000

€ 1.135

20:1, hexagon kilit sistem, pres-buton kilitleme sistemi, 2.35 mm angldruva gövdeli cerrahi frez ve kesiciler için (gövde sertliği >50 HRC, >520 HV), Kirschner/Meyer internal soğutma sistemi



WS-56 L G
REF 30039000

led+
€ 1.240

WS-56
REF 30038000

€ 966

1:1, pres-buton kilitleme sistemi, 2.35 mm angldruva gövdeli cerrahi frez ve kesiciler için

CERRAHI ANGLDRUVALAR



WS-91 L G
REF 30048000

led+
€ 1.240

WS-91
REF 30047000

€ 1.030

1:2.7, 45° kafa çapı, üçlü sprey, pres-buton kilitleme sistemi, cerrahi frez ve kesiciler için FG shank Ø 1.6 mm



WS-92 L G
REF 30042000

led+
€ 1.240

WS-92
REF 30041000

€ 1.030

1:2.7, üçlü sprey, pres-buton kilitleme sistemi, cerrahi frez ve kesiciler için FG shank Ø 1.6 mm

IMPLANTOLOJİ ANGLDRUVALARI



WI-75 E/KM
(parçalanamaz)
REF 10207550

€ 904

20:1, hexagon kilitleme sistemi, pres-buton kilitleme sistemi, 2.35 mm angldruva gövdeli cerrahi frez ve kesiciler için (gövde sertliği >50 HRC, >520 HV), Kirschner/Meyer internal soğutma sistemi

IMPLANTOLOJİ ANGLDRUVALARI İÇİN SATIŞ SONRASI PARÇALAR



3 adet
REF 04757100

33,-

siyah sprey klipsi Kirschner/Meyer internal soğutma sistemi için harici soğutma tüpü tutucu



3 adet
REF 05051000

33,-

siyah sprey klipsi harici soğutma tüpü tutucu

CERRAHI ANGLDRUVALAR İÇİN SATIŞ SONRASI PARÇALAR



yesil sprej klipsi
Kirschner/Meyer internal
soğutma sistemi için harici
soğutma tüpü tutucu

3 adet, sol
REF 06946300

32,40

3 adet, sağ
REF 06948300

32,40



yesil sprej klipsi
harici soğutma
tüpü tutucu hariç

3 adet, sol
REF 06948400

32,40

3 adet, sağ
REF 06949500


32,40

CERRAHI ANGLDRUVALAR İÇİN SATIŞ SONRASI PARÇALAR



soğutma tüpü
frez için internal soğutma için
REF 02610500

18,-

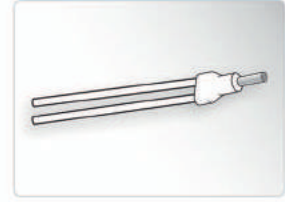

Y-manifold
3 adet
REF 06016400

31,90



kısa sprej temizleyici
REF 02015101

3,60

CERRAHI PIYASEMENLER



1:1, düz, manivellalı kilit sistemi,
Ø 2.35 mm cerrahi frez ve kesiciler
için (aynı zamanda Stryker sistemi)

S-11 L G
REF 30057000

led+
€ 1.323

S-11
REF 30056000

€ 861



1:1, düz, manivellalı kilit sistemi,
Ø 2.35 mm cerrahi frez ve kesiciler
için (aynı zamanda Stryker sistemi)

S-15
REF 30060000

€ 1.008

CERRAHI PIYASEMENLER



1:1, açılı, ince, manivellalı kilit sistemi
Ø 2.35 mm cerrahi frez ve kesiciler
için (aynı zamanda Stryker sistemi)

S-9 L G
REF 30054000

led+
€ 1.428

S-9
REF 30053000

€ 1.113



1:1, açılı, ince, manivellalı kilit sistemi,
Ø 2.35 mm cerrahi frez
ve kesiciler için

S-10
REF 30059000

€ 1.281



1:2, açılı, ince, manivellalı kilit sistemi,
Ø 2. cerrahi frez ve kesiciler için

S-12
REF 30061000

€ 1.281

CERRAHI TESTERE PIYASEMENLERİ



Testere piyasemenleri
Testere piyasemenleri osteotomiler çevirme ve kemik toplama vakaları için özel olarak dizayn edildi. Maksimum hızla yıllarca kullanımdan sonra bile, tutarlı yüksek kesim performansı garantidir.

- > Yüksek kalite paslanmaz çelik ve çizilmelere karşı korumalı kaplaması sayesinde dayanıklı ve güçlü
- > Düşük titreşimli ve son derece sessiz
- > Sajital, resiprokal ve titreşim hareketi
- > Bütün cerrahi uygulamalar için geniş testere gamı
- > İnovatif testere bıçağı şakiliye göze çarpan kesim performansı
- > İç temizlik için parçalanabilir gövde

- ileri geri
- salınımlı
- sajital
- ışiksiz
- harici sprey
- termal dezenfektör
- sterilize edilebilir

CERRAHI TESTERE PIYASEMENLERİ



3.25:1,
2 ileri-geri testere
bıçağı ile
R-15, R-20 ve R-30

S-8 R ileri-geri
REF 10100801

€ 1.385



3.4:1,
2 salınımlı testere
bıçağı ile,
0-8 ve 0-15

S-8 0 salınımlı
REF 10100802

€ 1.712



3.25:1,
2 sajital testere
bıçağı ile,
S-6 ve S-10

S-8 S sajital
REF 10100803

€ 1.603

TESTERE BIÇAKLARI



resiprokal,
çapraz, ileri/geri kesim yönü
S-8 R testere piyasemeni için

R-15, ort.uzunluk. 15 mm
1 ad REF 04726000 14,90
5 adet REF 04800100 67,10

R-20, ort.uzunluk. 20 mm
1 ad REF 04725900 14,90
5 adet REF 04800000 67,10

R-30, ort. uzunluk. 30 mm
1 ad REF 04725700 14,90
5 adet REF 04799900 67,10

TESTERE BIÇAKLARI



sajital,
eksene paralel kesim
yönü, testere bıçağında
derinlik ölçüsü (2.5 mm derecelerle)
S-8 S testere piyasemeni için

S-6, ort.genişlik 6 mm
1 ad REF 04726200 14,90
5 adet REF 04800300 67,10

S-10, ort.genişlik 10 mm
1 ad REF 04726100 14,90
5 adet REF 04800200 67,10

SATIŞ SONRASI PARÇALAR



salınımlı,
eksene 90° kesim yönü,
testere bıçağında derinlik
ölçüsü (2.5 mm derecelerle),
S-8 0 testere piyasemeni için

0-8, ort.genişlik 8 mm
REF 04800500 21,90

0-15, ort.genişlik 15 mm
REF 04800400 21,90



testere bıçağlarının
değişimi için düz anahtar
REF 04740200 3,22



S-8 R, S-8 S için
soğutucu boru
REF 04870800


61,50



S-8 0 için
soğutucu boru
REF 04871000

65,20

PROSTODONTİK TORNAVİDA

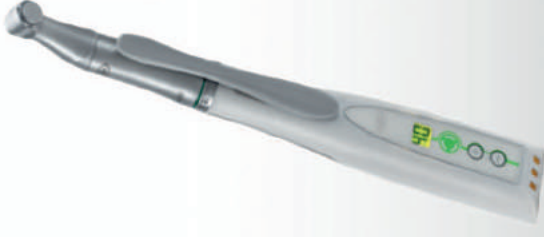

Kablosuz prosthodontic screwdriver hassas tork kontrolüne sahiptir. İstinat vidalarının hassas ve risksiz sıkıştırılmasını sağlar. Prosthodontic screwdriver kullanımı raşet sistemi sayısını azaltır. Sadece mekanik döner enstrümanlar gereklidir.

- > Hassas tork kontrolü; 8 – 40 Ncm
- > İstenen tork seviyesine ulaşıldığında otomatik switch-off
- > Sabit hız zamandan kazandırıyor.
- > Kablosuz operasyon
- > Rahat görüş
- > Raşet sistemi sayısında azalma

PROSTODONTİK TORNAVİDA



Prostodontik tornavida seti, içeriği:

- > Aktivasyon pedli elparçası motoru
- > heksagon kilit sistemli angldrüva başlığı
- > şarj istasyonu
- > şarj edilebilir Li-Ion batarya
- > elektrik kablosu

IA-400
REF 16934000

€ 1.806

SATIŞ SONRASI PARÇALAR



başlık motoru enstrümanda devir 25 rpm, tork 8 – 40 Ncm, şarj edilebilir Li-Ion batarya tipi

IA-40 H
REF 16834000

€ 776

SATIŞ SONRASI PARÇALAR



aktivasyon pedi
REF 05937000

30,70



şarj edilebilir batarya
Li-Ion 3.7 V, 680 mAh
REF 05451300

47,80



angldrüva başlığı 80:1 W&H kupling sistemi, şaft çapı 2.35 mm döner enstrümanlar için

IA-80
REF 16338001



€ 797



şarj istasyonu IA-400
elektrik voltajı 100 – 240 V
(+/- 10 %), frekans 50 – 60 Hz
REF 05338301

€ 423

PIEZOMED

piezomed



Piezomed cerrahin işini kolaylaştırır: inovatif ultrasound teknoloji sayesinde yüksek hassasiyetle kemik rezeksiyonu gerçekleştirilebilir. Çevreleyen yumuşak doku hasar görmeden korunur. Hastalar için farkedilir rahatlık: acısız tedavi, hızlı iyileşme!

- > Otomatik uç tanıma
- > İnovatif LED halka
- > Olağanüstü güçlü ve hızlı
- > Kusursuz kesim hassasiyeti
- > Verimli soğutma
- > Mükemmel temizlik

PIEZOMED



Piezomed, içeriği;

- > Kontrol ünitesi(220-240 V)
- > ayak pedali S-N1/S-NW
- > 1.8 m yada 3.5 m kablolu piyasemen ve klipsleri
- > irrigasyon hortum seti
- > elektrik kablosu
- > motor standı
- > stand
- > uç anahtarı
- > sterilizasyon kaseti
- > uç seti >bone<

SA-320
1.8 m kablolu motor
S-N1 ayak pedallı
REF 30078000



€ 6.776

SA-320
3.5 m kablolu motor
S-N1 ayak pedallı
REF 30078001



€ 6.881

PIEZOMED



SA-320
1.8 m kablolu motor,
ayak pedalsız, SPI dongle ile
REF 30078004*

€ 6.432

SA-320
3.5 m kablolu motor
ayak pedalsız, SPI dongle ile
REF 30078006*

€ 6.535

SA-320
1.8 m kablolu motor S-NW
(kablusuz) ayak pedalı, SPI dongle ile
REF 30078005*



€ 7.163

SA-320
3.5 m kablolu motor, S-NW
(kablusuz) ayak pedalı, SPI dongle
REF 30078007*



€ 7.266

PIEZOMED İÇİN SATIŞ SONRASI PARÇALAR



Piyasemen
5 klipsli 1.8 m kablo
REF 06985000



€ 1.766

Piyasemen
10 klipsli 3.5 m kablo
REF 07159200



€ 1.873



Ayak pedalı S-N1
REF 07004400

€ 557

Ayak pedalı S-N1 için tutamak
REF 04653500

6,20



ayak pedalı S-NW (kablusuz)
SPI dongle ile birlikte
REF 30264001

€ 1.066



SPI dongle
(Implantmed SI-923,SI-915 [2011],
Elcomed SA-310,Piezomed SA-320)
REF 07795800

€ 334

ROTO QUICK KUPLINGLER

roto quick



Roto Quick kuplingler
Roto Quick sistem kuplingler çok boyutlu sistem arayüzüdür.
Herhangi türbin hortumunu herhangi Roto Quick bağlantılı
W&H türbinine, hava motoruna veya havali scalera bağlar.

- > Hızlı ve güvenli enstrüman değişimi
- > Enstrümanın 360° serbest ve kolay rotasyonu
- > Non-retraksiyon valfi
- > Sterilize edilebilir – optimum hijyen için

- led LED ışıklı
- ışıklı
- ışiksiz
- entegre sprej
- sterilize edilebilir

ROTO QUICK KUPLINGLER



RQ-24
REF 10402400 € 262

standart
6-delikli bağlantı



RQ-34
REF 10403400 € 300

standart
6-delikli bağlantı,
ayarlanabilir sprej



RQ-03
REF 10400300 € 159

Borden
2(3)-delik bağlantı



RQ-04
REF 10400400 € 159

standart
4-delik bağlantı

ROTO QUICK KUPLINGLER



RQ-14
REF 10401400 € 219

standart 4-delik
bağlantı, ayarlanabilir sprej

W&H LED+ IŞIKLI KUPLING KAVO MULTIFLEX® BAĞLANTI



RM-34 LED
REF 10403410 € 482

standart 6-delikli
bağlantı, ayarlanabilir sprej

JENERATÖRLÜ ROTO QUICK KUPLINGLER ALEGRA TE-97/98 LQ TÜRBİNLER İÇİN



RQ-53
REF 10405300 € 219

Borden 2 delik bağlantı,
jeneratör ve geri emişi
engelleiyici su filtresi



RQ-54
REF 10405400 € 219

Standart 4 delik
bağlantı, jeneratör
ve geri emişi
engelleiyici su filtresi

SATIŞ SONRASI PARÇALAR



O-ring seti
REF 07508900

5,40

HAVA MOTORLARI



- Hava motorları AM-25
(20 mm eksternal bağlantı çapı)
- > LED teknolojisi ile aydınlatma ve optimal görüş
 - > 360 kolay rotasyon ile yorulmadan çalışma
 - > Yüksek torku sayesinde dış yapısının kolayca ayrılması
 - > Hız aralığı: 5.000-25.000 RPM

- Hava motorları AM-20
(18 mm eksternal bağlantı çapı)
- > Ultra hafif tasarımı sayesinde yorulmadan çalışma
 - > 360 kolay rotasyon ile yorulmadan çalışma
 - > Yüksek tork sayesinde dış yapısının kolayca ayrılması
 - > Hız aralığı: 5.000-25.000RPM

led	LED ışıklı
☉	işıksız
☂	entegre sprey
☂	harici sprey
○	susuz
☒	termal dezenfektör
☒	sterilize edilebilir

İÇTEN SOĞUTMALI HAVA MOTORLARI
20 MM EKSTERNAL BAĞLANTI ÇAPIAM-25 L RM
REF 30102000

led ☉ ☂ ☒ ☒

€ 937

standart 6 delik bağlantı, LED ışıklı, cam çubuklu anguldruva ve piyasemenler için

AM-25 A RM
REF 30103000

☉ ☂ ☒ ☒

€ 613

standart 4-hole sabit bağlantı, ışiksiz anguldruva ve piyasemen başlıkları için

AM-25 A BC
REF 30104000

☉ ☂ ☒ ☒

€ 613

Borden 2(3)-delik sabit bağlantı, ışiksiz anguldruva ve piyasemenler için

HARİCİ SOĞUTMALI HAVA MOTORLARI
20 MM EKSTERNAL BAĞLANTI ÇAPIAM-25 E RM
REF 30105000

☉ ☂ ☒ ☒

€ 432

standard 4-hole sabit bağlantı, ışiksiz anguldruva ve piyasemen başlıkları için

AM-25 E BC
REF 30111000

☉ ☂ ☒ ☒

€ 432

Borden 2(3)-delik sabit bağlantı, ışiksiz anguldruva ve piyasemenler için

SOĞUTMASIZ HAVA MOTORLARI
20 MM EKSTERNAL BAĞLANTI ÇAPIAM-25 RM
REF 30108000

☉ ☂ ☒ ☒

€ 370

standard 4-hole sabit bağlantı, ışiksiz anguldruva ve piyasemen başlıkları için

AM-25 BC
REF 30112000

☉ ☂ ☒ ☒

€ 370

Borden 2(3)-delik sabit bağlantı, ışiksiz anguldruva ve piyasemenler için

SATIŞ SONRASI PARÇALAR

O-ring AM-25 L RM,
AM-25 A RM, AM-25 A BC
hava motoru için – 3 adet
REF 01862300

5,40

LED-halka
AM-25 L RM için
REF 07389100

€ 99

ELEKTRİK MOTORU EM-12 L



Kömürsüz EM-12 L elektrik motoru en iyi dengeli performansı ve ergonomiyi sunar. Düşük ağırlığı ve düşük titreşimli çalışması gün aşırı tedavi akışını büyük ölçüde kolaylaştırır. Sensor- kontrollü sürüş teknolojisi bütün hız aralıklarında hassas ayar sağlar. Entegre LED ışıklar tedavi sahasını gün ışığı kalitesinde aydınlatır.

Geniş uygulama aralığı Restorasyon & Protetik ve Profilaksiden Endodontiye kadar uzar ve güvenilir tork ayarları ve tork kontrolü sunar.

EM-12 L elektrikli motor, tak-çalıştır add-on çözümünü gibi esnek kurulum çözümlerinin yanısıra, dental ünite tamamen entegre built-in versiyonu da mevcuttur.

- ışıklı
- entegre sprey
- sterilize edilebilir

BUILT-IN ÇÖZÜMLER



W&H motor çözümleri artık dental ünitelere entegre built-in çözümler olarak da sunuluyor

Built-in çözümler adı altında W&H dental ünitelerde entegre olabilecek bir seri çözüme sahiptir. Bu da mevcut tedavi ünitelerinin yeni fonksiyonlar ve yenilikçi motorlar ile güncellenmesi ve kişiselleştirilmesi imkânını verir. Her zaman olduğu gibi, odak en üst seviye tedavi verimliliği, ergonomi hem kullanıcı hemde hasta için maksimum konfordur.

Günlük kullanımda ergonomi ve konfor

W&H entegre motor çözümleri ile, ilave çalışma alanlarına ya da çeşitli cihazlar için cerrahi trolleylere, ek zaman tüketen hazırlıklara ve bireysel cihazların yeniden hazırlanmasına, çoklu ayak pedallarına gerek kalmaz. Tüm uygulamalar merkezi olarak kontrol ünitesi ya da dental ünitenin ayak pedalından kontrol edilebilir. Bu şekilde W&H built-in çözümler en üst ergonomiyi ve maksimum konforu, ayrıca etkili zaman yönetimini sağlar.

MF-100 ADD-ON ELEKTRİK MOTORU RESTORASYON & PROTEZ



Add-on MF-100
REF 90000144

- > Kontrol ünitesi
2,000-40,000 rpm
- > Güç kaynağı
- > EM-12 L elektrikli motor
maks.3 Ncm tork

€ 1.905

ADD-ON AKSEUARLARI



tepsi
REF 07944590



Add-on bağlantısı
REF 07842200 € 92



Ekran tutucu
REF 07712700

€ 72

BUILT-IN ANALOG ELEKTRİK MOTORU RESTORASYON & PROTEZ, ENDODONTİ



EM-12 L elektrik
motoru ana ekranlı
REF 90000139

- > MC-1.0 E analog motor kontrolü
- > VE-10 hortum
- > EM-12 L elektrikli motor
- > 2 bağlantı takımı [havali ve elektrikli]

€ 2.580

BUILT-IN ANALOG ELEKTRİK MOTORU RESTORASYON & PROTEZ



EM-12 L elektrikli
motoru kontrol butonlu
REF 90000138

- > MC-1.0 analog motor kontrolü
- > VE-10 hortum
- > EM-12 L elektrikli motor
- > 2 bağlantı takımı [havali ve elektrikli]

€ 1.622

ULTRASONİK SCALER

Built-in SOLUTIONS

Profilaksi&Periodontoloji, Endodonti ve Restorasyonlar için Built-in ultrasonik scaler ile W&H dental üniter için premium kalite sunuyor.

İlgili piezo uç sistem, nihai kullanıcılar ile iş birliği içinde geliştirilmiştir ve bireysel uygulamaların tüm gereksinimlerine cevap verir.

Kendi sınıfında eksiksiz bir takımdır.

- ışiksiz
- ışıklı
- entegre spreyli
- termal dezenfeksiyona dayanıklı
- sterilize edilebilir

ASSISTINA 3X3 / 3X2

assistina 3x3
assistina 3x2



Şimdi sizin için neyin önemli olduğuna konsantre olabilirsiniz: Hastalarınız ! Tam otomatik Assistina 3x3; piyasemen, angldrüva ve türbinler sterilizasyona hazırlanırken zaman kaybetmenizi engeller.

- > Otomatik iç temizlik
- > Otomatik dış temizlik (sadece 3x3 de)
- > Mükemmel yağlama
- > Kısa çevrim süresi
- > Kullanımı kolay
- > Optimum fiyat performans oranı

Assistina 3x2:
3 başlık x 2 aşama
Internal temizlik, yağlama

Assistina 3x3:
3 başlık x 3 aşama
Internal temizlik, eksternal temizlik, yağlama

PIEZO SCALER BUILT-IN ANALOG SET



Piezo scaler PB-3
REF 90000149

€ 813

- > PC-1.0 piezo analog kumanda
- > Besleme hortumu
- > PB-3 piyasemen
- > Elektrikli bağlantı seti
- > Kontrol düğmesi
- > 1x1U, 1X1P, 2x uç anahtarlı torklu



Piezo scaler PB-2 E LED
REF 05852100

€ 1.225

- > PB-2 E led piezo analog kumanda
- > Besleme hortumu
- > PB-3 LED piyasemen, 5x ring LED li
- > Elektrikli bağlantı seti
- > Kontrol düğmesi
- > 1x1U, 1X1P, 2x uç anahtarlı torklu

uygulama kapsamı, kullanılan ultrasonik uçlara bağlıdır.

ASSISTINA 3X3 / 3X2



Assistina paket, içeriği:

- > REF 06257600 RM/ISO adaptör
- > REF 06700100 hava bağlantı hortumu (2 m)
- > REF 06691500 W&H Service Oil F1, MD-200
- > REF 06691600 W&H Activefluid, MC-1100
- > REF 06692700 Dış temizlik halkası (sadece 3x3 de)

Assistina 3x2 MB-200
REF 19922000 € 2.889

Assistina 3x3 MB-300
REF 19923000 € 3.572

ASSISTINA TWIN

assistina TWIN



Bekleme olmaksızın yağlama servisi. Assistina TWIN ile, yağlama işleminin bitmesini beklemek zorunda değilsiniz. Alternatif olarak kullanılabilen iki işlem haznesine sahip ilk cihazdır ki böylece durmaksızın çalışma sağlar.

Yağlama işleminde rekor süre! Yeni Assistina TWIN daha hızlı ve her zamankinden daha kapsamlı bakım sunar. Yenilikçi yağ ve nebulizasyon teknolojisi sayesinde, cihaz saatte 360 başlığa kadar bakım yapabilir. Her türlü klinik için ideal ve pratik çözüm.

- > Servis yağı W&H F1 servis yağı ile ,MD-302
- > Sprey su ve sprey hava kanallarının W&H Activefluid Mc-3022 ile temizliği
- > İkili çember sistemi sayesinde kolay kullanım
- > Sadece 10 saniye kadar kısa işlem süresi
- > HEPA filtrelili aerosol emilimi

ASSISTINA TWIN



Assistina TWIN içeriği:

- > REF 07477400 HPI adaptör
- > REF 02697000 hava bağlantı hortumu
- > REF 07477500 güç besleme ünitesi
- > REF 97484000 TWIN bakım seti

Assistina TWIN MB-302*

REF 30310000

€ 2.461

SATIŞ SONRASI PARÇALAR ASSISTINA TWIN İÇİN



Kompartman penceresi
REF 07477200

60,-



Hava besleme hortumu 2 m
REF 02697000

76,-

SATIŞ SONRASI PARÇALAR ASSISTINA TWIN İÇİN



HPI adaptör
REF 07477400

156,-



Güç besleme ünitesi
REF 07477500

148,-



Kartuş bölümü kapağı
REF 07479500

52,-



Filtre kapak bölümü
REF 07479300

52,-

ASSISTINA TWIN İÇİN AKSESUARLAR



Twin bakım seti
REF 07484000

99,-

İçeriği:

- > W&H Activefluid, MC-302
- > W&H Servis Yağı F1, MD-302
- > HEPA filtre

ASSISTINA 301 PLUS

assistina



Piyasemen ve anguldruva başlıkları, türbin başlıkları, hava motorları, havalı scaler ve W&H cerrahi piyasemen ve anguldruaların otomatik yağlanması ve sprey kanallarının internal temizliği için bakım ünitesi.

- > Kolay ve etkili
- > Enstrümanlarınızın ömrünü uzatır
- > Servis yağı ile internal parçaların yağlanması
- > Sprey su ve sprey hava kanallarının temizleme solüsyonu ile temizlenmesi
- > Kompresör havası ile atıklarının atılması

ASSISTINA 301 PLUS



Assistina 301 plus
ana adaptör ile REF 02685000
REF 00030140 **€ 1.192**

Assistina set içeriği:
> REF 00030140 Assistina 301 plus
> REF 02680500 temizleme ve yağlama seti
> REF 02685000 ana adaptör

REF 00030125 **€ 1.259**

ASSISTINA 301 PLUS AKSESUARLARI



W&H Servis Yağı F1
MD-500 (yağ şişesi, 500 ml)
REF 02675910 **51,70**



W&H temizlik likidi
MC-1000 (1000 ml)
REF 02680200 **27,40**



Assistina 301 plus
keçesi
20 adet
REF 02694500 **16,50**



Assistina 301 plus
için filtre
REF 02670500 **42,50**



temizleme ve yağlama seti,
içeriği:
> MD-500 W&H Servis Yağı F1
> MC-1000 W&H temizlik likidi
REF 02680500 **79,00**



o-ring, RM/ISO adaptör
REF 02695700 **5,40**

SERVIS YAĞI F1

f1 service oil



W&H Servis Yağı F1 maksimum saflıkta sentetik bir yağdır, özellikle W&H türbinler anguldrualar, piyasemenler, cerrahi enstrümanlar, havalı scalerlar ve hava motorlarının bakımı için geliştirilmiştir.

- > Enstrümanlarınız için uzun ömür
- > Yüksek materyal uyumu
- > Sterilizasyona dayanıklı
- > Çok ekonomik

SERVIS YAĞI F1



yağ sprey kutusu, 6' lı paket

MD-400 (400 ml, 6 adet)
REF 10940021

€ 176

SPREY KAFALARI



anguldruva ve piyasemenler için
REF 02038200

5,40




Roto Quick bağlantılı
W&H türbinler, hava
motorları havalı scaler için
REF 02229200

5,40



sabit bağlantılı türbin
ve hava motorları için
REF 02036100

5,40

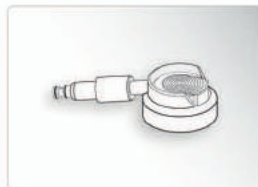

Multiflex® bağlantılı
ürünler için
REF 04396100

8,50

Sprey kafalarınızı ve uçlarınızı saklayınız.
Her yeni yağ spreyi kutusu ile tekrar kullanabilirsiniz.



W&H BUHAR OTOKLAVI

lisa



W&H Lisa B tipi su buharı otoklavı, katı, delikli ve gözenekli maddelerin EN 13060 uyarınca güvenli sterilizasyonu içindir.

- > Kullanıcı ara yüzü ve kullanıcı dostu menü
- > Gelişmiş patentli Eco Dry teknoloji , B sınıfı devir ile 2 kg yük için 30 dakika daha kısa devir süresi sağlar.
- > Gerçek zamanlı uzaktan kontrol için Wi-Fi kit ve mobil uygulama ile (Remote WiFi Kit) tam izlenebilirlik
- > Kolay temizlik için küçük boşluklu revize tasarımı
- > Dokunmatik ekranda bakım için animasyonlu kılavuz
- > Ethernet bağlantısı, bir etiket yazıcısına dört aletin bağlanmasını sağlar.
- > Pille çalışan kapı açma aracı
- > Başlıklar için hızlı devir
- > Ertelebilir devir başlangıcı
- > Otomatik su doldurma vanası
- > Su seperasyon sistemi, toz filtresi ve su kalite sensörü
- > Modüler ön ayak
- > Lisa 17 , 17 Lt ve 22 Lt olarak mevcuttur.

LISA-W&H BUHAR OTOKLAVI



Lisa, içeriği:

- > Çevrilebilir kafes
- > 5 alüminyum tepsi
- > Boşaltma hortumu
- > Tepsi tutucu
- > 8 GB SD kart
- > Kapı açma aracı
- > Fabrika testi

Lisa 17
REF 19931110

€ 7.199

Lisa 22
REF 19932110

€ 7.714

W&H BUHAR OTOKLAVI

lina



W&H Lina B- tipi su buharı otoklavları , EN13060 a uyumlu yekpare, oyuklu ve gözenekli ürünlerin güvenli sterilizasyonu içindir.

- > Küçük miktarda bütün yük tipleri için ECO-B devri
- > Bütün sterilizasyon opsiyonları arasında kolayca gezinmek için tuş takımı
- > Patentli su seperasyon ve filtreleme sistemi
- > Built-in kafesinde toz filtresi
- > Ertelebilir ve programlanabilir devir
- > Su kalite analizörü
- > Otomatik su dolun valfi
- > USB Stick de otomatik dijital data kaydı
- > Lina otoklav 17 l ve 22 l hacimlerde mevcuttur.

LINA – W&H BUHAR OTOKLAVLARI



Lina, içeriği:

- > Çevrilebilir kafes
- > 3 alüminyum tepsi
- > huni
- > boşaltma hortumu
- > tepsi tutucu
- > fabrika testi

Lina MB17
REF 19941103

€ 5.345

Lina MB22
REF 19942103

€ 5.860

otomatik su dolun ve USB opsiyonlu:

Lina MB17
REF 19941104

€ 5.562

Lina MB22
REF 19942104

€ 6.077

W&H STERİLİZASYON TAKİP SİSTEMİ



Lisa safe bağlantı kitini,
otoklav modeline göre seçiniz.

LisaSafe etiket yazıcı
REF 19721100 € 700



Lisa safe bağlantı kiti
Lisa 500 ve Lina için
REF 19721102 250,-



Lisa safe bağlantı kiti Lisa için
REF 19721123 50,-

Seri bağlantı kablosu +1 rulo
2100 etiket +1 mum/reçine
şerit +donanım kilidi

USB bağlantı kablosu +1 rulo
2100 etiket +1 mum/reçine
şerit +aktivasyon kodu talimatları

W&H STERİLİZASYON TAKİP SİSTEMİ



LisaSafe sarf kiti
2100 etiketin 2 rulosu
ve 2 mum/reçine şeritler
REF A810500x 79,-



Seal2
poşetleme makinası,
duble rulo tutuculu,
12mm mühür üretme
REF 19722101 € 607



Barkod tarayıcı
REF 19721112 € 179



Lina için USB ve seri bağlantı
REF X051124X 230,47

USB kiti* , otomatik olarak harici
USB'ye döngü kayıtlarını alır.

*Seri bağlantıyı , Lisasafe etiket
yazıcı ve bir 8GB usb içerir.

W&H STERİLİZASYON TAKİP SİSTEMİ



Lina için
kablolu termal yazıcı

Sprint
REF 19721108 420,-



Sprint için rulo termal kağıt
REF A810504X 1,95



standart kağıt rulosu,57 mm, Print için
REF A700140x 1,-

Duble kağıt rulosu, 57 mm, Print için
REF A700141x 3,02



Print için kartuş
REF A700103x 9,50

W&H TAKİP SİSTEMİ OPSİYONLARI



Lisa 17&22 için uzaktan
wi-fi kit (USB dongle)
REF 19721121 € 154

Avrupa ülkeleri için mevcuttur.
Diğer ülkelere sipariş üzerine temin
edilebilir.



Ethernet kablo
(LAN) 3m
REF A801500X 9,50



Tek fazlar için elektrik
hattı adaptör kiti
REF 19721122 € 154



LisaWare LAN (LAN bağlantı)
REF 19721103 € 607

Lisa 500 & 300 devir
kayıtlarını bilgisayarda
saklamak için bilgisayar yazılımı,
LAN (Yerel Ağ Bağlantısı) veya
direkt seri bağlantı yardımıyla

LisaWare RS232 (Seri bağlantı)
REF 19721104 € 401

SU SAĞALTIMI BÜTÜN W&H OTOKLAVLAR İÇİN AKSESUARLAR



Osmo (otomatik doldurma)
birkaç otoklava yüksek
miktarında su sağlama sistemi
REF 19723100 **€ 998**



Dem 10 ve 32
için reçine kartuş
2 set : 2 adet veya 2 refill
REF A812100x 175,-

BÜTÜN W&H OTOKLAVLAR İÇİN AKSESUARLAR



Multidem C27
REF 19723112 **€ 367**

W&H veya diğer marka
otoklavlara su sağlama




Lina su bağlantı kiti
REF X051110X 131,87

Lina otoklavlara Multidem
ve Osmo dan otomatik dolun
yapmayı sağlayan su bağlantı kiti



Multidem C27 reçine kartuş
REF A812016X **€ 183**

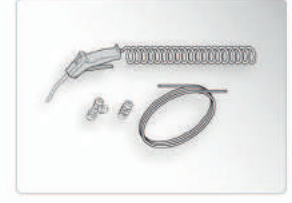

Sprey tabanca kiti
REF A812018X 87,32

BÜTÜN W&H OTOKLAVLAR İÇİN AKSESUARLAR




Dist
Musluk suyunun distile edilmesi
için Distile su cihazı, 4 litre kapasite
REF 19723101 320,-



Prim
Suyun iletkenliğini ve saflığını
ölçmek için Su kalite test edici
REF A800502x 131,87



Dist için aktif
kömür poşeti 12 adet
REF H802011x 16,-

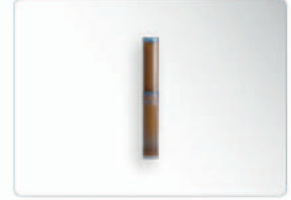

Demin 20 için
reçine kartuş 2 refills
REF A812000x 149,-



Dist için kireç
temizleyici 500g
REF H802010x 14,-



Dist için bidon
REF A811019X 24,24



huni
REF F540903x 9,50



çabuk kuplingleli hortum
REF S230900x 6,60

SU SAĞALTIMI BÜTÜN W&H OTOKLAVLAR İÇİN AKSESUARLAR



PERFECTA
300 / 600

perfecta

Geniş materyal yelpazesi, üst düzey gereksinimler, sürekli değişen ihtiyaçlar - diş teknisyenleri için taze ekmektir. Perfecta 300 / 600 ile çok çeşitli amaçlar için kullanabileceğiniz, sizin ve müşterilerinizin fikirlerini zahmetsizce hayata geçirebileceğiniz güçlü bir laboratuvar cihazına sahipsiniz.

- > Üfleme fonksiyonu sayesinde zamandan kazandırır (Perfecta 600)
- > Kumanda ünitesi sayesinde ergonomik çalışma
- > Bütün fonksiyonlar ve çalışma ayarları görüş alanındadır
- > Otomatik modlar
- > Geniş hız ve tork aralığı:
1,000 – 40,000 rpm / 5.5 Ncm (Perfecta 300)
1,000 – 50,000 rpm / 7.8 Ncm (Perfecta 600)

Perfecta 300 »E-tipi« versiyonu olarak da sipariş edilebilir:
ISO bağlantılı elektrikli motor LA-3E

bkz sayfa 204



PERFECTA
900

perfecta

W&H te, insanlar önceliklidir.

Bu nedenle, Perfecta dizisi geliştirilirken, kolay kullanım ve ergonomik yenilikçi tasarıma özel hassasiyet gösterildi. Geleneksel laboratuvar türbinlerinden farklı olarak, Perfecta 900 mükemmel hız ve yüksek devir başlığı sayesinde zirkonyum oksit ve diğer yüksek performans seramiklere bütün materyallerin işlenmesine uygundur.

- > 100,000 rpm ile güçlü yüksek devir başlığı
- > En uygun hız ayarı sayesinde, materyalde daha az ısınma ve daha uzun çalışma ömrü
- > Geliştirilmiş sızdırmazlık sistemi ve hava sızdırmazlığı
- > Üfleme fonksiyonu sayesinde zamandan kazandırır
- > Kontrol ünitesi yardımıyla ergonomik çalışma
- > Otomatik modlar

Perfecta 900 motor piyasemeni
LA-66 ile de uyumludur.

PERFECTA 300



komple kontrol ünitesi (230 V), güç kablosu,
motor piyasemeni, başlık tutacı ve masa üstü
ve dizden kontrol ünitesi için kumanda ünitesi

masa üstü kontrol ünitesi

LA-323 T (230 V)

REF 14933000

€ 1.433

ayaktan kontrol ünitesi

LA-323 F (230 V)

REF 14933200

€ 1.237

dizden kontrol ünitesi

LA-323 K (230 V)

REF 14933100

€ 1.433

PERFECTA 600

komple kontrol ünitesi (230 V), güç kablosu,
motor piyasemeni, motor tutacı ve masa üstü
ve dizden kontrollü üniteler için kumanda ünitesi

masa üstü kontrol ünitesi

LA-623 T (230 V)

REF 14936000

€ 1.873

ayaktan kontrol ünitesi

LA-623 F (230 V)

REF 14936200

€ 1.675

dizden kontrol ünitesi

LA-623 K (230 V)

REF 14936100

€ 1.873

PERFECTA 900

komple kontrol ünitesi (230 V), kumanda ünitesi, güç
kablosu, yüksek devir piyasemeni, piyasemeni tutacı,
hava tedarik hortumu, soğutma tedarik hortumu
(sadece harici soğutma sistemi olan modellerde)

dahili soğutma sistemli:

harici soğutma sistemli:

masa üstü kontrol ünitesi

LA-923 TT (230 V)

REF 14939300

€ 2.146

masa üstü kontrol ünitesi

LA-923 T (230 V)

REF 14939000

€ 2.146

Mükemmel bir bakımın sağlandığı aletlerin ömrü daha uzundur



Assistina plus ile bakımın avantajları

Otomatik dönerken yağlamayla yağ en iyi şekilde dağıtılır ve aynı ölçüde bir yağ katmanı oluşur. Kir partikülleri çözülür ve uzaklaştırılır. Aletlerin ömrü belirgin şekilde uzar, buna karşın servis masrafları azalır.

Diğer artıları

Otomatik yağ dozajı sayesinde yalnız aletlerin en iyi şekilde yağlanması için gereken kadar yağ eklenir; ne eksik, ne fazla.

Assistina'nın mükemmel yönleri: W&H Service Oil F1

W&H Service Oil F1, W&H Araştırma'sının bir ürünüdür ve size tüm W&H aletlerinin bakımını en iyi biçimde yapma güvencesini verir.



PEOPLE HAVE PRIORITY



Oral cerrahi ve implantoloji

Güvenli, pratik, uyumlu.

YENİ



İhtiyaçlarınızı karşılar.
Bugün ve yarın.

implantmed

ÇİFT
FONKSİYON

ACTEON® EQUIPMENT, yeni nesil portatif air polisher cihazlarını geliştirdi: çift fonksiyonlu AIR-N-GO® easy

- Üst diş eti parlatma için "SUPRA fonksiyonu": günlük koruyucu parlatma
- Alt diş eti parlatma için "PERIO fonksiyonu": bakım, diş eti ve peri-implant tedavileri

Bu tıbbi cihaz, kullanım kolaylığını performansla bir araya getirir.

TEK BİR
ANGULDURVA

Çok sayıda bakım ve tedavi çeşidi için tek bir anguldurva

AIR-N-GO® easy, günlük yaşamınızı kolaylaştırmak için zorunlu fonksiyonları güvenilirlikle bir araya getirir:

- Hızlı sistem açılışı: yüksek hızlı anguldurva konektörüne doğrudan bağlantı
- Daha fazla hareket serbestliği: 3600 dönüş, bakım gereken alanların hızlı ve doğru tedavisi.
- Daha hızlı anguldurva temizliği: ana parçalar sökülebilir.

AirNGo Portatif Airflow Cihazı

€ 1220

Satelec Prophy Max Kavatron Cihazı



Yeni Satelec® Prophy Max™ çoklu klinik ultrasonik ünite hava parlatıcısı ile birlikte kombine edilmiş yenilikçi ve pratik bir tasarıma sahiptir. Hekimin ellerinin serbest kaldığı anda çok fonksiyonlu ayak pedalı ile tedaviye konsantre olmasını sağlar.

€ 4250

AIR MAX Airpolisher



€ 2550

AIR-N-GO® EASY AKSESUARLAR



AIR-N-GO® EASY PERIO KIT

€ 547



AIR-N-GO® PERIO easy nozzle

€ 491



AIR-N-GO® PERIO nozzle

€ 491

AirNGo Klasik AirFlow Tozu

250g



Diştaşı temizliği sonrası yüzey düzeltme
Beyazlatma için hazırlık
İnter-proksimal alanların, fissürlerin
ve çatlakların temizlenmesi
Aşındırma öncesi diş yüzeyinin hazırlanması
Ortodontik braketlerin temizlenmesi
Üst diş eti biyofilmlerinin, plakların,
lekelerin ve geçici siman artıklarının
çıkarılması

"CLASSIC"

Sodyum bikarbonat esaslı ortalama parçacık büyüklüğü 76µm
AROMALAR: Nötr, Kola, Ahududu, Nane ve Limon

€ 25



AirNGo Klasik AirFlow Tozu

20g

"CLASSIC"

Sodyum bikarbonat esaslı ortalama parçacık büyüklüğü 76µm
AROMALAR: Nötr, Kola, Ahududu, Nane ve Limon

50'li € 110

Tekli € 2,90

AirNGo Pearl 250 gr AirFlow Tozu

250g



"PEARL"
Kalsiyum karbonat
esaslı ortalama
parçacık büyüklüğü
55µm
AROMA: Nötr

Zorlu lekelerin ve kompozitlerin
zarar verme riski olmadan
"çok hızlı" temizlenmesi
Not: İçeriğinde Sodyum bulunmaması,
hassas hastaların ya da tuzsuz diyet yapanların
tedavisine olanak sağlamaktadır

€ 36

Acteon AirNGo Perio

160g



"PERIO"
Glisin esaslı
Ortalama parçacık
büyüklüğü
25µm
AROMA: Nötr

Alt diş eti biyofilmlerinin çıkarılması
Diş eti hastalıkları ile peri-implantitis tedavisi
Diş eti cebi 3mm -8mm
Diş eti hastalıkları ile peri-implantitis tedavisi
Diş eti cebi 8mm -10mm
Diş eti bakımı
8mm'e kadar diş eti cebi

€ 32



VARIOTIME®

Variotime geliştirilmiş A-silikon olup mükemmel sonuçları ve kişiye özel çalışmayı garanti eder. Hassasiyet ve çalışmaya bağlı adaptasyon uyum içerisinde olağanüstü sonuçlar meydana getirir.

Variotime ağız içi sıcaklığıyla polimerizasyon kinetiğini kontrol ederek ölçü ağıza yerleştirildikten sonra hızlıca sertleşmeye başlar. Geliştirilmiş sertleşme süresi konsepti sayesinde 1-2,5 dakika arasında esnek çalışma zamanı kazandırarak, her zaman 2,5 dakikada ağız içinde sertleşme gerçekleşir.

Variotime'ın 6 çeşit vizkozitesi kolay, etkili ve güvenli çalışma sağlar.

Variotime; Heraeus Kulzer'in 25 yıldan fazla hassas ölçü maddelerindeki tecrübesiyle A-silikon konusundaki derin bilgisinin birleşimidir.

Endikasyonları

- Kuron-köprü ölçüleri
- Inley-Onley ölçüleri
- Implant ölçüleri
- Transfer ve fiksasyon ölçüleri
- Fonksiyonel ölçüler

Avantajları

- Hassasiyet ve kesinlik
- Bireysel gereksinimlere uygun özel çalışma prosedürü
- Kolay, etkili ve güvenli çalışma
- Her zaman kısa intraoral sertleşme ile kombine değişken çalışma zamanı
- 25 yıldan fazla hassas A silikon ölçü maddeleri konusundaki tecrübe, klinikte kanıtlanmış
- Tüm ölçü teknikleri için 6 vizkozite
- Elle karıştırma, kartuş ve Dynamix kartuş (sosis) sistemleri mevcut





KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

ÖLÇÜ MADDELERİ / A-SİLİKONLAR

VARIOTIME®

ELLE KARIŞTIRMA KİT VE REFİLLERİ



Easy Putty Refil

600 ml Easy Putty
(300 ml baz + 300 ml katalizör)

€ 57

DYNAMIX KARTUŞ REFİLLERİ



Dynamix Heavy Tray Refil

2 x 380 ml Dynamix Heavy Tray
2 Dynamix Karıştırma Ucu
1 Sabitleme Halkası

€ 115



Dynamix Monophase Refil

2 x 380 ml Dynamix Monophase
2 Dynamix Karıştırma Ucu
1 Sabitleme Halkası

€ 115



Dynamix Karıştırma Ucu

50 Dynamix Karıştırma Ucu
1 Dynamix Sabitleme Halkası

€ 63

50 ML KARTUŞ REFİLLER



Medium Flow Refil

2 x 50 ml Medium Flow
10 Karıştırma Ucu (sarı)

€ 31



Light Flow Refil

2 x 50 ml Light Flow
10 Karıştırma Ucu (sarı)

€ 31



Extra Light Flow Refil

2 x 50 ml Extra Light Flow
10 Karıştırma Ucu (sarı)

€ 31



Monophase Refil

2 x 50 ml Monophase
10 Karıştırma Ucu (yeşil)

€ 31



DYNAMIX® SPEED

Dynamix karıştırma cihazı, karıştırma cihazlarının sağladığı tüm avantajları sağlamasının yanısıra iki kat hızlı olması ile zamandan tasarruf eder ve hava kabarcığı oluşturmaz. Tüm fonksiyonlarıyla kolay kullanımı sağlayarak çalışma güvenliğini artırır.

Ölçü maddesi karıştırılması ve çıkarılması, kullanıcının özel isteğine bağlı olarak her bir uygulama için elektrikle kontrol edilir ve ölçü kaşığının yüksek hızla basit ve güvenli olarak dolmasını sağlar. Yeni Dynamix Speed karıştırma cihazı Heraeus Kulzer A-silikonları; Variotime ile mükemmel uyum sağlar.

Endikasyonları

- Dynamix Speed karıştırma cihazı güçlü olup tüm yoğunluktaki materyalleri çok iyi karıştırır. (puttyler dahil)
- Tüm 5:1 folyo (360ml) ve kartuşlara (380 ml sosis) uygundur.
- Ölçü maddeleri özel hızlarına bağlı olarak hızlı modu kullanmak üzere işaretlenmiştir (* yıldız işareti Variotime ürünleri için)



Avantajları

- Çok hızlı karıştırma ve 15 sn gibi kısa sürede kaşık materyalini dozajlama
- Homojen ve hava kabarcıksız karıştırma
- Sabit karışım kalitesi, kullanıcıdan bağımsız olarak
- Ölçü maddesinde doğru dozaj
- Seçilebilir 3 hız modu - 2 tane kaşık doldurma (Dynamix hızlı mod ve standart mod) ve 1 tane şırınga doldurma için
- Pistonlar için otomatik itme
- Kartuşları değiştirmek için pistonu otomatik geri sürme
- Kapak açıkken piston çekilmemesi
- Işıklı işaretli dolum seviye göstergesi

DYNAMIX SPEED

Dynamix Speed Karıştırma Cihazı

€ 997

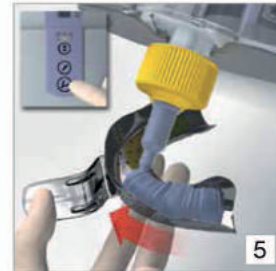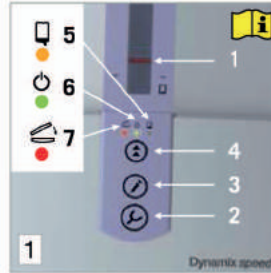



OPTOSIL® COMFORT/XANTOPREN®

Optosil Comfort ve Xantopren dental kliniklerde günlük kullanım için uygundur. Klasik Putty ile düşük vizkozitedeki materyalin birleşmiş sistemidir. Kullanıcı dostudur. Hassas ve detaylı reproduksiyonu sağlar.

Endikasyonları

Optosil Comfort Putty

Kaşık Materyali

- 2 aşamalı teknik
- Sandviç tekniği
- Fonksiyonel ölçüler için fonksiyonel kenar yapımı için

Xantopren H Green

- Çift karıştırma tekniği için yüksek vizkozitede kaşık materyali

Xantopren L Blue

Düşük vizkozitede 2.ölçü maddesi

- 2 aşamalı teknik
- Çift karıştırma tekniği için

Xantopren VL Plus

Çok düşük vizkozitede 2.ölçü maddesi

- 2 aşamalı teknik

Aktivator Plus

Optosil Comfort ve Xantopren için aktivatör

OPTOSIL COMFORT



Optosil Comfort

900 ml kap

€ 16

XANTOPREN L



Xantopren L blue

140 ml tüp

€ 12

XANTOPREN VL



Xantopren VL plus

140 ml tüp

€ 12

XANTOPREN H



Xantopren H green

140 ml tüp

€ 26

AKTİVATÖR



Aktivator Universal Plus

60 ml tüp

€ 10

OPTOSIL & XANTOPREN AKTİVATÖR SET



Optosil & Xantopren Set

900 ml Optosil
140 ml Xantopren L veya VL
60 ml Aktivatör

€ 33



ÖLÇÜ MADDELERİ / C-SİLİKONLAR / ALJİNATLAR

XANTOPREN® M MUCOSA / ALGINOPLAST® / ALLIGAT CHROMA

XANTOPREN® M MUCOSA

Xantopren M Mucosa, hassas mukozalar için özel olarak geliştirilmiştir.

Endikasyonları

- Mukoza ölçüleri için orta vizkozitede ölçü maddesi

Avantajları

- Tiksotropik, örn: baskı olunca akışkan, baskı durunca durağan
- Yutak bölgesine akmaz
- Kişisel ayarlanabilir çalışma zamanı
- Dezenfekte edilebilir



Xantopren M mucosa

140 ml tüp

€ 21

ALGINOPLAST®

Alerji yaratmayan, tozsuz Alginoplast dişhekimlerinin modern ölçü maddeleri içinde ihtiyaçlarını karşılayan, karıştırması kolay aljinattır. Mükemmel detay verir, elastik ve yırtılmaya karşı dirençli olup alçılarla mükemmel uyumludur.

Alginoplast

500 g paket

€ 10



HERAPLAST HD REGULAR SET

Hızlı, toz çıkarmayan, elastik yırtılmaya karşı dayanıklı aljinat. Kısa sürede ağızda sertleşerek detaylı ölçüler almanızı sağlar.

Heraplast HD

454 gr paket

€ 5



HERAPLAST HD COLOR CHANGE

Hızlı, toz çıkarmayan, renk değiştiren, elastik ve yırtılmaya karşı dayanıklı aljinat. Kısa sürede ağızda sertleşerek detaylı ölçüler almanızı sağlar.

Heraplast HD Color Change

454 gr paket

€ 5





VARIOTIME BITE®

Heraeus Kulzer, hassas Variotime ölçü maddelerini tamamlamak için taranabilen (CAD/CAM) kapanış materyali; Variotime Bite'ı geliştirdi.

Hassas ölçü maddeleri gibi Variotime Bite da kolay, etkili ve güvenli kullanıma sahiptir. 30 saniye gibi uygun çalışma süresi vardır ve ağızda kısa sertleşme süresi 30 saniyedir. Minimum kırılma riski ve bisturi ile kazıma ve kesme çok kolaydır. Krema kıvamındaki yoğunluğu sayesinde ısırtmaya uygundur. Son sertliği D 40'dır.

VARIOTIME BITE Refil

2 x 50 ml Bite
10 Karıştırma Ucu (yeşil)

€ 31



MEMOSIL® 2

A-silikon bazlı Memosil 2 protetik, restoratif, implantoloji ve ortodontik dişhekimliğinde kullanılan çok yönlü özel bir kapanış ölçüsüdür. İnsizal kenarların ölçüsü az baskı ile, yüksek son sertliğe bağlı olarak herhangi bir kırılma olmadan ağız içerisinden alınabilir. Otomatik karıştırma sistemi zamandan tasarruf sağlar ve oluşabilecek hataları önler.

Memosil 2 transparan bir A-silikon olup bu özelliği sayesinde x-ray bilyelerini (kılavuz) yerleştirmede göz kontrolü sağlar. Memosil 2 ışık geçirgenliği sayesinde dolgu ve geçici maddelerin bir tutucu ile ışıkla polimerizasyonuna izin verir.

Endikasyonları

- Işıklı sertleşen posterior kompozitler için oklüzal destek
- Anteriör bölgede geçici materyaller, dolgular ve vernerler için anahtar
- Implant planlamasında x-ray bilyelerini (kılavuz) sabitlemede tespit materyali olarak
- Alçı modelde braket yapımında transfer matrisi modeli olarak. Braketler kolayca posterior alana taşınabilir.

Avantajları

- Hasta ağızda kolay ve direkt uygulama
- Işıklı sertleşen kompozitlerin Memosil 2 içinde polimerizasyonu
- Kompozit dolgu maddelerinde hiçbir inhibisyon tabakası olmaz
- Nötr tat ve koku
- Dezenfekte edilebilir

Memosil 2

2 x 50 ml Memosil 2
12 Karıştırma Ucu (yeşil)

€ 57





CHARISMA® DIAMOND DOĞAL GÜZELLİĞİN YENİ BOYUTU

Charisma Diamond üniversal nano hibrit kompozit olup, ileri estetik ile düşük büzülme ve yüksek direnci kombine eder. Charisma Diamond ile daha az komplike vakalarda tek tabakada, kompleks vakalarda tabakalama yöntemi ile olağanüstü sonuçlar elde edersiniz.

Bu materyal benzersiz olarak komşu dişlerin rengiyle bütünleşerek olağanüstü bir doğal görünüm oluşturur. Charisma Diamond'un patentli TCD matrisi, özel bir düşük büzülme monomerine dayalıdır. Minimum büzülme ile yüksek dayanıklılığı kombine eder. Bu kompozitin yüksek bükülme dayanımı çiğneme basıncına karşı koyar. Bu, kırık riskini minimize ederek uzun süreli restorasyonlar sağlar. Çok düşük büzülme stresi kenar delaminasyonunu engelleyerek restorasyonu sekunder çürüklerden ve renk değişikliğinden korur. Charisma Diamond ile dişhekimleri tüm kompleks sınıf I-V kavite restorasyonları restore edebilir. Charisma Diamond 13 üniversal , 4 opak dentin ve 4 insizal renk olmak üzere 21 ayrı renk seçeneği sunar.

Endikasyonları

- Black'e göre Sınıf I-V dolguların yapılması
- Dişlerde renk ve şekil düzeltilmesi (örn. diastema kapatma)
- Travma ya da periodontal hastalık sonucu sallanan dişlerin sabitlenmesinde
- Primer dişlerin restorasyonunda
- Porselen ve kompozitlerin tamirinde (uygun bir tamir sistemiyle kombine edilerek)
- Direkt kompozit venerlerde
- Kor yapımında

Intro Kit

3 x 4 gr şırınga
(A2, A3, OM)

€ 136

Basic Kit

6 x 4 gr şırınga
(2 x A2, A3, A3.5, OM, OD)

€ 241

Master Kit

10 x 4 gr şırınga
A2, A3, A4, A3.5, B2, C2, OM,
OD, CL, BL
Gluma 2Bond, Gluma Etch Jel
Renk Skalası, aksesuarlar

€ 367

Refiller

Üniversal: A1,A2, A3, A3.5, A4, B1,
B2, B3, C2, C3, D3, BL, BLX
Dentin: OL, OM, OD, OB
Insizal: CL, AM, CO,YO

Her biri 4 gr € 42





DOLGU MADDELERİ / ÜNİVERSAL KOMPOZİTLER

CHARISMA® TOPAZ

CHARISMA® TOPAZ

Doğal Restorasyonlar İçin Geliştirilmiş Formül

■ Charisma Topaz ışıkla polimerize olan , formülü patentli TCD matrisine dayanan , radyopak , nano hibrid kompozittir. Bu geliştirilmiş formül hastalarınızı doğal güzelliğe kavuşturacak restorasyonlar elde etmeniz için Charisma'nın kanıtlanmış kolay kullanım özellikleriyle kombine edildi.

Zahmetsiz , Kolay Kullanımın Keyfine Varın

■ Charisma Topaz'ın yumuşak ancak stabil ve yapışmaz yapısı uygulamada kolaylık sağlar.
■ Nano partiküllerden oluşan doldurucu sistemi kolay cilalamayı mümkün kılarak uzun süreli ve yüksek parlaklıkta restorasyonlara erişmenizi sağlar.

Üstün Fiziksel Özelliklerden Faydalanın

■ Patentli TCD matrisi , seconder çürükler ve kırık oluşum riskini azaltmak için gerekli olan yüksek direnç ve düşük büzülme meyi kombine eder.
■ Yüksek radyopasitesi güvenli ve güvenilir bir diagnozu mümkün kılar.
■ Charisma Topaz tüm geleneksel bonding materyalleri ve teknikleri ile uyumludur.

Üstün Tabakalama Özelliklerini Keşfedin

■ Az komplike vakalarda kolay ve hızlı tek tabaka yöntemini kullanarak minimum çaba sarfedersiniz.
■ Geniş tabakalama seçenekleri kompleks vakaların doğal görünümde restore edilmesini mümkün kılar .
■ Mükemmel renk skalası sayesinde restoratif marjınlar farkedilmeyecek şekilde, doğal yapıya uygun olarak kapatılır.

Renk Skalası	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	C2	OL	OM	OD	OB	BL	CL	CO
Opak Dentin	OL	OL	OM	OD	OD	OL	OM	OM	OL							
Üniversal	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	C2							
İnsizal															CL	CO

Basic Kombi Kit

6 x 4 gr şırınga
(A2, A3, A3.5, B2, CL, OM)
1x4 ml GLUMA Bond Universal
1x2.5 ml GLUMA Etch 35 Gel,
Tabakalama göstergesi, aksesuarlar

€ 178

Master Set

10 x 4 gr şırınga
(A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, CL, OL,
OM, OD)
1x4 ml GLUMA Bond Universal 1x2.5
ml GLUMA Etch 35 Gel,
Renk skalası, tabakalama göstergesi,
aksesuarlar

€ 178

Refiller

Üniversal: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1,
B2, B3, C2
Dentin: OL, OM, OD,
İnsizal: CO, CL
Bleach: BL, OB

her biri 4 gr € 36





DOLGU MADDELERİ / AKIŞKAN KOMPOZİTLER / POSTERİÖR KOMPOZİT

CHARISMA® OPAL FLOW / CHARISMA® FLOW / SOLITAIRE® 2

CHARISMA® OPAL FLOW

Charisma Opal Flow nano teknolojiye dayalı yeni akışkan kompozittir. Polimerizasyondan sonra çevrelenen dentin rengine uyarak doğal dişte herhangi bir marjin görülmemesini sağlar.

Endikasyonları

- Genişlemiş fissürlerin örtülmesinde
- Kavite astarlama - Sınıf I ve II dolgularda ilk tabaka olarak
- Sınıf V dolgularda
- Direkt oklüzal baskının olmadığı minimal invazif sınıf I ve II dolgularında
- Minimal invazif sınıf III dolgularda
- Direkt veya indirekt restorasyonlarda doğru bir bonding ajanı ile küçük düzeltmelerde
- Sallanan dişlerin splintlenmesinde



Asorti

4 x 1,8 gr şırınga
(A1, A2, A3, Baseline)

€ 89

Refiller

(A1, A2, A3, A4, B2, OM, Baseline)

her biri 1.8 gr € 26

CHARISMA® FLOW

Yılların klasiği Charisma'nın ideal tamamlayıcı bu akışkan kompozit; düşük viskozitesi ve mükemmel tiksotropisiyle pek çok endikasyon için ideal seçenektir.

Avantajları

- Uygun akışkanlık (tikotropik)
- Çok yüksek radyo-opasite
- Düşük büzülme stresi ve yüksek bükülme dayanımı
- Çok iyi cilalanabilme
- Charisma kompozitleri ile mükemmel uyum



Refiller

(A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, Baseline)

Her biri 1,8 gr € 21

SOLITAIRE® 2

Solitaire 2 direkt posterior restorasyonlar için, ışıqla sertleşen, kondanse edilebilir, flor salımlı, radyopak, poliam esaslı kompozittir. Modern diş hekimliğindeki komplike olan indirekt restorasyonlara alternatif olarak direkt dolgu yapımı için geliştirilmiştir. 1997 yılından beri Solitere 2'nin posterior bölge direkt restorasyonlarındaki başarısı açık bir şekilde kanıtlanmıştır.

Endikasyonları

- Sınıf I ve II kaviteler
- Sınıf V kaviteler
- Travma sonucu sallanan dişlerin sabitlemesinde
- Süt dişlerin restorasyonunda
- Kor materyali olarak



Avantajları

- Uzun süreli ve güvenli marjinal adaptasyon
- Olağanüstü ısırma toleransı ve mükemmel aşındırma direnci
- Yüksek marjinal yoğunluk
- Yumuşak ve kolay kondanse edilebilir yoğunluk
- El aletine yapışmadan mükemmel işlenebilir özellikleri
- Mükemmel proksimal kontak noktaları

Refiller

A1, A2, A3

her biri 4 gr € 44



VENUS® BULK FILL

KOLAY, HIZLI - GÜVENLİ!

Venus Bulk Fill düşük büzölmeye sahip, bulk tekniđi ile posterior restorasyon yapımı için üretilmiş, akışkan kompozittir.

- Etkinlik: Venus Bulk Fill Sınıf I ve Sınıf II kaviterlerin 4 mm'ye kadar artışlarla kolayca tabakalanmasına izin vererek kompleks 2 mm katmanlama tekniklerine olan ihtiyacı azaltır.
- Kolay Kullanım: Kolay kullanım özelliđi uygulama adımlarını azaltır, kavite zemini ve duvarlarının ideal kaplanmasını sağlar. Sonuç: Hızlı ve kusursuz çalışma
- Güvenlik: Venus Bulk Fill ışığın çok derine nüfuzuna izin vererek 4 mm kalınlığa kadar katmanlar için güvenli polimerizasyon sağlar. Düşük büzölme özelliđi uzun ömürlü restorasyonları, yüksek radyopasitesi güvenilir bir diagnozu size garanti eder.



Refil

Universal Renk

1,8 gr € 35



PLT Refil

Universal Renk

10x0.2 gr € 50

VENUS® COLOR

HASTALARINIZ KADAR ÖZEL

Hastalar her zaman tercihlerini parlak beyaz dişlerden yana kullanmazlar. Kimi zaman hastalarınızın karakteristik görüntüsünü restore ederken bir tutam renklendirmeye ihtiyaç duyabilirsiniz

Karakteristik Görünümünü Koruyan Estetik Restorasyonlar İçin Bir Tutam Renk...

İsterseniz minedeki çatlakları, isterseniz renklenmiş fissürleri veya beyazlıkları düzeltin. Restorasyonunuz tamamen doğal gözükecek.

Endikasyonları

- Mine çatlakları
- Beyaz lekeler
- Aşınmış yüzeyler
- Fissürler
- Renklenmeler
- Renklenmeleri kapamda renkli ara katman olarak

Refil

Beyaz, Mavi, Sarı, Amber, Çikolata

1 gr € 26

Asorti

Beyaz, Mavi, Sarı, Amber, Çikolata

5x1 gr € 126





GLUMA® BOND UNIVERSAL HERŞEY İÇİN TEK DAMLA

Kulzer yeni bonding ajanı ile size birden fazla bonding seçeneğini tek şişede sunuyor : Gluma Bond Universal. Bu yeni ışıkla polimerize olan etkili adeziv, tüm bondingleme teknikleri ile uygulanabilir ve bir dual katalizöre ihtiyaç duyulmadan tüm dental materyaller ile uyumludur.

Endikasyonları

- Tüm kavite sınıfları (Black) için ışıkla , dual veya kendiliğinden polimerize olan metakrilat bazlı kompozit / kompomer kullanılarak gerçekleştirilen direkt restorasyonların bondingleme işlemi.
- Işıklı, dual yada kendiliğinden polimerize olan kor yapım materyallerinin bondingleme işlemi
- Dişin aşırı hassas bölgelerinin kapatılması
- Amalgam restorasyonlarından önce kavite örtme işlemi
- Fissür örtücülerin bondingleme işlemi
- İndirekt restorasyonların geçici simantasyonundan önce kavitelerin ve kor preperasyonlarının kapatılması
- İndirekt restorasyonların ışıkla, dual yada kendiliğinden polimerize olan adeziv rezin simanlar ile simantasyonu
- Kompozit ve kompomer , porselen-metal karışımı, metal ve tüm seramik restorasyonların intraoral onarımı

Avantajları

- Tüm dental materyaller ile uyumlu
- Nem kontrol sistemi ile mükemmel dentin nüfuzu, hızlı ve güvenilir bonding kuvveti.
- Kolay kurutma, daha az hassasiyet ve homojen bonding katmanı
- Tüm bonding teknikleri ile kullanıma uygun
- Yeni damla kontrol sistemi ile ekonomik kullanım

Profesyonel Kit

- 1x4 ml Gluma Bond Universal
- 1x4 ml Gluma Bond Ceramic Primer
- 1x2.5 ml Gluma Etch 35 jel
- 25 kırmızı aplikatör ucu (normal)
- 25 yeşil aplikatör ucu (ince)
- 10 kanül
- Gode
- Resimli Uygulama Kartı

€ 105

Gluma Bond Universal Refil

1 x 4 ml

€ 73

Gluma Ceramic Primer

1 x 4 ml

€ 50



GLUMA® SELF ETCH BİR ADIM ÖNDE

7. jenerasyon self etch sistemler güvenli, klinikte kanıtlanmış tedavi ve kolay kullanım sağlar. Gluma Self Etch nano, tek aşama adezivi; hassasiyet giderme etkisiyle beraber yüksek bond ve klinikçe güvenli restorasyonları kombine eder.

Endikasyonları

- Direk kompozit restorasyonların bağlanmasında
- İndirekt kompozit restorasyonların bağlanmasında
- Dişin aşırı hassas bölgelerinin tedavisinde

Avantajları

- Minimum hazırlık süresi
- Gluma Self Etch sistem hemen etki gösterir.
- Minimum hata
- Hassas bölgeleri tedavi ederken oluşabilecek hataları elemine eder.
- Minimum hassasiyet
- Gluma Self Etch kimyası sayesinde çok hassas vakalarda kullanılabilir.



Refil

- 1 x 4 ml şişe
- 50 aplikatör ucu

€ 52



ADEZİVLER / HASSASİYET GİDERİCİ

GLUMA® 2BOND / GLUMA® DESENSİTİZER

GLUMA® 2BOND

Yeni 5. jenerasyon bonding sistemleri modern nano dolduruculara dayalıdır. Gluma 2 Bond optimal kenar kapatma ile beraber dentin ve mineye mükemmel bağlantı sağlar. Ayrıca Gluma 2 Bond uzun süreden beri test edilmiş, başarılı gluteraldehit içeren Gluma hassasiyet giderici içerir. Gluma 2 Bond dişin aşırı hassas bölgeleri için uygundur.

Endikasyonları

- Direk kompozit restorasyonların bağlanmasında
- İndirekt kompozit restorasyonların bağlanmasında
- Dişin aşırı hassas bölgelerinin tedavisinde

Avantajları

- **Etkinlik:** özel förmülüne bağlı olarak, Gluma 2Bond; primer, bond ve hassasiyet giderme için sadece tek tabaka gerektirir.
- **Daha güvenli:** Gluma 2Bond nano dolduruculu yenilenmiş kimyasına bağlı olarak mükemmel bağlanma gücü ve ideal kenar kapatma sağlar.
- **Daha az tahriş:** İçerisindeki Gluma Desentizer preparasyondan ya da restorasyondan sonraki hassasiyeti azaltır.



Gluma 2Bond Asorti

1 x 4 ml şişe
50 aplikatör ucu
2 x 2.5 ml Gluma Etch 20 Gel
25 kanül

€ 63

Refil

1 x 4 ml şişe
50 aplikatör ucu

€ 52

GLUMA® DESENSİTİZER

MORE GAIN, LESS PAIN

Gluma desensitizer post-operatif hassasiyete karşı kanıtlanmış etkili hassasiyet gidericidir. Aşırı hassasiyet olan durumlarda 10 yıldan uzun süredir kullanılmaktadır. Dünyada 45 milyondan fazla aşırı restorasyonda hassasiyeti azaltmak amaçlı kullanılmıştır.

Endikasyonları

- Restorasyon gerektirmeyen dişin hassas bölgelerinde (servikal alanlarda)
- Diş preparasyonundan sonraki post-operatif hassasiyeti azaltma ve önlemede

Avantajları

- Uygulamadan hemen sonra ağrının azalması
- Doğru kullanımda yüksek etki
- Sadece flor uygulamasından daha etkili
- Bondinglerle beraber kullanılmasında bile iyi bir sonuç
- İntradentin etkisi, yüzey filmi oluşturmaz. Bu yüzden indirekt restorasyonlar için uygundur.
- En az 12 ay etkili olduğu klinik çalışmalarda kanıtlanmıştır.
- Işıklı polimerizasyon gerektirmez.



Gluma Desensitizer

5 ml şişe

€ 52



LOKAL ANESTEZİ

SOPIRA® CITOJECT® / KARPÜL İĞNELERİ

SOPIRA® CITOJECT®

Hassasiyet ve tasarım hiç bu kadar güzel olmamıştı.
Sopira Citoject intraligamentel anesteziyi daha da cazip yapmıştır.
Hastalar için daha konforlu, hekim için daha rahat çalışma ortamı

Endikasyonları

- Tek diş için lokal anestezi
- Ağrı lokalizasyonu
- Kalp rahatsızlığı olan hastalar için lokal anestezi
- Çocuklar için lokal anestezi

Avantajları

- Enjeksiyon ile tedavi arasında minimum bekleme süresi
- Daha az anestetik madde kullanımı - kalp ve dolaşıma karşı daha hassas
- Daha az uyuşma hissi
- Riskli hastalar için uygun
- Tüm ticari karpüller için uygundur



SOPIRA CITOJECT

€ 294

SOPIRA® KARPÜL İĞNELERİ

Birinci sınıf çelik ve yenilikçi bir kesime sahip olan iğneler doku dostudur. Bir çok çeşit dental anestezi için çözümdür ve tüm yaygın dental şiringalara uygundur.

Endikasyonları

- Tüm lokal anestezi çeşitleri için

Avantajları

- Üç yönlü kesime bağlı olarak daha az ağrı
- Dokuya ideal penetrasyon sağlayan silikon uç
- Yüksek elastikiyetine bağlı olarak güvenli kullanım



SOPIRA Karpül İğneleri

30 G - (12mm, 16m, 21mm, 25mm)

27 G - (25mm, 38mm)

€ 11





INTRAORAL X-RAY FİMLERİ / SOLÜSYONLAR

AGFA DENTUS® M2 COMFORT / X-RAY SOLÜSYONLARI

AGFA DENTUS® M2 COMFORT

Agfa Dentus M2 Confort çok düşük radyasyona ihtiyaç duyan yüksek görüntü kalitesiyle hassas intraoral filmidir. Agfa Dentus M2 Confort tüm geleneksel X-ray cihazlarıyla uyumludur. Tüm standart X-ray solüsyonları ile manuel ya da makine ile kimyasal olarak banyo edilebilir. M2 Confortu değiştiren ek olarak onay testi (X-RAY yönetmeliklerine uygun olarak) gerekmemektedir. Agfa Dentus E Speed filmleri sadece güvenli değil aynı zamanda ekstra yumuşak paketi sayesinde hastaya rahatsızlık vermez.

Endikasyonları

- Ünlversal intraoral film
- Manuel ve Otomatik banyo cihazları için uygundur.



Avantajları

- Yüksek kontrast ve maksimum yoğunluğa bağılı olarak kolay diyagnoz (iyi görünen yeşil derecelendirme)
- Kısa çalışma süresine bağılı olarak kamera sallanmasını engeller.
- Softopac ile beraber yumuşak film kenarları
- Ünlversal işleme endikasyonu
- Uzun saklama ömrü: 30 yıla kadar arşivleme
- Düşük buğulanma ve sis değeri

Comfort E Speed

150'lik € 31

AGFA DENTUS® X-RAY SOLÜSYONLARI

Agfa Dentus Fixer ve Developer kombinasyonları ekstraoral ve intraoral teknikler için kalitatif yüksek derece görüntü sağlar.



Endikasyonları

- Manuel işlem

Avantajları

- Developer ve Fixer için renkli ayırma
- Gluteraldehitsiz
- İdeal kullanım için kolay hazırlanan solüsyon
- Tamamıyla geri dönüştürülebilir polietilen konteynır
- 125 ml ve 1lt'lik paketleme

Agfa Dentus Developer

125 ml

€ 3

Agfa Dentus A Fixer

125 ml

€ 3



GEÇİCİ MATERYALLER

PREVISION® TEMP / PREVISION® CEM / DENTALON® PLUS

PREVISION® CEM

Endikasyonları

- Geçici krun ve köprülerin simantasyonu
- Daimi restorasyonların geçici simantasyonu

Avantajları

- Kompozit, seramik ve metalden yapılmış geçici krun ve köprülerin simantasyonu
- Daimi restorasyonların geçici simantasyonu
- Ojenöl içermez.



PreVISION CEM

37 gr tüp

€ 21

PREVISION® TEMP

GEÇİCİ RESTORASYONLARDA GÜVEN

PreVISION Temp kendiliğinden polimerize olan, 2 bileşenli geçici kron-köprü materyalidir. Mükemmel mekanik özellikleri rahat bir kullanım süreci için güvenli ve estetik olarak uygun sonuçlar sunar.



PreVISION Temp

1x50 ml Cartridge

12xMixing Tips

Resimli Uygulama Kartı

€ 89

DENTALON® PLUS

Dentalon Plus kendiliğinden sertleşen geçici krun köprü yapımında kullanılan uzun süreden beri tecrübe edilmiş akriliktir. Bireysel renk adaptasyonu için 3 ayrı renk seçeneği vardır.

Endikasyonları

- Geçici krun ve köprü yapımı

Avantajları

- Yüksek cilalanabilme
- Yüksek mekanik stabilite
- Bireysel renk adaptasyon olanağı
- Amin içermeyen kataliz sistemine bağlı



Likit

1 x 45 ml bottle

€ 16

Toz

1x100 gr her bir renk toz
L(açık) , M(orta) , D(koyu)

€ 26



DENTALON Plus SET

1* 45 ml likit

6* 20 g toz

€ 152



SİMANLAR

İCEM® / KARBOKSİLAT SİMAN / FOSFAT SİMAN

İCEM® SİMANTASYONUN EN KOLAY YOLU

I-CEM Kulzer'in en son yeniliklerinden biri olup güvenilir bağlanma gücü, hızlı, kolay ve uygun uygulama ile postoperatif hassasiyet riskinin azaltılmasını kombine eden, hepsi bir arada rezin yapıştırma simanıdır. Yani indirekt restorasyonların asit, primer, bond, hassasiyet giderme ve simantasyon işlemleri tek aşamada yapılır.

Birçok bilimsel çalışma I-CEM self adezivinin yeni formülünün klasik simanların avantajları ile (kolay kullanım ve dişteki neme karşı tolerans) rezin yapıştırma simanlarının yüksek mekanik ve estetik özelliklerini kombine ettiğini kanıtlamıştır.

Endikasyonları

- Metal, metal seramik ve tam seramik kuron-köprülerin simantasyonu
- Metal, seramik ve kompozit inleylerin simantasyonu
- Metal, seramik ve kompozit onleylerin simantasyonu
- Metal, titanyum ve cam fiber kanal postlarının simantasyonu
- Sallanan dişlerin splitlenmesi için naylon materyallerin yerinde tutulması

Avantajları

- Uzun ömürlü restorasyonlar için güvenilir bağlanma gücü
- Dünya çapında bir çok bilimsel çalışmada test edilmiş
- Postoperatif hassasiyeti azaltıcı
- Asit, primer, bond, hassasiyet giderme ve simantasyon sadece tek aşamada yapılır.



I-CEM Refil

7 gr (5 ml) şırınga
15 karıştırma ucu

€ 126

KARBOKSİLAT VE FOSFAT SİMANLAR

Karboksilat siman mükemmel klinik performans sağlar. Daimi restorasyonların simantasyonu için en uygun materyaldir. Kavite liner gibi kimyasal ve termal etkiye karşı koruma sağlar.

Fosfat Siman daimi restorasyonların simantasyonu için uygundur ve kavite liner gibi kimyasal ve termal etkiye karşı ekstra koruma sağlar.

Endikasyonları

- Kuron-köprü ve inleylerin simantasyonu
- Daimi restorasyonlar için kavite liner olarak

Avantajları

- Geniş uygulama seçeneği
- Kimyasal ve termal tahriş edicilere karşı güvenilir koruma

Karboksilat Siman Toz

90 gr

€ 32

Karboksilat Siman Likit

30 ml

€ 16

Fosfat Siman Toz

90 gr

€ 22

Fosfat Siman Likit

30 ml

€ 16





LABORATUVAR ÜRÜNLERİ / TİP 3 SERT ALÇI/TİP 4 EXTRA SERT ALÇI

MOLDANO® / MOLDASTONE® CN

MOLDANO®

Moldano üniversal olarak kullanılabilen, total parsiyel, ortodontik model yapımında kullanılan sert alçıdır. Kremsi yoğunluğu, hızlı sertleşmesi sayesinde kısa sürede çalışmaya imkan veren Moldano'dan yapılan modeller kusursuzdur.

Endikasyonları

- Total-parsiyel protezler ve ortodontik mastır modeller
- Tamir, antagonist ve diagnostik modeller

Avantajları

- Kremsi, katı yoğunluk
- Hızlı sertleşme
- Hacimce sabit
- Yüksek sertlik ve kenar sertliği sayesinde ölçü maddeleriyle mükemmel uyum
- Yumuşak model yüzeyi
- Aljinat ölçüleriyle olağanüstü uyum



Moldano Sarı

25 kg

€ 44

Moldano Mavi

4,5 kg

€ 13

Moldano Mavi

25 kg

€ 44

MOLDASTONE® CN

Ekstra sert tip 4 alçı Moldastone mükemmel karıştırılır ve işlenir. Akışkan özelliğine sahip olup uzun süre boyunca boyutsal değişime uğramaz. Moldastone CN'den yapılan modeller hava kabarcıksız ve kusursuz detaya sahiptirler.

Endikasyonları

- Parsiyel protez, kuron-köprü ve inley-onley teknikleri için master modeller
- Antagonist modeller

Avantajları

- Tiksotropik
- Çok iyi karıştırma özelliği
- Manuel olarak da karıştırılabilir
- Düşük genleşme (<0,1%)
- Mükemmel renk
- Ölçü içine kolayca akma
- Hava kabarcıksız, kusursuz detaylı modeller



Moldastone CN Açık Kahve

4,5 kg

€ 23



MELIODENT®

Heraeus Kulzer'in Meliodent ürün grubu protez yapımı için ekonomik ve komple bir sistem sunar. Yeni Meliodent'in optimize işlem metodu geliştirilerek protez materyali alanında 75 yıllık tecrübesini sizlere sunar. Meliodent Kadmiyum içermez ve biyoyumludur.

Meliodent Sıcak Akrilik

Çok çeşitli renk seçeneği hemen hemen tüm ihtiyaçları karşılar. İster şeffaf, pembe ya da egzotik renkler olsun ister bölgesel renkler olsun muhtemelen piyasadaki bu kadar çeşitliliğe sahip tek protez materyalidir. Damarlı ve damarsız seçenekleri mevcuttur.

Meliodent Soğuk Akrilik

Meliodent Soğuk Akrilik protez tamirinde kullanılan en üst kalite protezlere mükemmel olarak renk uyumu gösteren akriliktir.

Meliodent Sıcak Akril	Meliodent RR Soğuk Akril
1 kg toz (Damarlı)	1 kg toz
€ 37	€ 46
1 kg toz (Damarsız)	500 ml Likit
€ 37	€ 32
500 ml Likit	
€ 18	
Meliodent Sıcak Akril Takım	Meliodent Soğuk Akril Takım
1 kg toz + 500 ml likit	1 kg toz + 500 ml Likit
€ 49	€ 73



PALAVIT® G

Döküm Tekniği için Modelaj Akriliği

Palavit G kendiliğinden polimerize olan iki bileşenli, toz ve likitten oluşan sentetik model materyalidir.

Avantajları

- Fırça veya yıkama tekniği ile bireysel kullanım
- Sabit ve kusursuz uyum
- Atık bırakmayan yanma
- Mükemmel cilalanma
- Tabaka kalınlığı için optik kontrol (kırmızı iz)

Palavit G
80 ml likit
€ 29
100 gr toz
€ 34







LABORATUVAR ÜRÜNLERİ / DİŞLER

OPTOSTAR / OPTOGHNATH

OPTOSTAR

4 katmanlı yapısı sayesinde anteriorde estetik açıdan mükemmel bir görüntü sağlar. Özellikle mine katmanının dişin hem labial hem lingual yüzeyini çevirmesiyle şeffaf doğal bir görünüm sağlar. Mavimsi beyaz insizal kenarları sayesinde doğal dişlerden ayırt edilemez. A1-D4 arası renk seçeneği ve 23 Üst ve 12 alt anterior formu mevcuttur.

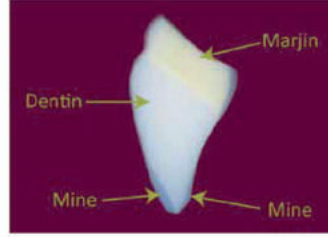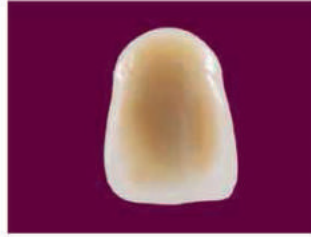

OPTOGNATH

Anatomik oklüzal yüzeye sahip posterior dişler. Mükemmel fizyolojik işlev, tam intercuspal bağlantı, kusursuz oklüzyon ve çiğneme yükünün dağılmasını sağlar. 28°lik cusp açısına sahiptir.



28li Takım Diş

Optostar 6 üst anterior, 6 alt anterior
Optognath 8 alt ve üst posterior

€ 19

Üst Anteriör	Alt Anteriör	Posteriör	Üst Anteriör	Alt Anteriör	Posteriör
○ L 390	U 25	28	○ P 458	U 38	32
○ L/A 419	U 25	30	▽ A 460	U 67	34
○ L 423	U 37	32	○ L/A 468	U 67	34
○ L 425	U 37	32	▽ ○ A/P 470	U 70	34
○ P 426	U 34	30	○ P 475	U 67	34
○ P 432	U 34	30	○ L 480	U 86	34
○ L 436	U 33	32	○ L/A 485	U 74	34
○ L 438	U 37	32	○ L/A 490	U 86	34
○ L 447	U 38	32	○ L 501	U 92	36
○ P 448	U 38	32	▽ A 503	U 92	36
○ L/A 451	U 34	32	○ L/A 520	U 92	36
○ L 452	U 38	34			



P



L



A



A



CE


Dişler standart metodların aksine enjeksiyon-sıkıştırma (IN-COMP) tekniği kullanılarak pürüzsüz ve hava kabarcıksız olarak üretilmektedir. Çok yüksek yoğunluğa sahiptir. EN ISO 22112:2006 direktiflerine uyumludur.

* Set Kombinasyonları dışındaki kombinasyonlar için özel sipariş verilmelidir.



GLUMA®

GLUMA® Bond Universal
Hepsi Tek Damlada.

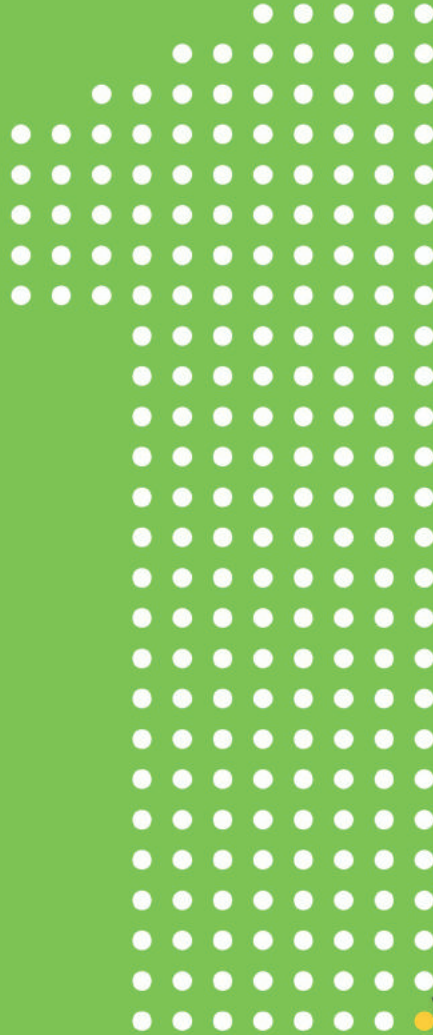

AquaCem

Restoratif > Siman



AquaCem® alüminosilikat cam ve poliakrilik asit karışımından oluşan açık sarı renkte translüsent cam-iyonomer yapıştırıcı materyaldir.

Toz, dentin ve mineye hermetik yapışan simantasyonlar üreten bir yapıştırma materyali oluşturmak için saf suyla karıştırılmıştır. Kuron, inley, onley, köprü ve ortodontik bantlar için endikedir.

* Siman Tipi : Cam İyonomer

* Karıştırma Süresi : 15 sn

* Çalışma Süresi : 2.5 dk

* Sertleşme Süresi : 3.5- 5 dk

* Karşım Oranı : 1 ölçek toz : 2 damla su

43 €

Poly-F Plus

Restoratif > Polikarboksilat Siman



Poly-F Plus aşağıdakilerin simantasyon işlemleri için uygun çinko polikarboksilat simanıdır:

* Kuronlar, köprüler, inley yüzeyleri ve ortodontik braketler

* Tüm restoratif materyaller altına veya kök kanal tedavisinden sonra kavite örtücü

* Geçici dolgular veya süt dişlerinin dolguları

Sunum Şekli

Poly-F® Plus, Standard Package

Powder, 50 g

1 Toz Ölçüsü

1 Su Dağıtım Şişesi

1 Karıştırma Pedi

34 €

Dycal®

Restoratif > Siman



Dycal® Radyopak Kalsiyum Hidroksit Bileşimi; pulpa kuafajında ve dental dolgu maddelerinin altında koruyucu kaide/ liner olarak kullanılan, katı, kendinden sertleşen bir materyaldir. Akrilik ve kompozit restorasyonların polimerizasyonunu engellemez.

Orjinal Dycal® formülünün temelini dayanan Dycal® Radyopak Kalsiyum Hidroksit Bileşimi, klinik olarak kanıtlanmış performansın yanı sıra geliştirilmiş estetik özellikler sunmaktadır. Kalsiyum hidroksit maddelerde standart sayılan orjinal Dycal® ürününe oranla Dycal® daha yüksek basınca dayanım ve daha düşük çözünürlük imkanı veren gelişmiş fiziksel özellikler sunar.

Dycal®'ın hızlı donma süresi ve mükemmel uygulama özellikleri, ürünü en çok satılan kalsiyum hidroksit bileşimi yapmıştır.

Sunum Şekli

623451Y Dycal® Tüp içinde, Export Paket Dentin Rengi
623401Y Dycal® Tüp içinde, Export Paket Fildişi Rengi
61105990 Dycal® Karıştırma Pedi -12 x Karıştırma Pedi
61105997D Dycal® Karıştırma/Yerleştirme için el aleti

14 €

Kalzinol

Çinko Oksit Ojenol Siman



DTR.01.61116100 > Toz (40 gr.)

DTR.01.61116001 > Likit (15 ml.)

Kalzinol, silikatların ve amalgamların altında kavite liner, geçici dolgu maddesi olarak kron ve köprülerin geçici simantasyonunda kullanılan çinko oksit ojenol simandır. Kalzinolün içeriğinde bulunan polimer, özellikle

geçici dolgu maddesi ve amalgam altına liner olarak kullanıldığında oldukça önemli etkisi olan ekstra güç sağlar.

- Kolay karıştırma ve şekillendirme
- Düşük çözünürlük
- İyi ısı yalıtımı
- Mükemmel örtücülük özellikleri

18 €

18 €

x-smartTM plus

everything you like about x-smartTM with a +



Sunum Şekli

ceram.x® SphereTEC™ one Şırınga Başlangıç Seti

607.01.620

- 5 adet şırınga (her biri 3 g) (A1, A2, A3, A3.5, A4)
- 1 şişe prime&bond® one SELECT 3.5 ml
- Aksesuarlar

SET
159 €



ceram.x® SphereTEC™ one Şırınga Refil

- 1 adet şırınga 3 g / Refil

A1	(= VITA®1 renkleri A1, B1, C1)	607.01.621
A2	(= VITA®1 renkleri A2, B2, D2)	607.01.622
A3	(= VITA®1 renkleri A3, C2, D3, D4)	607.01.623
A3.5	(= VITA®1 renkleri A3.5, B3, B4, C3)	607.01.625
A4	(= VITA®1 renkleri A4, C4)	607.01.624

Şırınga Refil
27 €



DENTSPLY CERAM.X SPHERETEC ONE Kompozit Intro Kit



YENİ ÜRÜN

52 €

Paketleme

- 24x 0,25 gr. kompül (Renkler: 4x A1, 4x A2, 8x A3, 4x A3.5, 4x A4)
- Kompül tabancası • Renk skalası

PRIME BOND Universal



Nano-teknolojisi ile yüksek güvenlik
Tek katman tekniği ile ekonomik kullanım ve minimum işlem süresi
Kompomer ve kompozitlerin restorasyonlarında
Adhesiv restorasyonlarının düzeltilmesinde
Koruyucu vernik olarak (servikal alanlarda kullanılır)
Kompozit restorasyonlarda, Dyract kompomerlerde,
Simantasyon prosedürlerinde

Ref: 60667350 4 mL

42 €

Ref: 60607351 2,5 ml

32 €

Restoratif > Kompozitler



- SDR® Başlangıç Seti (prime&bond® one SELECT ile birlikte)** 606.03.021
- 45 adet Compula® ucu (her biri 0.25 g, üniversal renk)
 - 1 adet SDR® ürün saklama kutusu
 - 1 adet prime&bond® one SELECT (2,5 ml)
 - 1 adet CliXdish™
 - 1 adet Compules® uç uygulama tabancası
- 223 €



- SDR Refil** 606.03.002
- 15 adet Compula® ucu (her biri 0.25 g, üniversal renk)

- SDR Ekonomik Refil** 606.03.003
- 50 adet Compula® ucu (her biri 0.25 g, üniversal renk)
- 193 €

- SDR Şırınga Refil** 606.03.005
- 3 adet şırınga (her biri 1 g, üniversal renk)
- 47 €

- SDR Şırınga Ekonomik Refil** 606.03.011
- 10 adet şırınga (her biri 1 g, üniversal renk)
- 158 €




Tabakalama tekniğine göre % 40'a kadar zamandan tasarruf

SDR®'nin akışkana benzer kıvamı, mükemmel kavite uyumu ile sonuçlanır



vs.

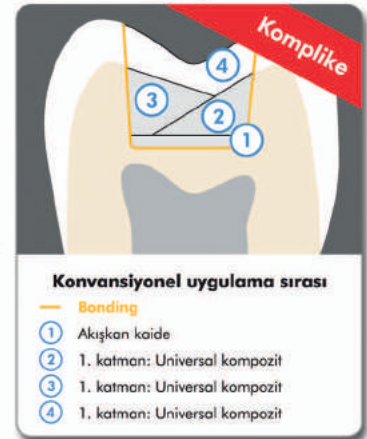

Zaman

SDR Nedir?

- Tek bileşenli, florür içeren, görülebilir ışıkla sertleşen, radyopak rezin kompozit restoratif materyali
- Sınıf I ve II restorasyonlarda kaide olarak endikedir
- Kendinden seviyelenebilirlik – hazırlanan kavite duvarlarına yakın adaptasyona izin verir
- 4 mm.'lik bulk-fill katmanlar halinde uygulanabilir
- Diğer posterior ve bulk-fill kompozitlere oranla %60'a varan daha az büzülme stresi
- Üniversal tek renk
- Üst kapama kompoziti olarak metakrilat esaslı bondinglerle ve kompozitleri ile uyumludur.
- Önceden dozajlı Compula® Uçlar, kolay uygulama ve sertleştirme tekniğine imkan sağlar.



Dyract XP Set

Restoratif > Kompomerler



Set
130 €

40*0,25 gr Kompül + 2.5 ml Prime Bond NT

Kompomerler içerisinde Dyract® XP posteriorların yanısıra tüm anterior kavite sınıfları için çürük önleyici bir restorasyon materyalidir.

eXtra bakım

Dyract® XP restorasyonları sürekli olarak florür iyonları açığa çıkarır ve diş restorasyon arayüzünde bir asit tampon gibi davranır. Laboratuvar testleri de lokal karyostatik etkiyi teyit etmiştir. Yüksek çürük risk grubu hastalar için Dyract® XP dolgular uygun profilaktik önlemlere mantıklı bir ilavedir. Dyract®XP'ye özgü özellikler, florür içeren reaktif doldurucu camların DENTSPLY tarafından patentli asit modifiye monomerler ile birleşimi sonucu ortaya çıkar.

Dyract XP Refill

Restoratif > Kompomerler



Refill
48 €

Blueprint

Restoratif > Aljinatlar

Blueprint® 20+; Blueprint® cremix'in devamı niteliğinde, DENTSPLY' in bir sonraki nesil Aljinat Ölçü maddesidir..

Blueprint 20+ tozsuz aljinat ölçü maddesidir. Toz yapısının karıştırma sırasında tozlanmanın saf dışı bırakılması amacıyla özellikle formüle edilmiş olması, karışımı kolaylaştırmış ve çok uzun bir boyutsal sabitlik sunmuştur.



500 gr
9 €

DENTSPLY
MALLEFER



+
WE
KNOW
ENDO.

X-smart[®]plus

everything you like about x-smart with a +



PALODENT V3 STARTER KIT

Restoratif > Bölgesel Matriks Sistemi



Ref: 62500005

259 €

İÇERİK : 20 Matris - 15X 5.5mm, 5X4.5mm, 15 Kama
- 5 adet her birinden: küçük, orta, büyük. 5 Kama Koruyucu-orta,
2 Universal halka, 1 Penset, 1 Pinli presel

Klinisyenlerin % 70'i, Sınıf II restorasyonların en zorlayıcı tarafının kontaktların yapımı olduğunu düşünüyorlar. Palodent® V3, klinisyenlere başarılı Sınıf II restorasyonların yapımında güçlü temel oluşturulması için kullanacakları araçları sağlamak üzere tasarlandı. Sistemin her bileşeni doğru kontakt yapımı ve tutarlı sonuçlar için, kullanım kolaylığı ve performans bağlamında iyileştirilmiştir

Palodent V3 bölümlü matriks sistemi, 6 adet özel üretilmiş bileşenden oluşmaktadır: halkalar, matrisler, kamalar, WedgeGuards® (kama koruyucuları), penset ve pin preseli. Bu bileşenlerin hepsi ayrı ayrı ve bir sistem olarak kullanım için en iyi performansı sağlamak için tasarlanmış ve rafine edilmiştir. Sonuç olarak Palodent V3, günümüz dental piyasasında uygulaması en kolay ve hassas matriks sistemleri arasında yer almaktadır.

PALODENT V3 INTRO KIT

Restoratif > Bölgesel Matriks Sistemi



365 €

Ref: 659700V

İÇERİK: 100 Matris - 25 adet her birinden: 3.5mm, 4.5mm, 5.5mm, 6.5mm, 75 Kama - 25 adet her birinden: küçük, orta, büyük 30 Kama Koruyucu - 10 adet her birinden: küçük, orta, büyük 1 Universal halka, 1 Dar halka, 1 Penset, 1 Pinli presel


Palodent V3 bölümlü matriks sistemi, 6 adet özel üretilmiş bileşenden oluşmaktadır: halkalar, matrisler, kamalar, WedgeGuards® (kama koruyucuları), penset ve pin preseli. Bu bileşenlerin hepsi ayrı ayrı ve bir sistem olarak kullanım için en iyi performansı sağlamak için tasarlanmış ve rafine edilmiştir. Sonuç olarak Palodent V3, günümüz dental piyasasında uygulaması en kolay ve hassas matriks sistemleri arasında yer almaktadır.

Tüberkül eksikse



Dr. Dao'dan alınmıştır

MOD

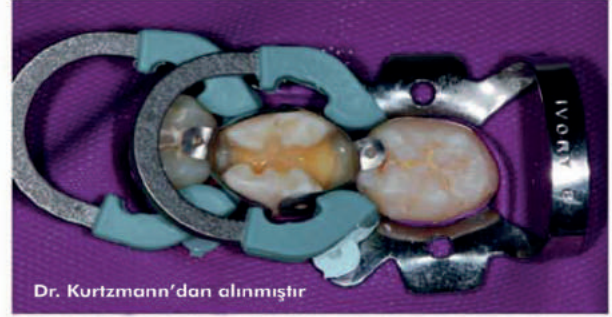

Dr. Kurtzmann'dan alınmıştır

Periodontal vaka için üst üste kamalar



Dr. Hugenberg'den alınmıştır

Sırt sırta restorasyon



Dr. Dias'dan alınmıştır

İnteraktif halkalar ve kamalar



Dr. De La Peña'dan alınmıştır

PALODENT V3

Matriks Refill 50'lik



Ref: 659710V

Palodent Plus Bölümlü Matriks Yaprak Refil

Güvenilir sıkı kontaklar

İdeal diş eti uyumu

Daha az artık materyal sonucu sorunsuz bitim

Kolay kullanımlı sistem

İdeal anatomi için belirgin marjinal kenar

Gingivoaksiyel köşede boşlukları engellemek için gingival tampon

Otoklavlanabilir halkalar

Kolay yerleştirme ve çıkarma için presel delikleri

Paketleme : 50 lik

Boy Seçenekleri : 3.5 mm, 4.5 mm, 5.5 mm, 6.5 mm , 7.5 mm

PALODENT V3

Kama Refill 50'lik

S, M, ve L Boylarında

Ref: 659800V



PALODENT V3

Ez Coat Matriks 50'lik



52 €



Ref: 659610V

Paketleme : 50 lik

Boy Seçenekleri : 3.5 mm, 4.5 mm, 5.5 mm, 6.5 mm , 7.5 mm

PALODENT V3

S, M, ve L Boylarında Kama Bant Refill 50'lik



Ref: 659840V



Sınıf II restorasyonlar - güvenli, sağlam, stressiz

- Güvenilir sıkı kontaklar
- İdeal dişeti uyumu
- Daha az artık materyal sonucu sorunsuz bitim
- Kullanımı kolay sistem



PALODENT V3

Halka 1'lik Paket Geniş veya Dar

78 €

Ref: 659900V

VISCO GEL

Geçici Yumuşak Besleme Malzemesi

Ref: 61605002

Özellikle uzun süre protez kullanan hastaların şikayet ettiği vuruklar ve bu yüzden oluşan lezyonların tedavisinde kullanılır. Problemlili doku yüzeyinin örtülmesinde fonksiyonel olarak kullanılır. Örttüğü doku yüzeyinde iyileşmeyi hızlandırır ve travmayı ortadan kaldırır. Hiç bir toksik etki ve iritasyona neden olmama (monomersiz) Tabana iyi yapışarak hijyene zarar veren yumuşak birikintileri önleme Genleşme, büzüşme veya sertleşme gibi değişimlere izin vermeme 1 paketi ile 40 kadar uygulama yapılabilme

Paketleme: 120 gr toz + 90 ml. likit + 15 ml. ayırıcı + karıştırma kabı + toz ölçęi + likit kabı




73 €

KAVİTEYE GİRİŞ

START-X™

Giriş kavitesi için ultrasonik uçlar

- Basit sistem: tek uç - tek klinik endikasyon
- Özel endikasyonlar için tasarlanmış ultrasonik uçlar
- Çalışma alanının eşsiz görünüşü sayesinde mükemmel çalışma hassasiyeti
- Mikro oluklu çalışma kısmı - Elmas gren kaybı riskini hasta ağızında en aza indirmiştir

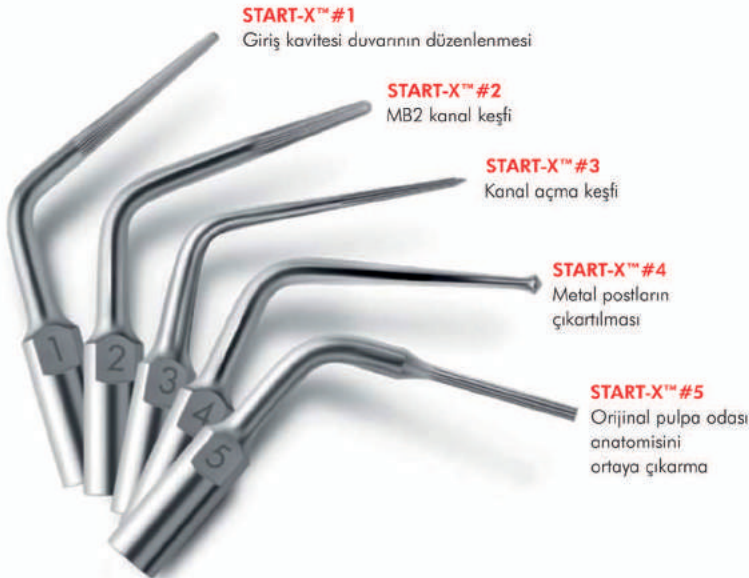


110 €

ENDOACTIVATOR

Endodonti Ekipman

Yıkamanızı aktive etmek için kullanımı kolay ve güvenli çözüm

- Artıkların temizlenmesi ve dezenfeksiyona yardımcı etkili aktivasyon
- Derinlik işaretli sağlam ve esnek aktivatör uçları (MG* polimer) sayesinde güvenli
- Hijyen açısından, tek kullanımlık ürünler (aktivatör uçlar, koruyucu kılıflar)

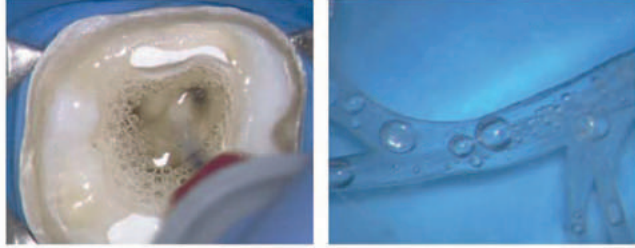

PROPEX PIXI

Endodonti Ekipman > Apeks Bulucu

Propex Pixi Özellikleri

- Cep boyutunda; saklama ve taşımada ve tedavi sırasında minimum yer kaplama.
- Doğru ve güvenilir . Renkli LED ekran . Sadece apikal üçte birlik bölüm için
- Kuru ve ıslak kanallarda çalışır
- Kullanıma hazırdır - Kalibrasyon ve SIFIR ayarı gerektirmez
- Kabloların daha az karışmasını ve Propex Pixi'yi görme hattına yerleştirerek eğenin ilerleyişinin daha iyi görsel kontrolünü sağlamak için çalışma sırasında hastanın göğsüne yerleştirilebilecek şekilde tasarlanmıştır.
- Kabloya bağlı klips ve kaymayan pedler cihazı yerinde tutar.
- 4 ses düzeyi ile ilerlemenin ses kontrolü ile takibi



Ref: A10300000100

580 €

X SMART PLUS

Hem Rotary Hem de Reciproc Eğeler İçin Endodontik Motor



x-smart[®]plus

everything you like about x-smart[®] with a plus



X-Smart™ Plus mikro-motor döner alet sistemleri ile endodontik tedavi uygulayan Genel Diş Hekimleri için tasarlanmış basit ve kullanımı kolay bir ünedir. Küçük başı ile birlikte hafif bir el parçasına sahiptir. Ünite küçük ve taşınabildir, ayak pedalı olmaksızın kullanılır ve pil ile çalıştırılabilir. WaveOne™ için resiprokasyona ve sürekli döner aletler için tork kontrolü ve otomatik geri dönme modlarına sahiptir.

X-Smart™ Plus ekstrası ile birlikte X-Smart™ cihazında beğendiğiniz her şeye sahiptir:

- Ayak Pedalı Yok
- Motor el parçası üzerinde Açma/Kapama düğmesi
- Mükemmel görüş ve erişim
- Minyatür başlık kafası sayesinde
- Basit ve geliştirilmiş kullanıcı ara yüzü
- Büyük, parlak renkli ekran
- Özel düğme kontrolleri
- "Tıkla ve git" navigasyon
- Optimize edilmiş ekran ve klavye ergonomisi ile birlikte yeni tasarım
- Tek eğe ile kök kanal şekillendirmesi
- Resiprokal hareket
- "Tek bakışta eğe seçimi"
- ISO renk kodlu eğe kitablığı

1450 €



**X SMART PLUS
PRTAPER NEXT KIT**

Ürün İçeriği

- 10 adet protaper next eğe
- 1 adet proglider eğe

1900 €



**X SMART PLUS
WAVEONE GOLD**

Ürün İçeriği

- 5 adet primary
- 4 adet assorti
- 1 adet proglider

1945 €

X SMART PLUS PRTAPER NEXT PROPEX PIXI KIT

Ürün İçeriği

- 10 adet Protaper Next Eğe
- 1 adet Proglider Eğe
- Propex Pixi Apeks Bulucu

2475 €

X SMART PLUS WAVEONE GOLD PROPEX PIXI KIT

Ürün İçeriği

- 5 adet primary
- 4 adet assorti
- 1 adet proglider

2500 €

C+FILE Kanal Eğesi

Steril Pakette



Sunum Şekli

A012X01800600

C+Eğesi KATETERİZASYON 18MM 06 A012X01800800

C+Eğesi KATETERİZASYON 18MM 08 A012X01801000

C+Eğesi KATETERİZASYON 18MM 10 A012X01801500

C+Eğesi KATETERİZASYON 18MM 15 A012X01890000

C+Eğesi KATETERİZASYON 18MM AS A012X02100600

C+Eğesi KATETERİZASYON 21MM 06 A012X02100800

C+Eğesi KATETERİZASYON 21MM 08 A012X02101000

C+Eğesi KATETERİZASYON 21MM 10 A012X02101500

C+Eğesi KATETERİZASYON 21MM 15 A012X02190000

C+Eğesi KATETERİZASYON 21MM AS A012X02500600

C+Eğesi KATETERİZASYON 25MM 06 A012X02500800

C+Eğesi KATETERİZASYON 25MM 08 A012X02501000

C+Eğesi KATETERİZASYON 25MM 10 A012X02501500

C+Eğesi KATETERİZASYON 25MM 15 A012X02502000

C+Eğesi KATETERİZASYON 25MM 20 A012X02590000

C+Eğesi KATETERİZASYON 25MM AS

Kök-kanal giriş yolu için keşif

- Kanal girişinin kolayca belirlenmesi; zor kanalların kateterizasyonu için piramit şeklinde uçlara sahip kesici kenarlar
- Daha iyi dokunuş hissi
- Apikal üçlüye daha kolay giriş
- Kalsifikasyonların daha iyi aşılması

6'lık Kutu
14 €

M-ACCESS

Ref: A12MA02100650

Çelik H-K Tipi Kanal Eğeleri 6'lık Kutu



4 €

NITIFLEX

NITI Kanal Eğesi 6'lık Kutu



Ref: A012D02590104

K-FILE 45/80

28 €

M.ACCESS® Hedstroem 21mm. Sold in packs of six

Product Code	Tip size ISO	Individual packs x6 of one type	Assorted 6 pack x1 of each type
A16MA02100812	008	x6	
A16MA02101012	010	x6	
A16MA02101512	015	x6	
A16MA02102012	020	x6	015x1, 020x1,
A16MA02102512	025	x6	025x1, 030x1,
A16MA02103012	030	x6	035x1, 040x1
A16MA02103512	035	x6	
A16MA02104012	040	x6	A16MA02190012
A16MA02104512	045	x6	
A16MA02105012	050	x6	045x1, 050x1,
A16MA02105512	055	x6	055x1, 060x1,
A16MA02106012	060	x6	070x1, 080x1
A16MA02107012	070	x6	
A16MA02108012	080	x6	A16MA02190112

Other ISO sizes and assortments available.

M.ACCESS® Hedstroem 25mm. Sold in packs of six

Product Code	Tip size ISO	Individual packs x6 of one type	Assorted 6 pack x1 of each type
A16MA02500812	008	x6	
A16MA02501012	010	x6	
A16MA02501512	015	x6	
A16MA02502012	020	x6	015x1, 020x1,
A16MA02502512	025	x6	025x1, 030x1,
A16MA02503012	030	x6	035x1, 040x1
A16MA02503512	035	x6	
A16MA02504012	040	x6	A16MA02590012
A16MA02504512	045	x6	
A16MA02505012	050	x6	045x1, 050x1,
A16MA02505512	055	x6	055x1, 060x1,
A16MA02506012	060	x6	070x1, 080x1
A16MA02507012	070	x6	
A16MA02508012	080	x6	A16MA02590112

Other ISO sizes and assortments available.


M.ACCESS® Hedstroem 31mm. Sold in packs of six

Product Code	Tip size ISO	Individual packs x6 of one type	Assorted 6 pack x1 of each type
A16MA03100812	008	x6	
A16MA03101012	010	x6	
A16MA03101512	015	x6	
A16MA03102012	020	x6	015x1, 020x1,
A16MA03102512	025	x6	025x1, 030x1,
A16MA03103012	030	x6	035x1, 040x1
A16MA03103512	035	x6	
A16MA03104012	040	x6	A16MA03190012
A16MA03104512	045	x6	
A16MA03105012	050	x6	045x1, 050x1,
A16MA03105512	055	x6	055x1, 060x1,
A16MA03106012	060	x6	070x1, 080x1
A16MA03107012	070	x6	
A16MA03108012	080	x6	A16M031190112

Other ISO sizes and assortments available.

PATHFILE

Kök Kanalı Şekillendirme Eđesi 6'lık Kutu

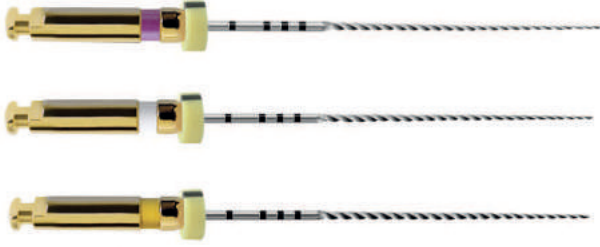

Ref: A001522590000

A001522501300 PathFile™ 25mm 013
A001522501600 PathFile™ 25mm 016
A001522501900 PathFile™ 25mm 019
A001522590000 PathFile™ 25mm Asorti.

A001523101300 PathFile™ 31mm 013
A001523101600 PathFile™ 31mm 016
A001523101900 PathFile™ 31mm 019
A001523190000 PathFile™ 31mm Asorti.

PathFile™ sistemi, 21, 25 ve 31 mm'lik uzunluklarda mevcut olan 3 NiTi döner aletten oluşur (Res. 1). Tüm aletlerin koniklik açısı 0.02'dir ve uç çapları: PathFile™ 1 (mor) ucu ISO 13, PathFile™ 2 (beyaz) ucu ISO 16, PathFile™ 3 (sarı) ucu ISO 19'dur. (not: ISO 3630-1 (aktif kısım) ve ISO 1797-1 (sap).

Bu yeni mükemmel aletlerin en önemli özellikleri şunlardır:

Dayanıklılık
Esneklik
Güvenlik

48 €

Sipariş Bilgisi

A001522101300 PathFile™ 21mm 013
A001522101600 PathFile™ 21mm 016
A001522101900 PathFile™ 21mm 019
A001522190000 PathFile™ 21mm Asorti.



PROGLIDER

Kök Kanalı Şekillendirme Eđesi 3'lü Blister

Berutti ve diđerleri 2013



Konvansiyonel paslanmaz çelik eđe - yüksek sapma sıklığı (zipler, çıkıntılar ve transportasyon)



PROGLIDER™ - gözle görülür derecede daha az sapma

Sunum Şekli

A092322100103 PROGLIDER File Sterile 21mm 016 .02 21mm blister of 3 files

A092322500103 PROGLIDER File Sterile 25mm 016 .02 25mm blister of 3 files

A092323100103 PROGLIDER File Sterile 31mm 016 .02 31mm blister of 3 files

46 €

PROTAPER UNIVERSAL

Rotary Kanal Eđesi

A0409 Protaper®



Döner Alet Asorti (SX, S1, S2, F1, F2 ve F3)
21mm, 25mm ve 31mm halinde mevcut

Rotary Kanal Eđesi 6'lık Kutu (SX,S1,S2,F1,
F2,F3,F4,F5

Boylarında Sorti , SX-F3 Arası Asorti ve
Retreatment Eđe Olarak Asorti Olarak)

Ref: A041002110100

50 €

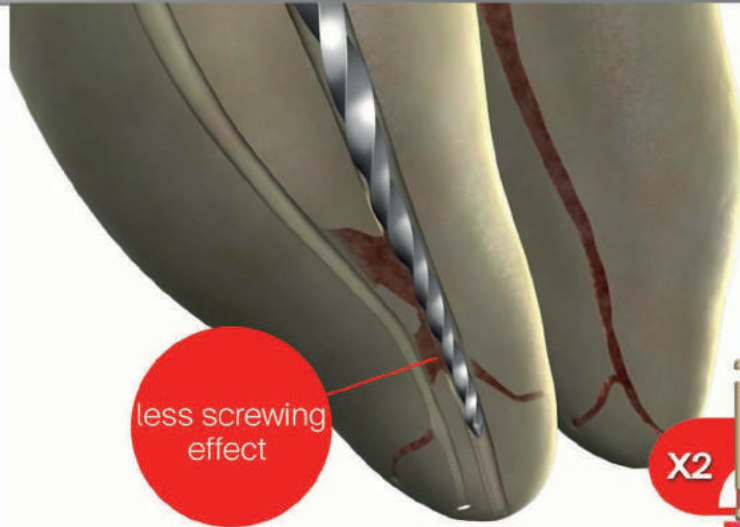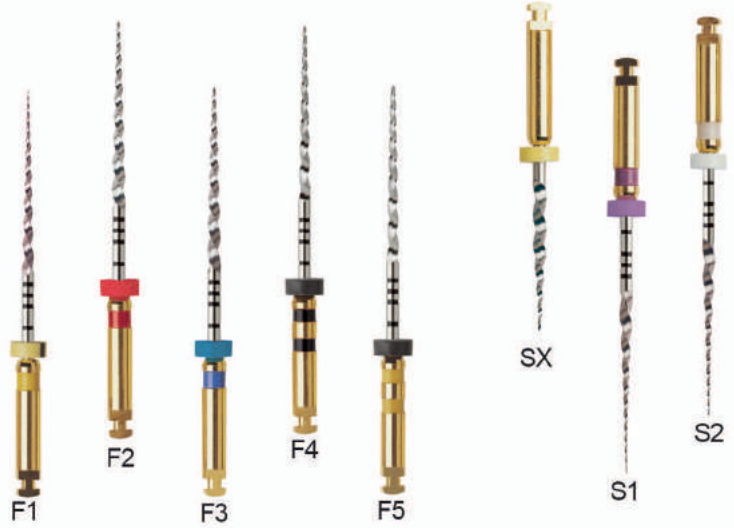

less screwing
effect

X2

PROTAPER NEXT®

PROTAPER NEXT

Rotary Kanal Eđesi 3'lü Blistir



PROTAPER
NEXT ROTARY FILES

	Active part lengths							Tip Ø
	16mm	13mm	9mm	6mm	3mm	1mm		
X1	6% 1.16	6% 0.98	7.5% 0.70	6.5% 0.49	5% 0.31	4% 0.21		0.17
X2	4% 1.20	6% 1.11	7% 0.84	7% 0.63	6% 0.43	6% 0.31		0.25
X3	5% 1.20	5% 1.09	6% 0.89	6% 0.71	7.5% 0.53	7.5% 0.38		0.30
X4	4.5% 1.20	5% 1.13	5% 0.93	6% 0.78	6.5% 0.60	6.5% 0.47		0.40
X5	4% 1.20	4% 1.14	4% 0.98	5% 0.84	6% 0.68	6% 0.58		0.50

Endodonti Altın Standartının YENİ Nesli

PROTAPER NEXT™ uzun yıllardır endodontide altın standardı oluşturan
PROTAPER® UNIVERSAL sisteminin en son yeniliğidir.

Kök kanalı tedavilerinin büyük çoğunluğunda kullanılacak çok yönlü,
esnek bir sistem arayan endodontistler için etkin bir çözümdür.

46 €

Ref: DP589647

WAVE ONE GOLD

Geçici Yumuşak Besleme Malzemesi



Sunum Şekli;
3'lü Kanal Eğesi
(Small Primary ve Large Boylarında Sorti)

52 €

small respirikal eğe
small (020 07) - 21mm - A 0753 221 G0S 03
small (020 07) - 25mm - A 0753 225 G0S 03
small (020 07) - 31mm - A 0753 231 G0S 03
small (020 07) - 21mm - A 0756 221 G0S 03
small (020 07) - 25mm - A 0756 225 G0S 03
small (020 07) - 31mm - A 0756 231 G0S 03

primary respirikal eğe
small (025 07) - 21mm - A 0753 221 G0P 03
small (025 07) - 25mm - A 0753 225 G0P 03
small (025 07) - 31mm - A 0753 231 G0P 03
small (025 07) - 21mm - A 0756 221 G0P 03
small (025 07) - 25mm - A 0756 225 G0P 03
small (025 07) - 31mm - A 0756 231 G0P 03

Sunum Şekli;
4'lü Karışık Asorti

67 €

asorti respirikal eğe
small/primary/medium/large - 21mm
A 0754 221 G3A 03
small/primary/medium/large - 25mm
A 0754 225 G3A 03
small/primary/medium/large - 31mm
A 0754 231 G3A 03

WAVE ONE GOLD

Gutta Percha



60 x değişken taperli
güta perka içeren kutu

small - A 175X 000 00S 00
primary - A 175X 000 00P 00
medium - A 175X 000 00M 00
large - A 175X 000 00L 00

18 €

WAVE ONE GOLD

Paper Points



180 x steril paper point içeren kutu

small - A 175W 000 00S 03
primary - A 175W 000 00P 03
medium - A 175W 000 00M 03
large - A 175W 000 00L 03

33 €

Kök kanallarının büyük çoğunluğu tek bir wave-one® Primary eğe kullanılarak şekillendirilebilir


pro-glider®

Kanal yolu
(Glide Path)
preparasyonu

SMALL #020 .07




PRIMARY #025 .07

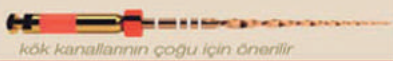

MEDIUM #035 .06



LARGE #045 .05

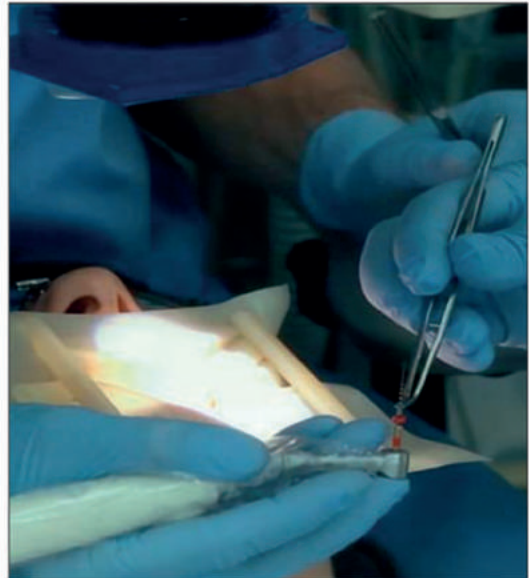

PROTAPER UNIVERSAL GUTTA PERCHA

Endodonti > Kök Kanalı Dolgusu



Sunum Şekli
60'luk Kutu
(F1,F2,F3 Boylarında Sorti ,
F1-F3 Arası Asorti ve
F4-F5 Arası Asorti Olarak)

12 €

PROTAPER UNIVERSAL PAPER POINTS

Endodonti > Kök Kanalı Dolgusu



Sunum Şekli
200'lü Kutu
(F1,F2,F3 Boylarında Sorti ,
F1-F3 Arası Asorti ve
F4-F5 Arası Asorti Olarak)

18 €

PROTAPER NEXT Paper Points

Paper Points



26 €



Paketleme: 180 lık

Seçenekler:
(X2, X3, Boylarında Sorti
X2-X3, X4-X5 Asorti Olarak)

PROTAPER NEXT Gutta Percha

Gutta Percha



19 €

Paketleme: 60 lık



Seçenekler:
X2 60 lık Paket
X3 60 lık Paket
X2 - X3 Asorti Karma Paket 60 lık
X4 - X5 Asorti Karma Paket 60 lık

GLYDE

Kanal Temizleme Jeli



38 €

Paketleme Detayları (File Prep)

- 3x 3gr. jel
 - Kayganlaştırıcı olarak davranarak aletlerin kırılma riskini azaltır.
 - EDTA ve demineralizasyonuna bağlı olarak kanal duvarları smear tabakasından temizlenir
 - İçerdiği karbamid peroksit sayesinde smear tabakasını kimyasal olarak temizler ve uzaklaştırır
 - Tamamıyla suda çözünen formülü sayesinde çalkalama ile tamamen temizlenme
- Kanal içindeki artıkların kural bölgeye çıkışını sağlayarak kök kanalının temizlenmesini ve şekillendirilmesini kolaylaştıran jel.

PROTAPER•NEXT™



AH 26

Endodonti > Kök Kanalı Dolgusu



AH 26® toz ve reçinesi mükemmel örtme kapasitesine sahip bir kök kanal dolgu maddesi oluşturmak için karıştırılır. Kök kanalı duvarına sıkı adaptasyonu ve sertleşme sırasında az büzülme göstermesinin sonucu olarak, AH 26® kök kanal dolumunun mükemmel doku uyumluluğu ile sağlanıp sıkıca örtmesine imkan verir.

Sunum Şekli

60621102 AH 26® 8 gr toz, 10 gr rezin
60621103 AH 26® 8 gr gümüş içermeyen toz, 10 gr rezin
60620002 AH 26® Resin Yedek 10 gr

AH Plus

Endodonti > Kök Kanalı Dolgusu



AH Plus® Kök Kanalı Dolgu materyali, aşağıdaki özellikleri sunan, pat/pat halinde iki bileşenli epoksi-amin rezin bazlı kök kanalı dolgusudur.
Uzun dönem sızdırmazlık özellikleri
Üstün boyutsal stabilite
Self-adeziv özellikler
Sıcak veya soğuk teknik ile kullanım içindir.

Sunum Şekli

60620112 AH Plus® Standart Paket – AB üyesi olmayan
1 Tüp A Pati, 4 ml
1 Tüp B Pati, 4ml içeri

AH Plus Jet SET

Endodonti > Kök Kanalı Dolgusu

93 €

*Karıştırma gerektirmeyen, kullanıma hazır, direkt ağız içi uygulamaya yönelik şırıngası ile daha kusursuz, homojen, rahat, kolay ve hızlı işlem sunan kanal dolgu materyalidir.

*Özel kıvrılabilen şırınga uçları sayesinde, kanala rahat ulaşım sağlar.

*Düşük büzülme ve çözünmesi ile mükemmel akıcılığa sahiptir.

*Optimal çalışma süresine sahip olup kanaldan rahatlıkla uzaklaştırılabilir.

*Biyo-uyumlu ve optimum radyopak düzeyindedir.

*Sertleşme esnasında büzülme göstermez.

*Dentine güvenli bir şekilde bağlanır.



1 AH Plus Jet karıştırma şırıngası 15 gr,
20 x karıştırma ucu,
20 x ağız içi ince uç,

1 x karıştırma kağıdı,
1 x resimli rehber,
1 x kullanım kılavuzu,
1 x tepsi

AH Plus Jet

Endodonti > Kök Kanalı Dolgusu

FIRSAT
ÜRÜN



İçeriği: 2 adet 15 gr AH Plus®

110 €

SORUNSUZ BAĞLANTI

× **smart iq**™ DENTSPLY MAILLEFER tarafından geliştirilen ve Apple iOS® uygulaması ile kontrol edilen **rotasyonel** ve **resiprokal** hareketli kablosuz bir motordur.

- Şekillendirirken size **daha fazla özgürlük** sağlamak amacıyla;
- Endodontik tedavide **sizi desteklemek** amacıyla;
- Geleceğe **kliniğinizi hazırlamak** amacıyla;

Tasarlanmış **komple çözüm**



Ürün İçeriği
- 5 adet primary
- 4 adet assorti
- 1 adet proglider

X-SMART IQ
ONE GOLD KIT

2666 €



X-SMART IQ
PROTAPER NEXT KIT

Ürün İçeriği
- 10 adet protaper next eğe
- 1 adet proglider

2650 €



DENTSPLY
MAILLEFER

propex•pixi™
apex locator

2150 €

DENTSPLY
MAILLEFER

small size. big benefits.

+
WE
KNOW
ENDO.

You're the Artist

Not Only Dentist



Temp-it

Geçici Dolgu Maddesi

İşıkla sertleşen geçici dolgu maddesi. Kolayca uygulanabilir, el aletlerine yapışmaz ve tek parça halinde preparasyon sınırlarını bozmadan çıkarılabilir. Geçici inley ve onleyler için uygundur. Abutment tıkamada kullanılabilir. Sond ile tek seferde abutmentta zarar vermeden ve parça bırakmadan tek parça halinde sökülebilir. Marjinal uyumu iyidir.



Sunum Şekli;
(Sarı veya Mavi Renk Seçeneği)

12 \$

1 x 3 gr

33 \$

3 x 3 gr

EsTemp implant

Öjenolsuz Rezin Esaslı İmplant Yapıştırma Simanı

Sunum Şekli;
Ambalaj İçeriği:
EsTemp İmplant 8 Gr
Ekonomik karışım sağlayan uçlar



54 \$

Şırınga tip kartuştaadır. Kolayca karışır ve homojen bir ürün ortaya çıkar Yüksek Yapışma Mukavemeti gösterir. Çalışma Süresi: 1dk 30sn. Sertleşme Süresi 5dk. İhtiyaç halinde alt yapıya zarar vermeden sökülebilir.

EsCom100

Kompozit

10 \$

1x4gr kompozit



Nanohibrid universal kompozit. Anterior ve posterior bölgelere uygulanabilir. Bukelemun özelliği sayesinde diş rengine uyum sağlar. FDA Amerika sağlık örgütü onaylıdır. Dolayısıyla son derece güvenilir bir üründür. A1 A2 A3 A3,5 B1, B2 Renk seçenekleri

EsFlow

Kompozit

18 \$



Akışkan kompozittir. İşıkla Sertleşen değişik boyutlarda nano dolduruculu üreten metakrilat monomer molekülleri içeren radyopak akışkan kompozittir. Anterior-posterior restorasyonlar ve önleyici tedaviler için uygundur.

2 Adet 2 gr'lık Şırınga
A1-A2 ve A3 renk seçeneği mevcuttur

Base - it

İşıkli Kalsiyum Hidroksit Kaide Maddesi



Metakrilat oligomerinde kalsiyum hidroksiapatit içerir. Hamurun tahrişini azaltmak ve düşük polimerizasyon büzüşmesine neden olur.

Baz ikincil dentin oluşumunu kalsiyum iyonu, hidrosik iyonu ve fosfat iyonu serbest bırakarak uyarır. Taban dişlere kariostatik özelliklere ve mükemmel yapışma mukavemetine sahiptir.

Kalsiyum hidroksiapatiti içeren hafif kür bazası ve astar.

Düşük polimerleşme çekmesi

Cam iyonomer ile üstün güç mukavemeti

21 \$

2*2gr şırınga

36 \$

4*2gr şırınga

Seal - it

Fissür Sealent Fissür Örtücü

29 \$

2* (1.2 g) Şırınga



Optimal akışkanlığı
Düşük çekme, polimer
Mükemmel marjinal bütünlük
Sürekli florür salınımı
Renk: Beyaz
yapışma yüksek derecede emaye (MPa üzerinde 15)

FineEtch

%37'lik Fosforik Asit



İdeal uygulamalar için yan jel sağlar. FineEtch etkili bir şekilde diş ve restoratif materyal arasındaki bağı güçlendiren leke tabaklarını temizler. Bio-uyumlu polimerik malzemeler içerir. Mükemmel viskozite nedeniyle nerede olursa olsun yerleştirilebilir.

15 \$

3 * 5 ml şırınga

Desen

Hassasiyet Giderici

28 \$



Dentin tübüllerini sızdırmaz hale getirir ve lokalize aşırı duyarlılığın başlıca nedeni olarak kabul edilen sıvı değişimini önler. Mükemmel hidrofilik ve biyouyumlu

SoftPrep

%17 EDTA



30 \$

6g * 2 şırınga

% 17 EDTA, suda çözünür, % 100 Yağlar ve tıkanık kanalları kolaylaştırır tamamen çözünebilir köpürmeğe kanala temizlenmesini kolaylaştırır. Kök kanalını şekillendirme ve temizlemesinde etkin çözümdür.

NOP

Karpül İğneleri

7 \$

1 kutu: 100 iğne



Ultra-Sharp, üç eğimli lanset dokuya pürüzsüz bir şekilde girerek hasta konforunu artırırken, silikon kaplama ağız ve doku hasarını önemli ölçüde azaltır. İğne yönlendirmesi için üçgen eğim göstergesi.

GUTTA PERCHA POINTS

3,5 \$

İçerik;
1 kutu
(120 adet)



Spident Gutta Percha noktaları, en hassas standartlara göre elle haddelenmiştir.

PAPER POINTS

3 \$

1 kutu
(200 adet)



Gama x-ışını ile sterilize edildi. ISO 7551'e göre tam standardizasyon, renk kodlu uçlar. Kanala kolayca girmek için sağlamlık ile esneklik. Son derece emici. Kanalı kolayca doldurmak için sert fakat esnek. Düzgün ele haddelenmiş ve bükülmeyen kıvrımlı. 28 mm uzunluğundadır.

FineDam

Dişeti Bariyeri

36 \$

4 adet
1,2 ml şırınga



* FineDam , beyazlatma vb işlemlerde izolasyon sağlama amaçlı, ışıkla sertleşen rezin esaslı bariyerdir.
* Tek diş beyazlatmalarında da, komşu dişi koruma amaçlı kullanılabilir.
* Beyazlatmada diş etinin zarar görmesini engeller.

Block-Out Resin

İşıkla Sertleşen Block-Out Rezini

33 \$

4 adet
1,2 ml şırınga



Beyazlatma kaşıklarında bloko hazırlamak için kullanılır. Block-Out Reçine, viskoz, ışıkla sertleştirilmiş, metakrilat esaslı, şırınga ile verilen mavi pigmentli yardımcı reçinedir. Sıva modellerinde rezervuarların ağırtılması, aralık bırakılması veya kesilmesi gereken laboratuvar işlemleri için laboratuvar kullanımı için ve laboratuvar modellerinde küçük kırıkların veya boşlukların onarımı için tasarlanmıştır.

viOpex

Kalsiyum Hidroksit Pasta İyodofomlu



İçerik
2,2 gr Viopex Kalsiyum Hidroksit Pasta İyodofomlu
20 adet uygulama ucu

19 \$

viOpaste

Kalsiyum Hidroksit Pasta Baryum Sülfatlı



İçerik
2,2 gr Viopaste Kalsiyum Hidroksit Pasta Baryum Sülfatlı
20 Adet Uygulama ucu

19 \$

viOseal

Kanal Dolgu Meteryali



İçerik; 1 şırınga 10c
Kök kanal dolgu kök kanalının duvarları arasında yapışma özelliklerini kullanarak, ve kanal tedavisi için dolgu maddeleri

22 \$

Vacu-Mixer™

by Dr. Philip Ho

Kablosuz Ölçü Karıştırma Cihazı

Vacu-Mixer, izlenim malzemelerinin hazırlanması için otomatik karıştırma birimi. Kullanımı kolaydır: Sadece düğmeye basmanız yeterlidir

Özellikler

Daha kolay, daha kullanışlı.

Tabla ünitesi olarak standa da yerleştirilebilen taşınabilir cihaz.

Boşluklar olmadan kusursuz otomasyon.

Tek dokunuşla çalıştırma.

1: 1 oranlı karıştırma hataları ortadan kaldırır



\$ 525

I-SiL™ Premium Jumbo

Spident Vacu-Mixer ile

Otomatikleştirilmiş ölçü karıştırma makineleri için geçerli olan I-SiL Premium ile aynı etkileyici malzeme. Boşlukları ve kabarcıkları en aza indirmek üzere, karışımın başlangıcından itibaren yüzeyde geliştirilmiş hidrofilik özelliğe sahiptir.



2 x 120ml Cartridge Refills

Specify :

#7161HB Heavy body (blue)

#7161RG Regular body (light purple)

Tekli \$ 19,50

10'lu \$ 178

Mixing Tips

7191VM Vacu-mixer mixing tip, pkg of 50



Vinyl Polysiloxane

I-SiL™ Premium Regular Set

BEST
PRODUCT

I-SiL Premium Denture, kısmi veya tam protezler için ideal bir VP izlenim materyalidir.

Uzatılmış çalışma süresi ayarlama için yeterli zaman sağlar. Düşük başlangıç viskozitesi yumuşak dokuya olan rahatsızlığı en aza indirir, ancak son izlenim kaldırıldıktan sonra sertleşir.

- Kuron ve köprü ölçüleri
- İnce onley ve implant ölçüleri
- Fonksiyonel ölçüler
- Basınç noktası tespiti
- Damak ölçüleri
- Çalışma modeli ölçüleri

\$ 19,50



1' 30" çalışma zamanı
4' 00" ayar zamanı

2 x 50ml Cartridge Refills

Specify :

- #7111RG Light body (pink)
- #7112RG Regular Body (light purple)
- #7113RG Heavy body (blue)

Mixing Tips

- # 7181YL Small mixing tips, pkg of 50
Mixing tips have yellow hub
- # 7181GR Large mixing tips, pkg of 50
Mixing tips have green (blue) hub
- # 7181IN Intraoral tips, pkg of 50
Yellow tips fits into small (4.2mm) mixing tips

I-SiL™ Premium Fast Set

I-SiL premium, A tipi vinly poly siloxane ikinci öcü metaryelidir.



0' 40" çalışma zamanı
2' 00" ayar zamanı

2 x 50ml Cartridge Refills

Specify :

- #7211FS Light body (yellow)
- #7213FS Heavy body (purple)

\$ 19,50

Mixing Tips

- # 7181YL Small mixing tips, pkg of 50
Mixing tips have yellow hub
- # 7181GR Large mixing tips, pkg of 50
Mixing tips have green (blue) hub
- # 7181IN Intraoral tips, pkg of 50
Yellow tips fits into small (4.2mm) mixing tips

Dispensing Gun

- # 493100 Dispensing Gun DS 50
Ratios : 1 : 1 / 2 : 1
Mixing tips have green (blue) hub

I-Sil™ Premium Putty

BEST
PRODUCT

İdeal akışkanlık.
Önde gelen malzemelerin en yüksek gözyaşı mukavemeti test edilmiştir.
Süper ıslanabilirlik.
Boşlukları minimize ettim.
Mükemmel istikrar
Baloncuklar [vakum karışım sistemi] yok.

Regular set

\$ 39,50



Fast set

\$ 39,50



I-Sil™ Premium Bite-Registration

Spident'in kapanış malzemesi
Polyvinylsiloxane kapanış malzemeleri
Mükemmel sertlik (Shore a85)
Hızlı ayarlama süresi (çalışma süresi 30 saniye/ ayarlama süresi 1 dakika)
İdeal akışkanlık



0' 20" working time
0' 60" setting time

2 x 50ml Cartridge Refills

#7241BR Bite-Registration

Mixing Tips

#7181GR Large mixing tips, pkg of 48

Mixing tips have green (blue) hub

\$ 38

Apex Locator

Viometer™

Kök kanal tedavisi sırasında lokalizasyonu ve çalışma uzunluğunun belirlenmesi için kullanılan elektronik cihaz.


Kök kanal tedavisi gören ve kanaldaki diş dosyasının kök apex'e göre konumunu kesin olarak belirlemeyi gerektirir ve işinizi kolaylaştırır

- Kompakt boyut
- Şarj edilebilir
- Renkli OLED ekran
- Akıllı aygıt ile çalışır (isteğe bağlı)



#518100 Viometer

Contains : Wireless Apex locator,
File hook, 3 Lip hook, Probe cord

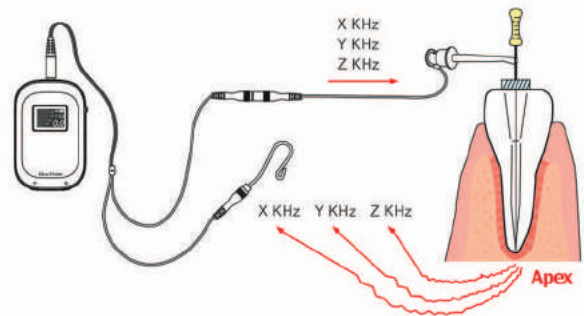

Apex Locator; kablolu ve kablosuz seçenekleri mevcuttur.

\$ 415

bluetoothlu

\$ 485

AMALGAMLAR

Ana 2000 Dental Alloy Powder 30g



Non Gamma 2 ekstra bakır içeren amalgam.
Bileşimi: %43 Gümüş, %29,6 Kalay, %25,4 Bakır.

Ref. 11700000 29 €

Ana 70 Dental Alloy Caps



Ana 70 Kapsül Amalgam 50lik no:1 %69,3 Gümüş

Ref. 1113000 1,5 Pack -- 56 €

Ref. 1113100 2,5 Pack -- 75 €

Ref. 1113200 3,5 Pack -- 94 €

Ana 70 Dental Alloy Powder 30g



Non Gamma 2 yüksek gümüş içeren amalgam.
Bileşimi: %69.3 Gümüş, %19.4 Kalay, %10.9 Bakır.

Ref. 11110000 47 €

Ana 2000 Dental Alloy Caps



Ref. 1173000 1,5 Pack -- 45 €

Ref. 1173200 2,5 Pack -- 57 €

Ref. 1173100 3,5 Pack -- 72 €

Ana 2000 kapsül amalgam ile en doğru kıvamı elde etmek mümkündür (önceden dozajlandıği için).

Kendiliğinden aktive olur.

Mükemmel hijyen ve zamandan tasarruf sağlar.



Ana 2000 Dental Alloy Duett

Tablet ve poşet içinde civanın bir kapsül içinde karıştırılması ile amalgam oluşturulur.

Kullanımı çok kolaydır.

Güvenlidir, atık oluşturmaz ve her zaman aynı kıvamda malzeme elde edilir.

Ekonomiktir.


Aynı kapsül, karıştırma amacı ile tekrar kullanılabilir.

Ref. 1178101 50 -- 48 €

Ref. 1176101 200 -- 182 €

A&M

A&M INSTRUMENTS, INC.

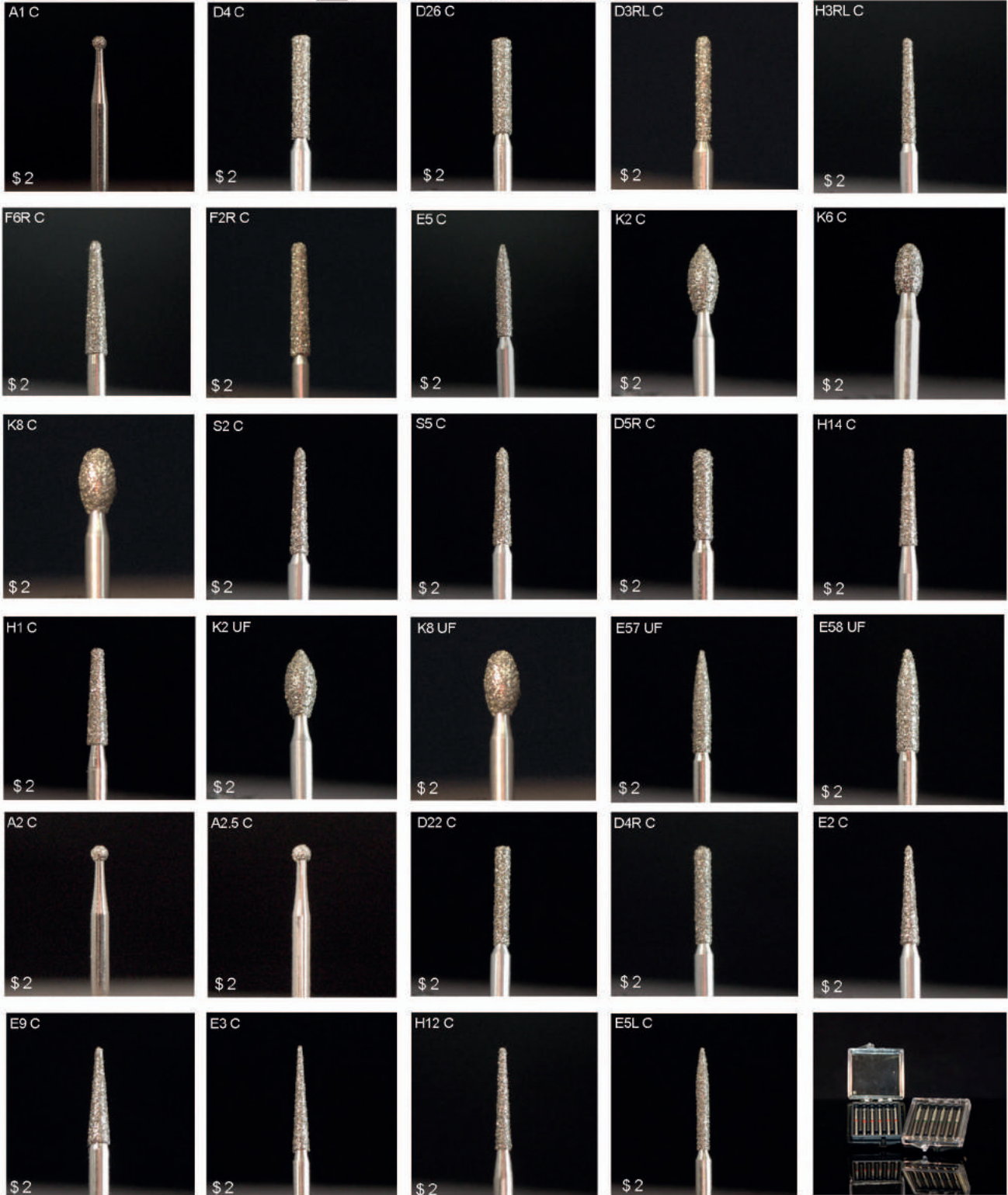


6"l Paket
\$ 13

Tek'li
\$ 2,5

A1 C /// Ball Diamond Bur
A2 C /// Ball Diamond Bur
A2.5 C /// Ball Diamond Bur
A3 C /// Ball Diamond Bur
D22 C /// Flat End Cylinder
D4 C /// Flat End Cylin Diamond Bur
D26 C /// Flat end Cylin Diamond Bur
D3RL C /// Rd End Taper
D4R C /// Rd End Cylin Diamond Bur
E2 C /// Needle Diamond Bur

E9 C /// Needle Diamond Bur
E3 C /// Needle Diamond Bur
H12 C /// Flat End Taper Diamond Bur
H3R C /// Rd End Taper Diamond Bur
F5R C /// Rd End Taper Diamond Bur
H3RL C /// Rd End Taper Diamond Bur
F2R C /// Rd End Taper Diamond Bur
F6R C /// Round End Taper Diamond Bur
E5 C /// Flame Diamond Bur
E5L C /// Flame Diamond Bur

K2 C /// Football Diamond Bur
K6 C /// Egg Shape Diamond Bur
K8 C /// Egg Shape Diamond Bur
S2 C /// Gingival Curet Diamond Bur
S5 C /// Gingival Curet Diamond Bur
D5R C /// Rd End Cylin Diamond Bur
H14 C /// Flat End Taper Diamond Bur
H1 C /// Flat End Taper Diamond Bur
K2 UF /// Football Diamond Bur
K8 UF /// Egg Shape Diamond Bur
E57 UF /// Flame Diamond Bur
E58 UF /// Flame Diamond Bur

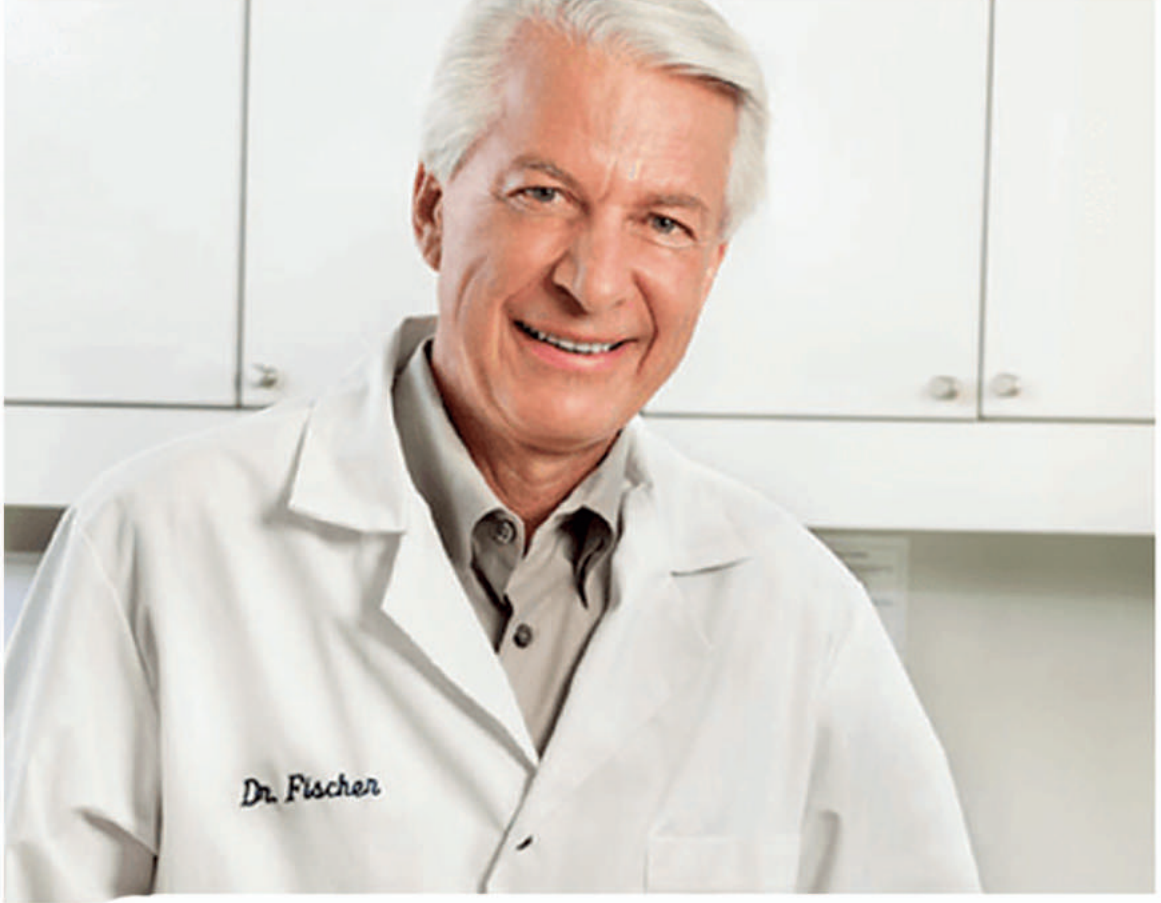


**Hasta sađlığını geliřtirmek.
Hekimi bařarıya ulařtırmak.**

Dünya çapında yüksek kalitede ve ödüllü dental ürünler üreticisi Ultradent'in misyonu tüm dünyada ađız ve diř sađlığını geliřtirmektir. Ürünlerimiz aynı zamanda sizin profesyonel bařarıya ulařmanıza da yardımcı olur.

Dr. Dan Fischer
Kurucu ve CEO, Ultradent Products Inc.

ULTRADENT
PRODUCTS, INC.

BEYAZLATMA ZAMAN TÜNELİ

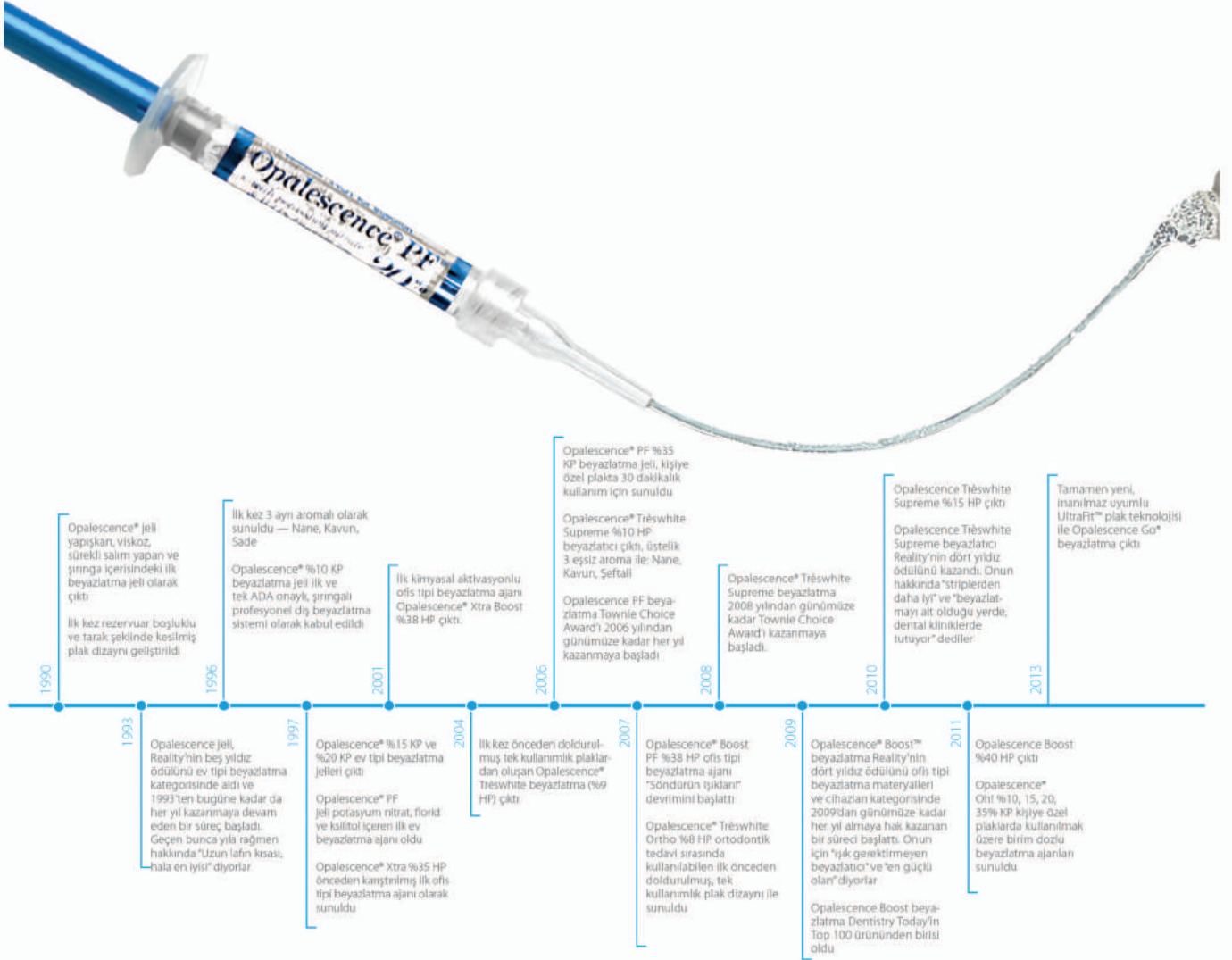

*Türkiye'de satış bulamayan ürünler çizilmiştir.

Opalescence
go®

2016¹
REALITY
Four Star Award
★★★★
Certified
GF
Gluten-Free

Opalescence Go® %6

ÖNCEDEN DOLDURULMUŞ BEYAZLATMA PLAKLARI –
HİDROJEN PEROKSİT



- Yeni eşsiz UltraFit™ plak materyali inanılmaz derecede rahat ve konforlu bir şekilde her hastanın gülüşüne kolaylıkla adapte olur
- Molar'dan molar'a kavrayış sayesinde jel daha çok posterior dişle temas eder
- UltraFit plağın mükemmel adaptasyonu, beyazlatma sırasında maksimum miktarda jelin dişlerle temasta kalmasını sağlar
- Opalescence diş beyazlatma jeli, beyazlatma işleminin başından sonuna kadar mine sağlığının korunmasına yardımcı olan PF, yani potasyum nitrat ve florür içerir.²⁻⁶
- 60-90 dakikalık sürelerle 5-10 gün kullanın
- Nefis Nane ve Kavun aroması
- Kullanışlı hazır plaklar paketten çıkarılıp kullanılmaya hazırdır
- Optimum jel miktarı beyazlatma sonrası kolay temizleme için ayarlanmıştır
- Düzgün ambalajı üstün stabilite, raf ömrü ve kullanım kolaylığı sağlar

Kullanımlar

Opalescence Go® beyazlatma, ayakta profesyonel beyazlatma yapmayı arzu eden beyazlatma hastaları için tavsiye edilmektedir. Ölçü, model veya laboratuvar süresi gerektirmeyen Opalescence Go® plakları aynı zamanda klinikte beyazlatmayı desteklemek için de ideal bir follow-up ürünüdür.

4634 Opalescence Go Mint %6 Patient Kit € 76

3592 Opalescence Go Melon %6 Patient Kit € 76
Her kit 10 blister paket içerir /1 üst/1 alt plak

4644 Opalescence Go Mint %6 Mini Kit € 38

3599 Opalescence Go Melon %6 Mini Kit € 38
Her kit 4 blister paket içerir /1 üst/1 alt plak

Talimatlar



1. Ambalajından çıkarm.




2. Plağı arka üzerinde ortalayın.



3. Hafifçe içinize çekin veya yutkunun.



4. Dış plağı çıkarın.

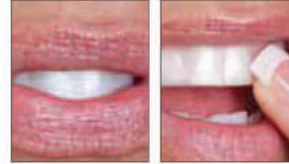

5. Tekrar içinize çekin veya yutkunun.



6. %6'yı 60 ila 90 dakika kullanın.

UltraFit™ plağın diş anatomisine mükemmel adaptasyonu.



Kullanımdan önce
UltraFit plak.



Ağızda 10 dakika durduktan
sonra UltraFit plak.

Opalescence® PF %10 ve %16

KARBAMİD PEROKSİTLE BİRLİKTE POTASYUM NİTRAT VE FLORÜR

- Özel plaklarla beyazlatma
- Yapışkan viskoz jel yer değiştirmez, plağın güvenli biçimde yerinde kalmasını sağlar
- Tedavinin büyük kısmı evde gerçekleşir, hekim koltuğunda geçen zamandan tasarruf sağlar
- Gündüz veya gece kullanım
- İki konsantrasyon, üç aroma
- PF jel, beyazlatma işleminin başından sonuna kadar mine sağlığının korunmasına yardımcı olan PF, yani potasyum nitrat ve florür içerir²⁻⁶

Opalescence jelin yapışkan, viskoz formülü sayesinde diğer beyazlatma jellerinde olduğu gibi plaktan sızma olmaz⁹ ve yapışkan jel, kullanımı rahat olan plağı güvenli bir biçimde yerinde tutar. Opalescence beyazlatma jeli, beyazlatma işleminin başından sonuna kadar mine sağlığının korunmasına yardımcı olan PF, yani potasyum nitrat ve florür içerir.²⁻⁶ Yüzde yirmi oranındaki su, dehidrasyonu ve eski renge doğru koyulaşmayı önleyerek, Opalescence jeli piyasada mevcut olan en güvenilir beyazlatma jellerinden biri yapmaktadır.⁷⁻⁹ Bir üniversite çalışması gece beyazlatma sırasında jelin 8-10 saat boyunca aktif kaldığını kanıtlamaktadır,⁹ bu da hastanın sonuçları çabucak görmesi ve hasta uyumunun artması demektir. Opalescence, tüm hastalarınızın beyazlatma gereksinimlerini karşılayacak şekilde çeşitli konsantrasyon, formülasyon, aroma ve kit konfigürasyonlarında mevcuttur.

Kullanımlar

Daha ışıltılı, daha beyaz bir gülümseme için. Tüm arkin beyazlatılması. Özellikle anterior restorasyonların, örn. kompozit, veneer ve/veya krunların yerleştirilmesinden önce kullanılması tavsiye edilir, böylece diş hekim hastasının daha açık renkli diş ve restorasyon arzusunu gerçekleştirebilir.



Opalescence® PF Doctor Kit'leri

		PF %16
Nane		4483
Kavun	€ 85	4484
Sade		4485
8 x 1,2 ml (1,50 g) Opalescence şırınga		
1 x 1,2 ml (1,38 g) şırınga Ultradent LC Block-Out Resin		
1 x Black Mini Tip		
2 x Sof-Tray 0,9 mm tabaka		
1 x 30 ml (28,3 g) Opalescence Beyazlatıcı Diş Macunu		
1 x Plak kutusu		
1 x Ton kılavuzu		
1 x Taşıma çantası		



Opalescence® PF Refills

		PF %16
Nane		4486
Kavun		4487
Sade		4488
40 x 1,2 ml (1,50 g) Opalescence şırınga		

€ 280

Buzdolabında saklayın.

Ultradent® LC Block-Out Resin IŞIKLA SERTLEŞEN BLOKAJ REZİNİ

240

- Düşük viskozitesi muntazam uygulamaya olanak sağlar
- Mavi pigment sayesinde uygulama sırasında görünürdür
- Çok sayıda kullanımı olan yararlılığı yüksek rezin



Ultradent LC Block-Out Resin Kit

4 x 1,2 ml (1,38 g) Ultradent LC Block-Out şırınga
20 x Black Mini Tip

€ 41

242

Ultradent LC Block-Out Resin Econo Kit

20 x 1,2 ml (1,38 g) Ultradent LC Block-Out şırınga
20 x Black Mini Tip

€ 137

Opalescence® BOOST

Opalescence® Boost


KLİNİKTE POWER WHİTENER
%40 HİDROJEN PEROKSİT




- İŞİĞA GEREKSİNİM YOKTUR!
- Güçlü %40 hidrojen peroksit jel
- Toplam 40 dakikalık bir tedavi süresi için iki 20 dakikalık uygulama
- Hassas uygulama, tam olarak temizlemek için kolay görünürlük
- Her uygulama için taze kimyasal
- Opalescence diş beyazlatma jeli, beyazlatma işleminin başından sonuna kadar mine sağlığının korunmasına yardımcı olan PF, yani potasyum nitrat ve florür içerir.²⁻⁶
- BUZDOLABINDA SAKLAYIN

Karıştırma Talimatları


Şırıngaları buzdolabından çıkarın. 2 kimyasalı birbirleriyle karıştırmadan önce içeriğin oda sıcaklığına gelmesini bekleyin. Devam etmeden önce kırmızı ve saydam şırıngaların birbirlerine sıkıca takılı olduğundan emin olun.

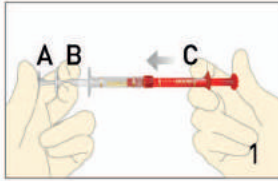

1. Devam etmeden önce iki şırınganın birbirlerine sıkıca takılı olduğundan emin olun. Kırmızı şırınganın (C) pistonuna bastırarak tüm içeriği saydam şırınganın (B) içine itin.

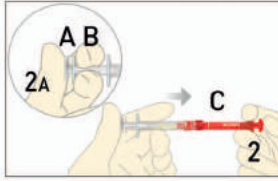

2. Küçük saydam gövde (A) kısmını daha büyük saydam gövde (B) kısmına bütünüyle girerek şekilde sıkıca bastırın. İşlemin şekil 2a'daki tamamlanmış haline bakın. Sonra saydam pistonu (A/B) tümüyle kırmızı şırınganın (C) içine bastırın.

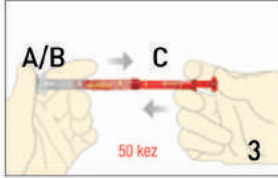

3. Aktive etmek için şırıngaları sürekli olarak başparmaklarla minimum 50 kez (her yöne/ tarafa doğru 25 kez) ileri ve geri hızla bastırın. Tüm kimyasalı kırmızı şırınganın içine bastırın.



4. Saydam şırıngayı çıkarın ve atın.



5. Kırmızı şırınga üzerine Micro 20 ga FX® Tip'i çevirerek takın. Ağız içerisinde kullanmadan önce homojen akış sağlamak için bir pamuk gazlı bez veya karıştırma pedi üzerinde materyal akışını kontrol edin. Herhangi bir direnç varsa devam ETMEYİN. Uygulamadan önce yeni bir Uç takıp tekrar deneyin.

ÖNEMLİ NOT: Opalescence Boost beyazlatıcı, karıştırıldıktan sonra 10 gün buzdolabında kalabilir. Şırıngada basınç oluşabileceğinden 10 günden sonra uygun tekniklerle bertaraf edin. Materyaller suyla seyreltilmeli ve bir lavabo veya tuvalete atılmalı ve sonrasında birkaç litre ek su dökülmelidir. Kağıt, karton, lastik, deri, pamuk gibi yanıcı materyal bulunan çöp kutularına ATMAYIN çünkü kendiliğinden tutuşma olabilir. Ayrıca uygulama sırasında bu güçlü peroksidi bu tür yanıcı materyallerle temas ettirmeyin çünkü tutuşma olabilir.

Uyan: Karıştırma, uygulama ve çıkarma sırasında hastanın ve klinisyenin gözlerini, geniş yan siperlikleri olan koruyucu gözlüklerle koruyun. Hidrojen peroksit yumuşak dokuları (cilt, dişeti, dudaklar) yakabilir. Tedavi bölgesinden izole tutun.

4750 Opalescence Boost PF 40% Intro Kit
4 x 1,2 ml (1,49 g) Opalescence Boost/Aktivatör şırıngası
2 x 1,2 ml (1,34 g) OpalDam Green şırınga
2 x IsoBlock
2 x Renk skalası kartı
2 x Ultradent Luer Vakum Adaptörü
2 x SST – Surgical Suction Tip
10 x Micro 20 ga Tip
10 x Micro 20 ga FX Tip

€ 195

Buzdolabında saklayın.

4751 Opalescence Boost PF %40 Patient Kit
2 x 1,2 ml (1,49 g) Opalescence Boost/Aktivatör şırıngası
1 x 1,2 ml (1,34 g) OpalDam Green şırınga
1 x IsoBlock
1 x Renk skalası kartı
5 x Micro 20 ga Tip
5 x Micro 20 ga FX Tip

€ 112

Buzdolabında saklayın.

4754 Opalescence Boost PF %40 Econo Refill
20 x 1,2 ml (1,49 g) Opalescence Boost/Aktivatör şırıngası



Buzdolabında saklayın.

€ 537

DİŞ BEYAZLATMA OFİS TİPİ TEDAVİ

OPALESCECE® BOOST™

OFİS TİPİ BEYAZLATMA

Opalescence Boost bir tıbbi beyazlatma tedavisi ürünüdür, nötr pH'a sahiptir ve sadece 40 dakikada diş hekimi koltuğunda mükemmel sonuçlar sunar.

Opalescence Boost ofis tipi beyazlatıcısı kimyasal olarak aktive olur, dolayısıyla beyazlatma için ışık veya laser cihazı gerektirmez.



- Güçlü %40 hidrojen peroksit jel
- PF (potasyum nitrat ve florid) içeren Opalescence diş beyazlatma jeli
- Nötr pH
- Toplam 40 dakikalık bir tedavi süresi için iki 20 dakikalık uygulama
- Tam olarak temizlemek için rahatça görünürlük
- Gluten içermez



KULLANIMLAR

- Tıbbi diş beyazlatma için ofis tipi uygulama
- Opalescence Boost hastalık, yaralanma veya tıbbi tedavi, örn. dental florozis, sarılık, tetrasiklin ve erişkin minosiklin lekeleri, porfiri, travma ve eritroblastosis fetalis gibi konjenital, sistemik, metabolik, farmakolojik, travmatik veya iatrojenik faktörler nedeniyle internal olarak renk değiştirmiş (kuronlara, veneerlere, vs.'ye göre) koyu renkli dişlerin tedavisi için bir alternatif, konservatif yöntemdir
- Tek başına da kullanılabilir, diğer Opalescence diş beyazlatma ürünleri ile de kombine edilebilir

KLİNİK VAKALAR



Önce



Sonra



Önce



Sonra

- %45 karbamid peroksit jel
- Internal renklenmelerin yoğun tedavisi için
- Gingival koruma gerektirmez
- 30 dakikalık tedavi ile sonuç alınır
- Klinikte yapılır fakat hasta koltuğunuza işgal etmez
- Opalescence diş beyazlatma jeli, beyazlatma işleminin başından sonuna kadar mine sağlığının korunmasına yardımcı olan PF, yani potasyum nitrat ve florür içerir.²⁻⁴

5346 **Opalescence Quick PF Refill**
4 x 1,2 ml (1,50 g) Opalescence Quick PF şırınga

Buzdolabında saklayın.

€ 52



Opalescence® Quick PF %45
BEKLEME ODASI BEYAZLATICISI KARBAMID PEROKSİT

OpalDam® ve OpalDam® Green
ŞIKLA SERTLEŞEN REZİN BARİYERLERİ



- Yumuşak dokuyu dayanıklı bir sızdırmazlıkla korur
- Kolayca çıkarılır
- Doğrudan uygulanır

1824 **OpalDam Green Kit**
4 x 1,2 ml (1,34 g) OpalDam Green şırınga
10 x Micro 20 ga Tip
10 x Black Mini Tip

€ 75

1826 **OpalDam Green Econo Refill**
20 x 1,2 ml (1,34 g) OpalDam Green şırınga

Buzdolabında saklayın.

€ 268

Opalustre® ve OpalCups™
KİMYASAL VE MEKANİK ABRAZYON PATİ

5554 **Opalustre Kit**
2 x 1,2 ml (1,87 g) Opalustre şırınga
10 x OpalCups – 5 fırçalı ve 5 bitirme
10 x White Mac Tip



- Yüzeysel beyaz ve kahverengi lekeleri çıkarır
- Florozis için minimal invaziv tedavi sağlar
- Doğrudan, etrafı kirletmeyecek bir uygulama yapacak şekilde gelir
- Tek seansta sonuç alınır
- Otoklavlanabilir OpalCup'lar sıçramayı en aza indirir

€ 65

KleerView™

YANAK/DUDAK RETRAKTÖRLERİ

1820 KleerView Çocuk Boyu
1821 KleerView Erişkin Boyu
1 x KleerView



€ 24

331 **IsoBlock**
10 x IsoBlock



- TME üzerindeki gerilimleri azaltır
- Hasta için rahatlık sağlayacak şekilde tasarlanmıştır
- Bilateral destek sağlar ve dil tutucudur

€ 15

POTASYUM NİTRAT VE FLORÜR
İÇEREN HASSASİYET AZALTICI JEL



Devrim niteliğindeki
UltraFit™ plak eşliğinde

- Anında sonuç verir
- Hassasiyeti giderir
- Şırınga veya tek kullanımlık plaklarda sunulur

1008 **UltraEZ Refill**
4 x 1,2 ml (1,48 g) UltraEZ şırınga

€ 36

5743 **UltraEZ Mini Kit**
Her kit 4 blister paket içerir 1 üst/1 alt plak

€ 36



3534 UltraSeal XT Hydro Opak Beyaz Refill
HİDROFİLİK PIT VE FİSSÜR ORTUCU
4 x 1,2 ml (2,04 g) UltraSeal XT hydro şırınga

Buzdolabında saklayın.

€ 96

3535 UltraSeal XT Hydro Naturel Refill
4 x 1,2 ml (2,04 g) UltraSeal XT hydro şırınga

- Hidrofilik kimya
- İleri adeziv teknolojisi
- Floresan özellikler
- Yüksek rezin dolduruculu
- Tikotropik/ideal viskozite
- İki renk: Opak Beyaz ve Naturel

€ 96



Bir flor verniğinde bulunmasını isteyeceğiniz her şey.
Sonunda!

İhtiyacınız olan florür salımı ve alımı.
Hastalarınızın arzu ettiği mükemmel tat, yumuşak his ve doğal görünüm.
Şimdi daha keyifli aromalarla!



4528 Enamelast **Walterberry** 200 ad € 320

4343 Enamelast **Orange Cream** 200 ad € 323

4526 Enamelast **Walterberry** Unit-Dose Kit € 15

4518 Enamelast **Walterberry** Unit-Dose Econo Kit € 92

4521 Enamelast **Walterberry** Syringe Kit € 10

4344 Enamelast **Orange Cream** Unit-Dose Econo Kit € 93

4345 Enamelast **Orange Cream** Unit-Dose Kit € 15



- Güçlü retansiyon için patentli adezyon destekleyici ajan
- Yüksek florür salımı ve alımı
- Yumuşak, pütürsüz yapı
- Neredeyse fark edilmeyen görünüm



ultrapro® Tx

Ultrapro® Tx

PROFİ PATİ



Cool Mint

Walterberry

Bubble Gum

Orange Dreamsicle

- %5 potasyum nitrat ve %1,23 florür iyonu içerir
- Sıçramayan formül
- 4 zengin aromalı seçenek
- Pürüz hissi kalmasını önlemek için durulama yoluyla kolayca ve tümüyle çıkar



Karışık

(100 Walterberry, 50 Orange Dreamsicle ve 50 Mint)

8327

200 adet (her biri 2,0 g)

€ 58

266

Ultradent Universal Dentin Sealant Refill

4 x 1,2 ml (1,08 g) şırınga

€ 52

- Hızlı uygulama – sürün ve kurutun
- Hijyenistlerin "alet kutusu" için mükemmel
- Diş temizliği ve kök düzeltme sonrasında ideal

Ultradent Universal Dentin Sealant uçucu bir organik solvent içinde, biyouyumlu, polimerize olmayan, yüksek moleküler ağırlıklı bir rezindir.

Ultradent® Universal Dentin Sealant GEÇİCİ KÖK HASSASİYETİ İÇİN



Opalescence® Endo

DEVİTAL "WALKING BLEACH" %35 HİDROJEN PEROKSİT



1270

Opalescence Endo Kit

2 x 1,2 ml (1,45 g) Opalescence Endo şırınga
20 x Black Mini Tip

Buzdolabında saklayın.

€ 104

- Ulaşılması güç alanları etkin biçimde temizler
- Sıkı fiberler dağılmayı önlemeye ve uygun basınç uygulamaya yardımcı olur
- Consepis Scrub® antibakteriyel pat veya Ultrapro Tx ile kullanmak için idealdir

STARbrush®

İTERKORONAL FIRÇA



1093 STARbrush
100 * STARbrush

€ 133



Kullanımlar

STARbrush interdental fırça, sınırlı erişim olan bölgeleri temizlemek için mükemmeldir. Dolgu, inley, onley ve kuronlarda bonding işlemi öncesinde hem intrakoronel hem ekstrakoronel temizlik yapmak üzere tasarlanmıştır. STARbrush'ı Consepis Scrub klorheksidin antibakteriyel pat ile birlikte gingivayı aşındırmadan kalan geçici simanı gidermek için kullanın. Sınıf I, II, III, IV, V ve endodontik giriş hazırlıkları açısından STARbrush fırçasının benzeri yoktur. Ayrıca ortodontik braketter etrafında temizlik yapar ve fissür örtücü yerleştirilmeden önce kullanılabilir. STARbrush'ı Consepis Scrub, başka bir dezenfektan veya Ultrapro® Tx profi patı ile kullanın.

Opalescence® whitening toothpaste

Opalescence diş macunu beyazlatılmış gülüşlerin kalıcılığını sağlarken hastalara çürüklerin önlenmesinde de yardımcı olur. Aynı zamanda her gün kullanıma uygun derecede yumuşaktır.


Opalescence® Beyazlatıcı Diş Macunu³ Orijinal ve Hassasiyet Giderici



- Benzersiz formülü ile ağız sağlığını ve parlıdayan beyaz gülüşleri korumak için idealdir
- Düşük abrazyon formülü yüzey lekelerini çıkarırken mineyi korur
- Her gün kullanmak için güvenlidir
- Etkin, hızlı florür salımı
- Yeni Hassasiyet Giderici formül ile piyasada
- Triklosan içermeyen formül
- Serinletici Nane aromasına sahiptir

Yüzey lekelerini çıkarıp, dişleri sadece bir ayda iki ton beyazlatır!¹

RELATİF DENTİN ABRAZYONU (RDA)²

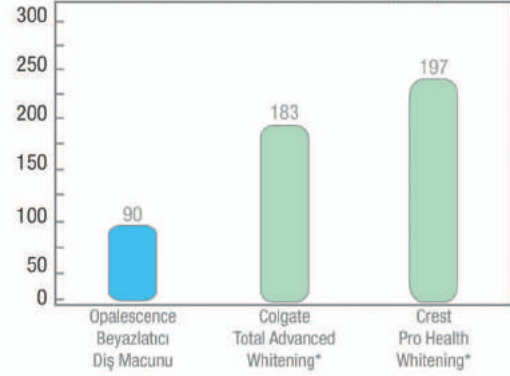

Opalescence beyazlatıcı diş macununun abrazyon etkisi diğer önde gelen beyazlatıcı diş macunlarına kıyasla daha azdır.^{2,3}

Büyük Boy 133g 12'lik Paket

€ 202

Büyük Boy 133g 1 Adet

€ 19

Küçük Boy 28,3g 24'lük Paket

€ 101

Küçük Boy 28,3g 1 Adet

€ 5

1021 Sable Seek 2'li Paket
ÇÜRÜK BELİRLEYİCİLER



€ 26

- Demineralize olmuş dentini belirler
- Etrafı kirletmeden, tam miktarında iletim sağlar
- Pulpa yakınında çalışmak ve kök kanal girişlerini kolayca belirlemek için koyu yeşil renkte mevcuttur

Sable Seek çürük belirleyicisi FD ve C boyları ve Seek çürük belirleyici glikol bazlı D ve C boyları içerir. Her ikisi de çürük dentini boyamak için kullanılırlar.

PropGard®
Ağız Açıcı ve Dil Ekartörü



4100 PropGard Kit
10 x PropGards – 5 büyük sarı ve 5 normal mor
20 x Dil koruyucu – 10 sol ve 10 sağ

€ 34

3097 InterGuard Kit PROXITECTOR
5 x 4,0 mm ve 5,5 mm'liğin her birinden

InterGuard proxitector komşu dişi iatrojenik hasardan koruyarak daha hızlı, daha güvenli bir preparasyon sağlar.² Her iki uçtaki sabit kıvrımlar tam erişim için geçiş açıklarını açık bırakır. InterGuard proxitector tünel preparasyonları için ve hava abrazyonu sırasında komşu dişi korumak için mükemmeldir.

€ 26



DermaDam®
RUBBER DAM

311 DermaDam Medium – 0,20 mm Refill
36 x DermaDam Medium (15 cm x 15 cm)

€ 27

314 DermaDam Heavy – 0,25 mm Refill
36 x DermaDam Heavy (15 cm x 15 cm)

€ 35

Sof-Tray® Classic Sheets

PLAKLARIN VAKUMLA OLUŞTURULMASI İÇİN TABAKA MATERYALİ

226 Sof-Tray Regular Plaklar
25 x Plak tabakası (0,9 mm – 127 x 127 mm)

€ 27

0,9 mm KALINLIK

227 Sof-Tray Medium Plaklar
20 x Plak tabakası (1,5 mm – 127 x 127 mm)

€ 27

1,5 mm KALINLIK

284 Sof-Tray Heavy Plaklar
20 x Plak tabakası (2,0 mm – 127 x 127 mm)

€ 38

2,0 mm KALINLIK

- Soğuk dezenfeksiyon (otoklava koymayın)
- Dilden ve ari ağız kapatmasından kaynaklanan kontaminasyonu önler
- Döner aletlerden dili korur
- Rahatsızlığa neden olmadan hastanın ağzını uzun süre açık tutar

Kullanımlar

PropGard Ağız Açıcının kama şeklindeki tasarımı dilden ve ağız kapatılmasından kaynaklanan kontaminasyonu önler ve dili el aletlerinden korur.



Ultradent® Ultra-Trim Detay Makasları

—PLAKLARI KESMEK İÇİN

605 Ultradent Ultra-Trim Detay Makasları
1 adet



€ 51



Kullanımlar

DermaDam rubber dam saf lateks lastikten yapılmıştır ve pudrasızdır, bu durum lateks reaksiyonları olasılığını azaltır. Kaliteli işlemler düşük yüzey proteini içeriği sağlar.

- Aseptik ve tek kullanımlık
- Yerleştirmesi kolay
- Renk kodlu
- Üstün hasta konforu
- Adapte olabilir, ayarlanabilir bant
- Yerleştirme aletleri gerektirmez
- Dudak, yanak veya eldiven sıkışması olmaz

2201 Omni-Matrix Winged 6 x 0,025 mm Refill
2202 Omni-Matrix Winged 6 x 0,04 mm Refill
2204 Omni-Matrix Winged 4 x 0,04 mm Refill
48 x kanatlı metal bant

€ 67

2203 Omni-Matrix Winged 6 x 0,05 mm Refill
48 x kanatlı plastik bant

€ 76

1101 Omni-Matrix Wingless 6 x 0,025 mm Refill
1102 Omni-Matrix Wingless 6 x 0,04 mm Refill
1104 Omni-Matrix Wingless 4 x 0,04 mm Refill
48 x kanatsız metal bant

€ 67

Consepsis® Scrub Klorheksidin ANTİBAKTERİYEL PAT



Consepsis Scrub antibakteriyel pat, hafif tatlandırılmış bir %2,0 klorheksidin glukonat (sıvı bileşene oranla) dezenfekte edici temizleme malzemesidir. Consepsis Scrub patta abrasiv madde olarak, volkanik küllerden kaynaklanan çeşitli iz kirlilikler içermeye olasılığına sahip olan, toz haline getirilmiş ponza yerine ağır, ince öğütülmüş Pyrex® camı kullanılmaktadır. Profi patı, potansiyel olarak kontamine edici çeşitli bileşenler içerdiği için hazırlık temizliğinde kesinlikle kullanılmamalıdır.

Omni-Matrix kullanımı çabuk ve kolay, tek kullanımlık bir tutucu ve matrikstir. Sadece konik çapı çevirerek bandın çevresini ayarlayın. Patentli, eklemlili baş dönerek ağızın herhangi bir kadrana rahatça sığar. Restorasyon tamamlandığında, Omni-Matrix bant restoratif materyale zarar vermeden kolayca çıkarılır. Paslanmaz çelik matriks bandı incedir, adapte olabilir ve ayarlanabilir; kanatsız tasarım kamalarnı kolaylıkla yerleştirilmesine olanak sağlar.


Omni-Matrix™

TEK KULLANIMLIK TUTUCU VE MATRİKS

Talimatlar



1. YERLEŞTİRİN

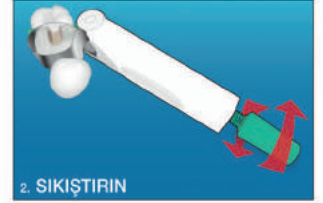

2. SIKIŞTIRIN



3. ÇIKARIN



4. ATIN

730 Consepsis Scrub Kit
4 x 1,2 ml (1,89 g) şırınga
2 x STARbrush
20 x White Mac Tip

€ 36

689 Consepsis Scrub IndiSpense Şırınga
1 x 30 ml (47,31 g) şırınga

€ 87

Metal Dento-Infusor® Tip

Ultradent Dento-Infusor® Tip'lerin benzersiz şekli ve fırça ucu, hemostatik ajanların kesilmiş dokuya uygulanması için idealdir.



- Hemostatik ajanları kusursuz şekilde uygular ve yüzeysel pıhtıyı etkin biçimde uzaklaştırır
- Fırça takviyeli künt, eğri kanül sulkus üzerine hafif bir basınç uygulanmasını sağlar
- Ultradent'in ilk ucu olan "MDI" doku düzenlemenin başarılı olması için hala en önemli uç olmaya devam etmektedir

Optimum kullanım: Astringedent, Astringedent X, ViscoStat ve ViscoStat Clear hemostatikler ile.

Ref No: 2560 500 adet

€ 298

Kan Durdurucular

ViscoStat®
%20 FERRİK SÜLFAT



Metal Dento-Infusor® Tip

- Derin hemostaz sağlar
- Kanamayı saniyeler içinde durdurur, diş hekimi koltuğunda geçen süreyi azaltır
- Yumuşak ve sert dokulara eşsiz şekilde nazik davranır
- Optimum bonding işlemi için sulkus sıvısını elimine eder
- Masraflı ölçü tekrarlarını azaltır

ViscoStat® Clear
%25 ALÜMİNYUM KLORÜR



Astringent®
%15,5 FERRİK SÜLFAT

€ 50



686 **Astringent IndiSpense Şırınga**
Her biri 30 ml (34,41 g)



649

ViscoStat TM IndiSpense Kit

1 x 30 ml (36,69 g) IndiSpense şırınga
1 x no 00, 0, 1 ve 2 ipin her birinden
1 x Fischer'in Ultrapak Fulvan (171)
1 x Ultrapak cord organizer
20 x Metal Dento-Infusor Tip
20 x 1,2 ml boş şırınga



€ 147

647

ViscoStat Dento-Infusor IndiSpense Kit

1 x 30 ml (36,69 g) IndiSpense şırınga
20 x Metal Dento-Infusor Tip
20 x 1,2 ml boş şırınga



€ 76

6407

ViscoStat Clear Dento-Infusor IndiSpense Kit

1 x 30 ml (38,52 g) IndiSpense şırınga
20 x Metal Dento-Infusor Tip
20 x 1,2 ml boş şırınga



€ 76

- Estetik bölgedeki minör kanamayı durdurur
- Kalıntı veya leke bırakmaz ve kolayca durulanabilir
- Kolayca yerleştirilir
- Visköz fakat yayılabilir formdadır
- Bondingi olumsuz etkilemez²

Astringent® X

%12,7 DEMİR SOLÜSYONU

Zor Kanamalar için



Astringent X hemostatik eşdeğer oranda ferrik sülfat ve ferrik subsülfat içeren sulu, %12,7'lik bir demir solüsyonudur. Diğer hemostatik ajanlarımız kadar doku dostu değildir. Not: Seyreltik Astringent X, ViscoStat veya Astringent ile eş değerde değildir.

690

Astringent X IndiSpense Şırınga
Her biri 30 ml (40,71 g)



€ 50

Ultrapak®
ÖRGÜLÜ İP

Kolay yerleştirilmesi, mükemmel emiciliği ve benzersiz retraksiyonu ile Ultrapak İpin özel örgülü tasarımını yıllardır tercih edilen seçim olmuştur.

ÇİZGİLİ OLAN!®



- Orijinal örgülü ip
- Hızlı doku retraksiyonu, ayrıntılı kenarlar ve kaliteli ölçüler sağlar
- Kolay yerleştirilme imkanı sağlar ve bükülmüş veya eğilmiş bir ipe göre daha iyi yerinde kalır
- Yerleştirme sonrasında sıkışır ve ardından optimum retraksiyon için genişler
- Elmas freze takılmaz
- Parlak renkler yerleştirmeyi ve çıkarmayı kolaylaştırır

Ultrapak® diş ipi uzun, birbirine kilitlemiş zincirler oluşturan binlerce küçük halka şeklinde örülmüş %100 pamuktan yapılmıştır. Bu benzersiz örgülü tasarım, yerleştirildikten sonra halkalar açılmaya çalışırken hafif ve sürekli bir dışarı itme gücü oluşturur. Optimum doku retraksiyonu 1–3 dakika içinde gerçekleşir.

Kullanımlar

Ultrapak® retraksiyon ipi ölçü alımından önce hızlı doku retraksiyonu için kullanılır ve ayrıca sulkus sıvısının kontrolü amacıyla ferrik sülfat solüsyonlarının subgingival iletimi için de kullanılabilir. Ultrapak® ip ViscoStat® veya Astringent® hemostatikleri kullanılan doku düzenleme tekniklerini geliştirmek için tasarlanmıştır. Klasik iplerden ciddi ölçüde fazla miktarlarda hemostatik solüsyon taşıyan Ultrapak® sade örgülü ipler kullanıldığında alümin, alüminyum klorür, vs. kullanılan korvanseyonel teknikler de daha gelişmiş duruma gelir.



Ultrapak® CleanCut tasarım kullanım rahatlığını arttırmak için kapakta bir jilete sahiptir.

9330

Ultrapak® Kit

1 x no 00, 0, 1 ve 2 ipin
her birinden
1 x Ultrapak organizzer



€ 59

#000



- "Çift-iplik" tekniğinde alt ip
- Ön dişler
- Çift uygulama

9331

Ultrapak® Cord #000 Refill



€ 18

#00



- Veneer hazırlama ve simantasyon
- İnce, narin dokularla ilgili restoratif işlemler

9332

Ultrapak® Cord #00 Refill



€ 17

#0



- Alt ön dişler
- Gingival ve subgingival veneerler yakınında luting işlemi yaparken
- Sınıf III, IV ve V restorasyonlar
- "Çift-iplik" tekniğinde üst ip olarak

9333

Ultrapak® Cord #0 Refill



€ 15

Her şişede 244 cm retraksiyon ipi bulunmaktadır.

#1



- Madde emdirilmemiş no 1 ve no 2 boyutları, kuron preparasyonu öncesi ve/veya sonrasında koagülatif hemostatik solüsyona batırıldığında doku kontrolü ve/veya retraksiyonu için özellikle etkilidir
- Ön dişlerde koruyucu "preparasyon öncesi" ipi

9334

Ultrapak® Cord #1 Refill



€ 15

#2



- "Çift-iplik" tekniğinde üst ip olarak kullanılır
- Koruyucu "preparasyon öncesi" ipi

9335

Ultrapak® Cord #2 Refill



€ 15

#3



- Önemli ölçüde güç gereken nispeten kalın gingival dokuların bulunduğu bölgeler
- "Çift-iplik" tekniğinde üst ip olarak

9336

Ultrapak® Cord #3 Refill



€ 15

Peak® Universal Bond
KLORHEKSİDİN İÇEREN (%0,2)
IŞIKLA SERTLEŞEN ADEZİV



- Dentin, mine, porselen, metal, kompozit ve zirkonyaya bağlanır
- Uzun süreli bond gücü sağlayabilecek olan klorheksidin (%0,2) içerir¹⁻³
- Post ve kor işlemlerinin yanı sıra indirekt ve direkt bonding için de idealdir
- Self-etch ve total-etch teknikleriyle çalışır
- Bütün bonding prosedürleri için 2 µm film kalınlığı ve optimum viskozite
- Şırınga veya şişe içinde sunulur

4542 Peak Universal Bond Total-Etch Bottle Kit

- 1 x 4 ml Peak Universal Bond şişe
- 4 x 1,2 ml (1,58 g) Ultra-Etch şırınga
- 40 x Blue Micro tip
- 50 x Karıştırma kabı
- 50 x Micro Applicator fırça

€ 77

Buzdolabında saklayın.

Ultra-Blend® plus
LİNER

415 Ultra-Blend plus Kit

- 2 x 1,2 ml (1,64 g) Ultra-Blend plus Dentin şırınga
- 2 x 1,2 ml (1,64 g) Ultra-Blend plus Opaque White şırınga
- 20 x Black Micro Tip
- 20 x Black Mini Tip

€ 77



416 Ultra-Blend plus Dentin Refill

- 4 x 1,2 ml (1,64 g) şırınga

€ 64

383 Ultra-Etch Dev Şırınga ASİTLEYİCİ
1' 30 ml (39,60 g) Şırınga



€ 87

- Dentin üzerinde kendinden ırmıtı²
- En küçük fissürlere bile girer ama dikey yüzeyde yayılmaz
- Hassas uygulama
- Temizce durulanır – kalıntı bırakmaz
- İyi görünürlük için koyu mavi renge sahiptir

Ultra-Etch asitleyici %35'lik bir fosforik asit solüsyonudur. İdeal viskoziteye sahip olma özelliği ile birlikte Blue Micro veya Inspiral Brush Tip kullanımı hassas uygulamayı ve üstün kontrolü kolaylaştırır. Asitleme derinliği açısından kendinden limitli (20 saniye asitlemede ortalama 1,9 µm derinlik)² olan Ultra-Etch asitleyici, adezivlerin bond gücünü arttıracak şekilde nüfuz edebileceği bir asitleme formu yaratır. Çalışmalar Ultra-Etch asitleyicinin benzersiz dentin üzerinde kendinden limitli kimyasının rezini alacak optimal bir yüzey yarattığını göstermektedir.³

Ultra-Etch asitleyici viskoz yapıda olmasına rağmen, kapiller hareketi destekleyen fiziksel ve kimyasal özellikleri nedeniyle en küçük fissürlere ve oklüzal yüzeylere girebilir. İdeal viskozitesi erken kurumayı önleyecek yeterli kalınlığa sahip bir tabakayı sürdürür.


1016 Ultra-Blend plus Mini Kit Universal

- 2 x 1,2 ml (1,64 g) Ultra-Blend plus Dentin şırınga
- 5 x Black Micro Tip


€ 40

Ultra-Blend plus liner, dentin yenilenmesi ve iyileşmesini destekleyen kalsiyum hidroksit ve kalsiyum hidroksiapatit içeren, ışıkla aktive olan, radyopak bir materyaldir. Diğer kavite liner'lara kıyasla, Ultra-Blend plus kavite bütümlenimin minimum ve kalsiyum salımının yüksek olması için yüksek oranda dolduruculudur.


- Biyoaktif Liner ve pulpa kapatma materyali
- Yüksek kalsiyum salımı¹
- Kontrollü, kusursuz şırınga iletimi
- Karıştırma gerektirmez
- Zamanla çözünüp kaybolmaz
- Klinisyen hazır olduğunda ışıkla sertleştirilir
- Radyopak

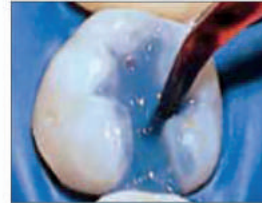

Klinik deneyim ve FE-SEM değerlendirmeleri² hem dentin hem mine üzerinde 20 saniye asitleme süresinin her iki dokuda optimal koşullandırmayı oluşturduğunu göstermektedir. Hava/suyla durulayın. Fazla suyu doku-narak giderip, yüzeyi görünür şekilde ıslak bırakın.

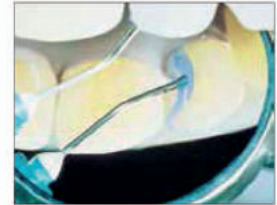

En ince çizgilerde bile kolayca asitleme işlemi yapılabilir. Blue Micro Tip kullanıldığında, Ultra-Etch akmadan lingual bölgeden hassas şekilde uygulanabilir.

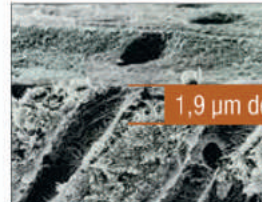


1,9 µm derinlik

Ultra-Etch fosforik asitinin 20 saniyelik asitleme sonucu 1,9 µm ortalama derinlikle asitleme derinliği açısından benzersiz şekilde kendinden limitli olduğu göstermiştir. Sıvı fosforik asit (%37) 20 saniyede ortalama 5,0 µm ve "polimerle kalınlaşmış" rakip bir asitleyici 4,8 µm derinlik göstermiştir.³ Bu daha yüksek asitleme derinliğine sahip asitler optimum düzeyi geçmez ve tam olma-yı rezin bağlanması potansiyelini artırır.



Ultradent® Porcelain Etch ve Silan

PORSELEN ASİTİ VE SİLAN SOLÜSYONU

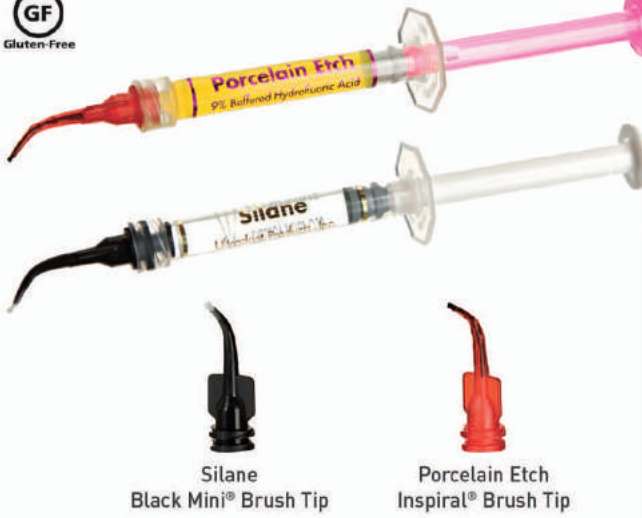

Silane
Black Mini® Brush Tip

Porcelain Etch
Inspiral® Brush Tip

90 Saniye Asit – 60 Saniye Silan


- Asidin kontrolü ve yerleştirilmesi kolaydır
- Kompoziti veya rezin simanı boyamaz
- En yüksek porselen-rezin bond güçlerini sağlar²
- Silan tek bileşenlidir

Ultradent Porcelain Etch viskoz, tamponlu %9 hidroflorik asittir. Silan tek bileşenli bir solüsyondur.


Kullanımlar

Porcelain Etch intraoral veya ekstraoral olarak porselen asitleme işlemi için tasarlanmıştır. Bonding ve tamir öncesinde porselen veya eski makro dolgulu kompozitlerde asitleme işlemi için kullanılır. Ayrıca veneer, inley, vs. gibi indirekt restorasyonların klinikte asitlenmesi gerektiğinde kullanılır. Porselenin asitlenmesinden sonra kalıntılar 5 saniye Ultra-Etch® asitleyici ile temizleyin ve iyice durulayın; ardından Silan uygulaması yapın. Çalışmalar Silan maddesinin Porcelain Etch ve kaliteli bir bonding rezini ile kullanıldığında, diğer porselen bonding ürünlerine kıyasla en yüksek bond gücünü verdiğini göstermiştir.³

Ultradent Porcelain Etch ve Silan lityum disilikat (IPS e.max®)* restorasyonlarda da kullanılabilir.

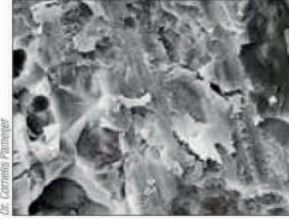

1. Elmasla kesilen porselen yüzeyi.

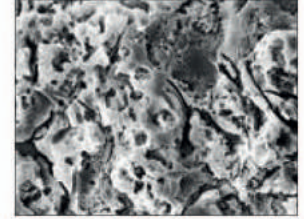


2. Aynı porselen 90 saniye Ultradent® Porcelain Etch ile asitlemeden sonra.




1. Porcelain Etch porselen EtchArrest bariyerin yerleştirilmesinden sonra Inspiral Brush Tip ile iletir.



2. Ultradent® Silan uygulanır ve kurutulur, ardından Peak Universal Bond adeziv uygulanır.

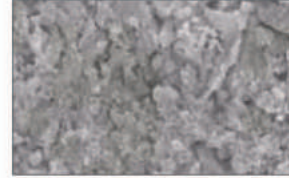

Ultradent® Porcelain Etch ile 90 saniye hidroflorik asit uygulamasından sonra porselen üzerindeki silika tuzu kalıntıları.

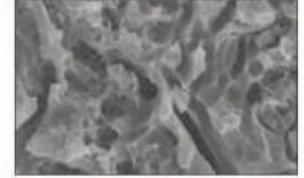

5 saniye Ultra-Etch asitleyici kullanın ve kalıntılar temizlemek üzere durularak bonding için temiz bir yüzey oluşturun.

407 Porcelain Etch Kit Universal

4 * 1,2 ml (1,33g) şırınga

€ 53

406 Porcelain Etch Refill

2 * 1,2 ml (1,33g) şırınga

€ 29

1019 Porcelain Etch / Silane Mini Kit Universal

1 asit 1 silan 5 uç

€ 39

410 Silane Refill

2 * 1,2 ml (0,96g) şırınga

€ 23

Ultradent®
Porcelain Repair Kit

ASİT, SİLAN, BOND REZİNİ VE AKIŞKAN KOMPOZİT



- Tüm gerekli prekompozit yerleştirme materyallerini içerir
- Yüksek bond güçleri verir
- Karıştırmadan hızlı, kolay tamirler sağlar

Kullanımlar

Porselen tamiri işlemleri daha sık görülmektedir. Parçası kopmuş bir porselen restorasyonu değiştirmek yerine tamir etmek mali açıdan daha avantajlı ve daha az invazivdir. Ultradent Porcelain Repair Kit kompozit ile porselen, porselen ile metal ve porselen ile porselen tamirlerinde kullanılmak üzere gerekli tüm ürünleri ve uçları içerir.

1108

Ultradent Porcelain Repair Kit

- 1 x 1,2 ml (2,30 g) PermaFlo Dentin Opaquer şırınga
- 1 x 1,2 ml (1,39 g) EtchArrest şırınga
- 1 x 1,2 ml (1,34 g) OpalDam şırınga
- 1 x 1,2 ml (1,24 g) Peak Universal Bond şırınga
- 1 x 1,2 ml (1,33 g) Porcelain Etch şırınga
- 1 x 1,2 ml (0,96 g) Ultradent Silane şırınga
- 20 x Black Mini Brush Tip
- 20 x Black Micro Tip
- 20 x Micro 20 ga Tip
- 20 x Inspiral Brush Tip

€ 145

Buzdolabında saklayın.



Porselen Tamiri için Adım Adım Kılavuz

Gerekirse rubber dam yerleştirin ve/veya çevre dişleri ve dişeti dokusunu bir Black Mini® Tip kullanarak OpalDam ışıkla sertleşen rezin bariyer ile örtün. 10 saniye VALO® LED ışık cihazı ile ışıkla sertleştirin. Işık çıkışı <600 mW/cm² olan ışık cihazlarıyla 20 saniye sertleştirin.



Tamir edilecek seramik ve metal yüzeyleri 50 µm alüminyum oksit partikül- lere sahip bir mikroabrazyon sistemiyle pürüzlendirin. Alternatif olarak (daha az etkili olmasına rağmen) bir elmas frez kullanın.



Bir Black Micro® Tip ile kırılmış porselen yüzeyinin etrafına çerçeve gibi EtchArrest® bariyer yerleştirin.



Kırılmış porselen yüzeyine bir Inspiral® Brush Tip ile Porcelain Etch uygulayın.



Yüzeyde 90 saniye asitleme yapın; sonra jel aspirasyonu yapıp su spreyiyle dikkatle durulayın. EtchArrest maddesinin asit içine asidin sarı rengi görünmeyinceye kadar karıştırılması önerilir. Bu işlem asitleyici maddeyi nötralize eder ve nötralize edilmiş karışım çıkarılırken asit sıçraması riskini ortadan kaldırır.



5 saniye Ultra-Etch asitleyici uygulayın.



Durulayın ve kırılmış metal ve porselen yüzeyi havayla iyice kurutun.



Kırılmış porselen yüzeyine bir Black Mini Brush Tip ile Silane uygulayın. Metali ıslatmak problem değildir.



1 dakika buharlaşmasını bekleyin; sonra tamamen kuruyuncaya kadar hafif bir hava akımı verin.



Metale ve seramiğin kırık yüzeyine bir Inspiral Brush Tip ile Peak Universal Bond adeziv uygulayın. Havayla hafifçe ama iyice inceltin.



Peak Universal Bond adezivi 10 saniye VALO® LED ışık cihazı ile ışıkla sertleştirin. Işık çıkışı <600 mW/cm² olan ışık cihazlarıyla 20 saniye sertleştirin.



Açığa çıkmış metali bir Micro 20 ga Tip kullanarak ince bir PermaFlo Dentin Opaquer tabakasıyla örtün, sonra 10–20 saniye VALO® LED ışık cihazı ile sertleştirin. Işık çıkışı <600 mW/cm² olan diğer ışık cihazlarıyla 20 saniye sertleştirin.



Kırılmış veneerde ışıkla sertleşen kompozit kullanarak restorasyon yapın.



Tamir edilen bölgede bitirme ve polisaj yapın.

Bu Hızlı Kılavuz ile yalnızca bir genel bakış sağlanması amaçlanmıştır ve ayrı ürünlerle verilen talimatların yerine geçmez. Lütfen ürünleri kullanmadan önce her ürünle birlikte sunulan talimatları ve uyarıları dikkatle okuyun.

PermaFlo®
AKIŞKAN KOMPOZİT



1005 PermaFlo Dentin Opaquer

2 x 1,2 ml (2,30 g) şırınga
4 x Micro 20 ga Tip

€ 46

- Yüksek dolduruculu, yüksek akışlı formül
- Yüksek derecede radyoopak
- Florür salan formülasyon
- Üstün parlatılabilir niteliği
- Güçlü ve aşınmaya karşı dirençli

PermaFlo ışıkla sertleşen, radyoopak, metakrilat bazlı bir akışkan kompozittir; 8 tonda mevcuttur. Tikotropik özellikleri materyale adaptasyonun daha iyi olmasını sağlayan ideal akışkanlığı verir. PermaFlo %68 oranında doldurucuya sahip olup, ortalama partikül büyüklüğü 0,7 µm ve film kalınlığı düşüktür.

- Yaygın dişeti çekilmesi için cazip bir çözüm olarak rol oynar
- Hassasiyeti azaltır ve hastanın rahatını artırır

Kullanımlar

PermaFlo Pink kompozit her zaman bir seçenek olmayan dişeti greftlemesi için mükemmel bir alternatiftir. Kök yapısının açığa çıktığı Sınıf V restorasyonlarda maskeleme ajanı olarak kullanılır. Ayrıca dişeti çekilmesini maskelemek için de kullanılır.

PermaFlo® Pink
AKIŞKAN KOMPOZİT




963

PermaFlo Pink Mini Refill


2 x 1,2 ml (2,30 g) şırınga
4 x Micro 20 ga Tip

€ 47

Buzdolabında saklayın.

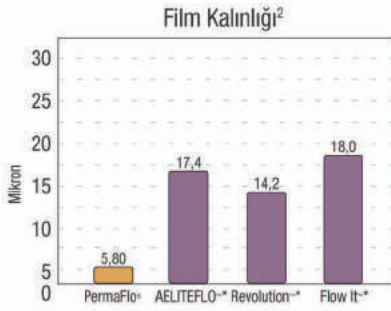

PermaFlo çok düşük film kalınlığı sergiler.

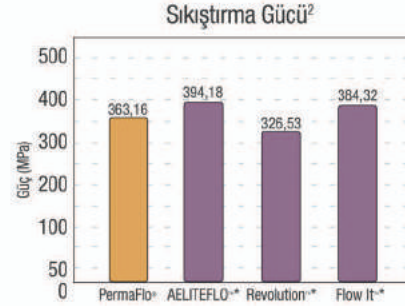

PermaFlo, diğer akışkan kompozitlerle birlikte iyi bir performans gösterir. %68 oranında doldurucu içeren PermaFlo yüksek sıkıştırma gücü gösterir.

Composite Wetting Resin
NEMLENDİRME REZİNİ



3059

Composite Wetting Resin Mini Refill

2 x 1,2 ml (1,85 g) şırınga

€ 49



- Kompozit adaptasyonunu kolaylaştırır
- Polimerizasyonu olumsuz etkilemez
- Konturlama sırasında kuru kompoziti nemlendirir

Composite Wetting Resin %45 dolduruculu, ışıkla sertleşen, sıvı bir rezindir. Solvent içeren ve kompozit polimerizasyonunu inhibe eden tek bileşenli rezinlerden önemli ölçüde üstündür.


Buzdolabında saklayın.

Direkt Kompozit Şablon Sistemi

- Diş anatomisini ve yükseklik, genişlik, anahat, orta bölüm ve orta çizgi oranlarını ideal olarak taklit etmek üzere tasarlanmıştır
- Tek renk kompozit ile çalışmaya olanak verir. Şablonadaki anatomik detaylar öylesine özel ayarlanmıştır ki hızlıca estetik bir son görüntü yaratır. Kompoziti otomatik olarak farklı kalınlıklarda dağıtarak tabakalama tekniğindeki gibi tipik renk efektlerini oluşturur.
- Tıpta kullanılan özel bir plastik malzemeden yapılmıştır
- Polimerizasyon sırasında oksijen inhibisyon tabakasının oluşumunu önler, parlak ve dayanıklı bir yüzey sağlar
- Etkin bir polimerizasyon için ışığın şablondan kompozite geçmesine imkan verir
- Arzu edilen her kompozitle kullanılabilir
- Sertleşmiş kompozitten kolayca ayrılır
- Alkollü bez ile kolayca temizlenip otoklavlanabilir
- Ayarlama çizgisi sayesinde bir veya daha çok dişe pozisyonlandırmak oldukça rahattır

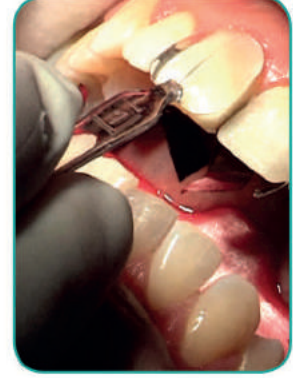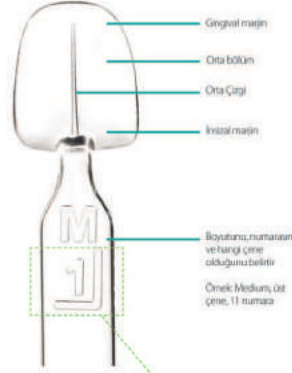

Uveneer Şablonu Tanımlama Sistemi

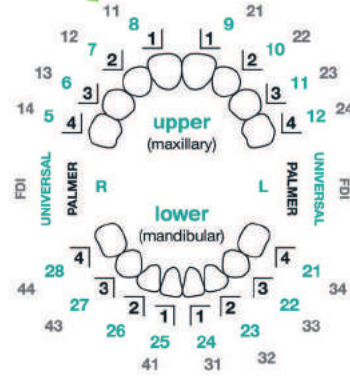

€ 856

Uveneer Sistemi her hastanızın ön dişlerinin anatomisini hızlı ve kolayca yeniden üretebilmeniz için şeffaf şablonlardan komple bir set içermektedir.



Kit içerisinde asorti olarak büyük (LARGE) ve orta boy (MEDIUM) şablonlar bulunmaktadır. Her boy (L ve M) 16 şablon içerir: 8 üst çene ve 8 alt çene için (2 santral, 2 lateral, 2 kanin, 2 premolar). Kit ile toplam 32 tekrar kullanılabilir şablon sunulur.



Kit sahibi olanlar için yedek refil sipariş imkanı sunulmaktadır

Uveneer
dental art made simple

YENİ!



veneer™
dental art made simple

Kolay

Etkili

Estetik



■ İlk ve tek direkt kompozit şablon sistemi ■

Tek yetkili global distribütör: **ULTRADENT**
PRODUCTS, INC.

PermaShade LC

Işıklı Sertleşen Vener Yapıştırma Rezini



5227 Translucent Refill
5228 Opak Beyaz Refill

- Porselen, zirkonya ve kompozitten prefabrik veneerler ve diğer indirekt veneerler için kullanın
- Emsalsiz derecede düşük renk değişimi¹
- Orta seviye viskozite veneerin yerleştikten sonra oynamasını önler

Kullanımlar

PermaShade LC sadece veneerlerin simantasyonu için kullanılan, ışıkla sertleşen bir yapıştırma rezindir. Ergonomik contra-angle şırınga hassas veneerlerin yapıştırılmasını diğer iletim yöntemlerine göre daha rahat hale getirir. Dayanıklı renk stabilitesi ve düşük büzülme sayesinde PermaShade LC, uzun ömürlü, estetik veneerler yaratmak için idealdir.

PermaFlo® DC

DUAL SERTLEŞEN KOMPOZİT SİMANTASYON/RESTORATİF REZİN



PermaFlo DC Refill

5912 A2 Kit 5914 Translucent Kit


1 * 5 ml (9,5 g) PermaFlo DC şırınga
20 * Mixing Tip
20 * Intraoral Tip

€ 82

Teknik Veriler¹

Mineye Shear Bond Gücü (Total-Etch)	53,38 MPa
Dentine Shear Bond Gücü (Total-Etch)	62,07 MPa
Esneklik Gücü	128,5 MPa
Esneklik Modülüsü	9,37 GPa
Sıkıştırma Gücü	355,91 MPa
Sıkıştırma Modülüsü	4,22 GPa

Film Kalınlığı (µm)¹

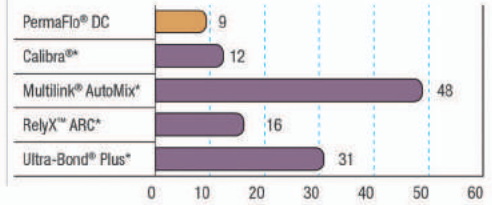

PermaFlo DC rezin, bir kompozit yapıştırma rezini için bilinen en düşük film kalınlığına sahiptir.

PermaFlo DC yapıştırma rezini yüksek oranda doldurucu içeren, küçük partiküllü, dual sertleşen bir rezindir. Bir kompozit yapıştırma rezini için bilinen en düşük film kalınlığına sahiptir: sadece 9 µm. Ağırlıkça %70 oranında yüksek miktarda doldurucu içermesine rağmen, PermaFlo DC yapıştırma rezini küçük delikli Tip içinden kolayca akarak post luting işlemini basit ve rahat bir hale getirir.



PermaFlo DC rezin, endodontik postları simante etmek ve koruyucunun fabrikasyonu için kullanılabilen, dual sertleşen kullanışlı bir rezin formülüne sahiptir.

- Aşınmaya karşı dirençli
- Maksimum güç
- Radyopak
- Düşük polimerizasyon büzülmesi
- Kendinden karıştırmalı
- 2,5 dakika çalışma süresi, 5–8 dakika sertleşme süresi

Peak® Universal Bond
Klorheksidin İçeren (%0,2)
Işıklı Sertleşen Adeziv



- Dentin, mine, porselen, metal, kompozit ve zirkonyaya bağlanır
- Uzun süreli bond gücü sağlayabilecek olan klorheksidin (%0,2) içerir¹⁻³
- Post ve kor işlemlerinin yanı sıra indirekt ve direkt bonding için de idealdir
- Self-etch ve total-etch teknikleriyle çalışır
- Bütün bonding prosedürleri için 2 µm film kalınlığı ve optimum viskozite
- Şırınga veya şişe içinde sunulur

4542 Peak Universal Bond Total-Etch Bottle Kit

1 x 4 ml Peak Universal Bond şişe
4 x 1,2 ml (1,58 g) Ultra-Etch şırınga
40 x Blue Micro tip
50 x Karıştırma kabı
50 x Micro Applicator fırça

€ 77

Buzdolabında saklayın.

Ultra-Blend® plus
LİNER

415 Ultra-Blend plus Kit

2 x 1,2 ml (1,64 g) Ultra-Blend plus Dentin şırınga
2 x 1,2 ml (1,64 g) Ultra-Blend plus Opaque White şırınga
20 x Black Micro Tip
20 x Black Mini Tip

€ 77



416 Ultra-Blend plus Dentin Refill
4 x 1,2 ml (1,64 g) şırınga

€ 64

383 Ultra-Etch Dev Şırınga ASİTLEYİCİ
1' 30 ml (39,60 g) Şırınga



€ 87

- Dentin üzerinde kendinden ırmıtı²
- En küçük fissürlere bile girer ama dikey yüzeyde yayılmaz
- Hassas uygulama
- Temizce durulanır – kalıntı bırakmaz
- İyi görünürlük için koyu mavi renge sahiptir

Ultra-Etch asitleyici %35'lik bir fosforik asit solüsyonudur. İdeal viskoziteye sahip olma özelliği ile birlikte Blue Micro veya Inspiral Brush Tip kullanımı hassas uygulamayı ve üstün kontrolü kolaylaştırır. Asitleme derinliği açısından kendinden limitli (20 saniye asitlemede ortalama 1,9 µm derinlik)² olan Ultra-Etch asitleyici, adezivlerin bond gücünü arttıracak şekilde nüfuz edebileceği bir asitleme formu yaratır. Çalışmalar Ultra-Etch asitleyicinin benzersiz dentin üzerinde kendinden limitli kimyasının rezini alacak optimal bir yüzey yarattığını göstermektedir.³

Ultra-Etch asitleyici visköz yapıda olmasına rağmen, kapiller hareketi destekleyen fiziksel ve kimyasal özellikleri nedeniyle en küçük fissürlere ve oklüzal yüzeylere girebilir. İdeal viskozitesi erken kurumayı önleyecek yeterli kalınlığa sahip bir tabakayı sürdürür.


1016 Ultra-Blend plus Mini Kit Universal

2 x 1,2 ml (1,64 g) Ultra-Blend plus Dentin şırınga
5 x Black Micro Tip


€ 40

Ultra-Blend plus liner, dentin yenilenmesi ve iyileşmesini destekleyen kalsiyum hidroksit ve kalsiyum hidroksiapatit içeren, ışıkla aktive olan, radyopak bir materyaldir. Diğer kavite liner'lara kıyasla, Ultra-Blend plus kaide bütümlenimin minimum ve kalsiyum salımının yüksek olması için yüksek oranda dolduruculudur.


- Biyoaktif Liner ve pulpa kapatma materyali
- Yüksek kalsiyum salımı¹
- Kontrollü, kusursuz şırınga iletimi
- Karıştırma gerektirmez
- Zamanla çözünüp kaybolmaz
- Klinisyen hazır olduğunda ışıkla sertleştirilir
- Radyopak

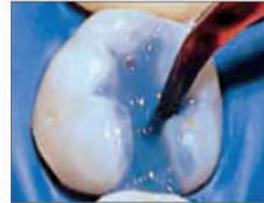

Klinik deneyim ve FE-SEM değerlendirmeleri² hem dentin hem mine üzerinde 20 saniye asitleme süresinin her iki dokuda optimal koşullandırmayı oluşturduğunu göstermektedir. Hava/suyla durulayın. Fazla suyu doku-narak giderip, yüzeyi görünür şekilde ıslak bırakın.

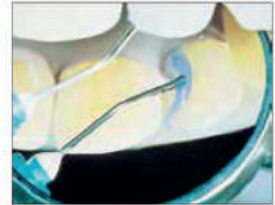

En ince çizgilerde bile kolayca asitleme işlemi yapılabilir. Blue Micro Tip kullanıldığında, Ultra-Etch akmadan lingual bölgeden hassas şekilde uygulanabilir.

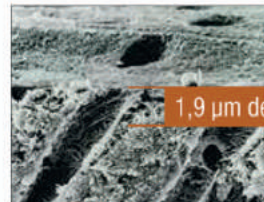

1,9 µm derinlik


Ultra-Etch fosforik asitinin 20 saniyelik asitleme sonucu 1,9 µm ortalama derinlikle asitleme derinliği açısından benzersiz şekilde kendinden limitli olduğu göstermiştir. Sıvı fosforik asit (%37) 20 saniyede ortalama 5,0 µm ve "polimerle kalınlaşmış" rakip bir asitleyici 4,8 µm derinlik göstermiştir.³ Bu daha yüksek asitleme derinliğine sahip asitler optimum düzeyi geçer ve tam olma-yı rezin bağlanması potansiyelini artırır.

ULTRACEM

resin-reinforced glassionomer cement

UltraCem®

REZİNLE GÜÇLENDİRİLMİŞ CAM İYONOMER SİMAN

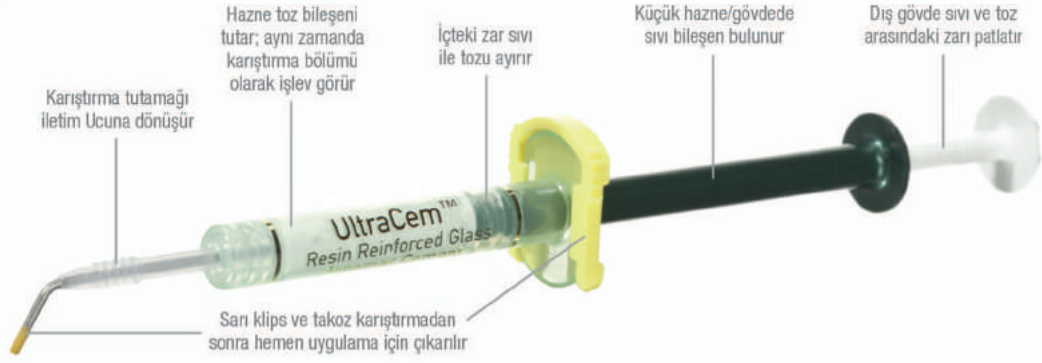

- Kategorisindeki en yüksek bond güçlerine sahiptir
- Uzun süreli florür salımı
- Kırılma riskini azaltmak için dişin doğal karakterine benzeyen esnek yapılar
- Akışkan viskozite ve düşük film kalınlığı uyumu veya oklüzyonu olumsuz etkilemez
- Diş yapısıyla iyonik bond oluşturur
- 1 ila 3 dakika çalışma süresi, 5 dakika sertleşme süresi
- Radyoopasite >1 mm alüminyum

UltraCem rezinle güçlendirilmiş cam iyonomer siman, bir yapıştırma simanı için en iyi iki özelliği gösterir: etkili uygulama ve üstün performans. Geliştirilmiş kimyası kategorisindeki en yüksek bond güçlerine sahiptir ve benzersiz SpeedMix™ şırıngası en üst düzeyde yapıştırma kolaylığı sağlar. UltraCem siman ayrıca klinisyene kullanılan materyalin viskozitesini ve miktarını kontrol etme olanağı veren ekonomik bir seçim olarak, geleneksel elde karıştırılan şişe kiti halinde de mevcuttur.

Kullanımlar

UltraCem rezinle güçlendirilmiş cam iyonomer siman metalden, metal destekli porselenden, zirkonyadan ve rezinden yapılmış indirekt restorasyonlar (inley, onley, kuron ve köprüler dahil) için bir yapıştırma simanı olarak kullanılır. Ayrıca ortodontik bantların mineye simantasyonu için de kullanılabilir.

Yalnızca zirkonya restorasyonlar için preparasyona ovma hareketiyle 10 saniye boyunca Peak® Universal Bond adeziv uygulayın (asitleyici kullanmak gerekmez). Yüzey mat görünene kadar havayla agresif olarak inceltin ve VALO® ışık cihazı ile 10 saniye ışıkla sertleştirin. En iyi sonucu elde etmek için zirkonya protezin iç kısmına kumlama yapın; hava/su spreyi ile temizleyin ve kurutun.

Not: Zirkonyayı temizlemek için kesinlikle fosforik asit kullanmayın çünkü bond güçlerini önemli ölçüde azaltır. UltraCem siman ile birlikte zirkonya primer kullanmayın.

Türünün İlk Örneği!

Tek Şırıngada Karıştırılıp Uygulanan Sıvı ve Toz Siman!
Test edilmiş en güçlü RRGİ/RMGİ.¹

KARŞILAŞTIRMALI TEST¹

	METAL SHEAR BUTTON	KURON ÇEKME	FİLM KALINLIĞI
ULTRACEM®	10,89 MPa	5,22 MPa	24,0 µm
GC FLUOR PLUS™	4,76 MPa	3,91 MPa	17,6 µm
3M RELYX™ LUTING®	5,12 MPa	4,59 MPa	36,9 µm
3M KETAC-CEM™	3,65 MPa	2,27 MPa	25,8 µm

2058

UltraCem SpeedMix Syringe 2 ad
2 x 0,3 g birim doz SpeedMix şırınga

€ 9,5



2056

UltraCem Liquid-Powder Bottle Kit

1 x 15 g toz şişesi
1 x 8,6 ml sıvı şişesi
1 x karıştırma pedi, ölçü kaşığı ve spatül









€ 97



UltraCem® SpeedMix™ Şırınga

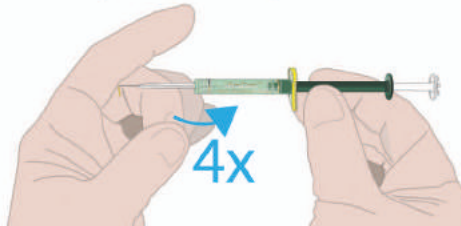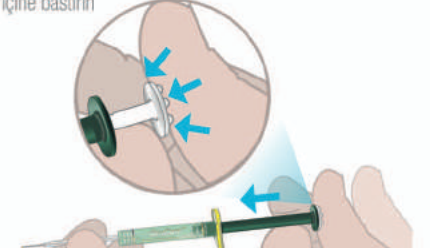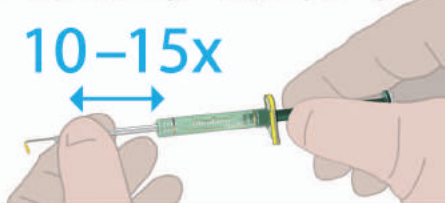- Elde karıştırmaktan daha çabuktur
- Öğütme gerektirmez
- İlave uçlar ve parçalar gerektirmez
- Her zaman tutarlı karıştırma oranı
- Düşük kontaminasyon riski için birim doz iletimi

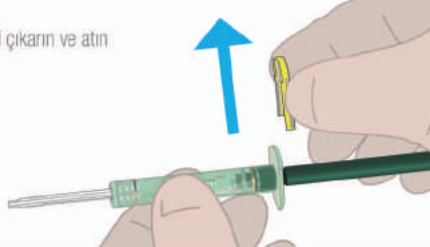Karıştırma, ilave aparatlar ve zaman alıcı öğütme işlemi gerektirmesi nedeniyle her zaman sıvı-toz formundaki RRGİ simanların olumsuz yönü olmuştur. Artık, SpeedMix şırınga olağanüstü sıvı-toz formülünü saniyeler içinde ve etraf dağılmadan etkin biçimde karıştırıyor ve uyguluyor.

<p>1. Tozu kabartmak için hazneye 4 kez hafifçe vurun</p>  <p>4x</p>	<p>2. Sıvı bileşeni toz bölmesine itmek için beyaz gövdeyi sıkıca yeşil gövdenin içine bastırın</p> 
<p>3. Metal çubuğu yerinde bırakın; plastik iletim/karıştırma Tip'ini tutun ve 10 ila 15 kez kuvvetli ileri geri hareketiyle kimyasalı karıştırın</p>  <p>10-15x</p>	<p>4. İletim/karıştırma Tip'ini tamamen uzatın</p> 
<p>5. Metal çubuğu çıkarın ve atın</p> 	<p>6. Sarı klipsi çıkarın ve atın</p> 
<p>7. Materyali proteze aktırın</p> 	 <p>SpeedMix şırınganın hareketini gösteren 30 saniyelik videoyu izleyin! ultradent.com/ultracem</p>



Kapsül aktivatörü gerekmez.



Kapsül karıştırma cihazı gerekmez.



Kapsül tabancası gerekmez.

ExperTemp®



ExperTemp®


GEÇİCİ KURON VE KÖPRÜ MATERYALİ

- Şekillendirmesi kolaydır ve güzel bir şekilde parlatılır (polisaj isteğe bağlıdır)
- Polimerizasyonda düşük oksijen inhibisyon tabakası
- Yüksek abrazyon direnci ve esneklik
- Birçok renkte mevcuttur: A1, A2, A3, A3.5, B1 ve Bleach White
- İntraoral sertleşme süresi yaklaşık 50–110 saniyedir
- Restoratif kompozit, akışkan kompozit veya ilave ExperTemp materyali ile onarılabilir
- Mineye benzeyen fuloresana sahiptir


Kullanımlar

ExperTemp geçici kuron ve köprü materyali geçici kuron, köprü, inley ve onleyler ile uzun süreli geçicilerin fabrikasyonu için kullanılan bis-akril kompozit geçici bir materyaldir. 10:1 oranında kendiliğinden sertleşen kimyasal yapısı çalışmayı kolaylaştırır ve olağanüstü dayanım, esneklik ve abrazyon direnci sağlar. Doğal bir estetik yapıyla birleşen üstün performans, ExperTemp'i temporizasyon için tercih edilen bir materyal yapmaktadır.

Esneklik Modülüsü Karşılaştırması¹

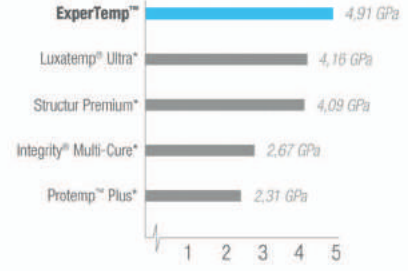

Kenar Kırılma Karşılaştırması¹

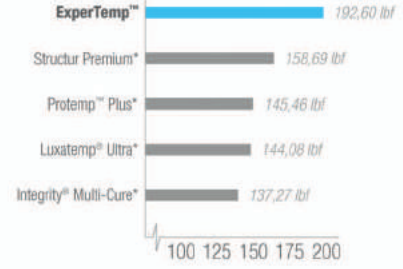

Çalışma süresi ve ağza yerleştirme	Ağız içinde sertleşmesini bekleyin	Ağızdan çıkarın	Tam sertleşme	Geçicileri ayarlayın
0:00	0:40	1:30	2:30	4:00




1. Kuron preparasyonu.



2. Düşük oksijen inhibisyon tabakası.



3. Kolayca kırılır; kompozit gibi kesilir.

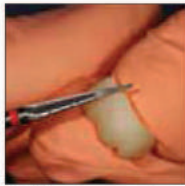

4. Şekillendirme sırasında akrilik frezde bozulmaz.



5. Bis-akril formülü yüksek parlatılabilirliğe olanak sağlar.



6. Geçiciler simante edilir ve yerleştirilir.



7. Elmas polisaj gerektirmez.



8. Geçiciler doğal dentisyona çok benzer.

6341 ExperTemp A1 Kit
6340 ExperTemp A2 Kit

€ 90



Jiffy® Parlaticılar

KAPLAR, DİSKLER VE UÇLAR



- Amelogen Plus gibi kompozitlerde kontur oluşturma, bitirme ve cila için mükemmel
- Lateks içermeyen materyal
- Otoklava girebilir
- 3 farklı grit büyüklüğünde mevcuttur

Kullanımlar

Keskin düzensizlikleri yeşil renkli bir Jiffy Kaba parlaticı ile düzeltin. Sonra küçük düzensizlikleri düzeltmek üzere sarı renkli bir Jiffy Orta parlaticı ile devam edin ve düzgün bir bitiş elde etmek için beyaz renkli bir Jiffy İnce parlaticı veya mavi renkli bir Jiffy HiShine ile bitirin.

848 Jiffy Parlaticı Çeşitleri Paketi

5 x Kap (2 kaba, 2 orta, 1 ince)
5 x Disk (2 kaba, 2 orta, 1 ince)
10 x Uç (4 kaba, 4 orta, 2 ince)

€ 56



	KABA	ORTA	İNCE
Kap 20 ad	890	838	841
Uç 20 ad	892	839	842
Disk 20 ad	891	840	843

20 x Parlaticı

€ 56

Jiffy® Kompozit Parlama Fırçaları


NORMAL VE SIVRI UÇLU



Abraziv yüklü her bir fiberin esnekliği oklüzal düzensizliklerin mükemmel bir biçimde parlatılmasını kolaylaştırır.



- Her lif binlerce silikon karbid parlaticı partikül içerir
- Kompozit veya porselenlerin oklüzal yüzeylerine erişin ve parlatın
- Kompozit polisajı için düşük hızlı bir angldruvada, sıkı basınç ve yüksek RPM (5.000-10.000) ile liflere "kamçı" hareketi yaptırın
- Bütünlük sınırlı sayıda otoklav sterilizasyonu boyunca korunur

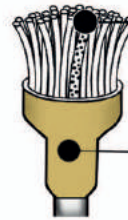

1 Her lif binlerce silikon karbid parlaticı partikül içerir. Özel fiberlere abraziv silikon karbid partikülleri emdirilmiştir.

2 Altın gövdeleriyle kolayca tanınabilirler.

850 Jiffy Normal Fırça

1009 Jiffy Sivri Uçlu Fırça

10 x Fırça

€ 97



Ultradent® Diamond Polish Mint

ELMAS POLİSAJ PATİ



- Yüksek nitelikli beyaz mikrokristal elmas partikülleri
- Rakipsiz estetik polisaj
- Porselen veya kompozit restorasyonlar için idealdir
- Jiffy fırçalar ve keçe disklerle kullanılır

5540 Ultradent Diamond Polish Mint 0,5 µm Mini Refill
5541 Ultradent Diamond Polish Mint 1 µm Mini Refill
2 x 1,2 ml (1,40 g) şırınga

€ 43

DeOx®

VİSKOZ OKSİJEN BARIYERİ SOLÜSYONU



- Oksijen inhibisyon tabakası oluşumunu önler
- Kolay materyal iletimi sağlar

DeOx bariyer solüsyonu, polimerizasyon sırasında rezin materyallerin yüzeyinde bir oksijen inhibisyon tabakası oluşmasını önlemek için tasarlanmış olan viskoz ve gliserin bazlı bir jeldir.



Yapıştırma rezini içeren veneer yerleştirilir. Sertleştirmeden önce fazla rezin kenardan alınır. Kenarların üzeri burada gösterildiği şekilde DeOx bariyer solüsyonu ile kaplanır. Sonuç: Yapıştırma rezini yüzeyinin kenarlarında oksijen inhibisyonu gerçekleşmez, kenarlarda erozyon olmaz.

238 DeOx Refill
4 x 1,2 ml (1,51 g) şırınga

€ 20



PermaSeal®

PENETRAN KOMPOZİT YÜZEY ÖRTÜCÜ



- Kompozite ve asitleme yapılmış mine üzerine bağlanır
- Mikroçatlakları örter ve restorasyonları güçlendirir
- Kompozit restorasyonları korur ve tekrar canlandırır

PermaSeal kompozit yüzey örtücü ışıkla sertleşen, metakrilat bazlı, dolgunsuz bir rezindir. Düşük viskozitesi mükemmel penetrasyon sağlar ve ultra ince tabaka oklüzal uyumlama ihtiyacını en aza indirir.

Kullanımlar

PermaSeal kompozit yüzey örtücü, polisaj işlemi sırasında oluşan boşlukları ve düzensizlikleri örterek lekelenme ve aşınmayı en aza indirir. Mikrosızıntıyı azaltmak için Sınıf V kompozit kenarlar üzerine yerleştirin.² Rezin geçicilerde parlak bir görünüm sağlamak için ışıkla sertleştirmeden önce PermaSeal yüzey örtücüyü DeOx® bariyer solüsyonu ile kapatın. PermaSeal yüzey örtücü kompozit tipi geçici restorasyonlara iyi bağlanır ve eski kompozitleri tekrar canlı hale getirmek için de kullanılabilir.

PrimaDry® kurutma ajanı ideal olarak PermaSeal penetran yüzey örtücü yerleştirildikten hemen önce kurur. Koruma/Hijyen bölümüne bakınız.



Geçici yüzeyi düzleştirin. Yüzeyle PermaSeal kompozit yüzey örtücü sürün, havayla hafifçe inceltin, DeOx bariyer solüsyonu ile kaplayın ve ışıkla 20 saniye sertleştirin.

Yeni Restorasyonlar



Önce Peak® Universal Bond adeziv ve kompozit ile düzeltilecek interproksimal boşluklar ve hafif rotasyonlar.



Restorasyon ve polisajdan sonra 5 saniye süreyle asitleme yapın ve kompoziti örtmek ve parlak bir bitiş oluşturmak için PermaSeal uygulayın.

Mevcut Restorasyonlar



Mevcut kompozit restorasyonları ve komşu mine yüzeyini daima ConsepSis Scrub pat, ponza veya bir microetcher kullanarak temizleyin. Durulayın ve 20 saniye asitleme yapın. İyice durulayın ve hava ile kurutun.



Dört yıllık bağlanmış kompozitin PermaSeal kompozit yüzey örtücü ile tedavisinden sonraki görünümü.

631

PermaSeal Kit

4 x 1,2 ml (1,30 g) şırınga
10 x Black Micro FX Tips

€ 64

Buzdolabında saklayın.



1013

PermaSeal Mini Kit

2 x 1,2 ml (1,30 g) şırınga
10 x Black Micro FX Tips

€ 40

Buzdolabında saklayın.



VALO[®]

CORDLESS

LED POLİMERİZASYON CİHAZI





LiFePO₄ Piller

- Ultra yüksek enerjili geniş bantlı LED'ler tüm dental materyalleri sertleştirir
- Optimum iletilen ışın demeti tam ve homojen bir polimerizasyon sağlar
- Maksimum kullanılabilirlik için üç polimerizasyon modu – Standart, Yüksek Güç ve Xtra Güç
- Son derece dayanıklı, ince, ergonomik şekli tüm restorasyon alanlarına benzeri görülmemiş erişim olanağı verir
- Çevre dostu, güvenli, ucuz, şarj edilebilir pillerle çalışır
- Yüksek verimli LED'ler ve havacılıkta kullanılan alüminyum çubuk gövdesini dokunabilecek serinlikte tutar

Kullanımlar

VALO Cordless LED ışık cihazı, ışıkla sertleşen tüm dental materyalleri polimerize edecek kapasitede, 395–480 nm arasında yüksek şiddetli ışık üreten özel, geniş dalga boylu ışık yayan bir diyot (LED) kullanır. Bu ışık şiddeti porselene de penetre eder ve kaliteli bir halojen ışığa yakışır şekilde altına yatan rezin simanları da sertleştirme kapasitesine sahiptir. VALO Cordless ışık cihazı, VALO şarj edilebilir piller ile 100 ila 240 voltluk prizlere uygun pil şarj cihazı kullanır. Cihaz standart bir dental ünit braketinde duracak şekilde tasarlanmıştır veya kitin içindeki braket kullanmak suretiyle özel bir dayanak yapılabilir. Ayrıca tezgah üstünde veya bir çekmece de muhafaza edilebilir. VALO Cordless ışık cihazı ışığın hareketlerini kaydeden bir sensöre sahiptir; ışık kullanılmadığında, VALO Cordless ışık cihazı otomatik olarak uyku moduna geçer ve hareket ettirildiğinde en son kullanılmış olduğu ayara geri döner.

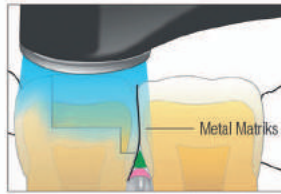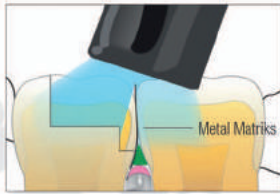

- | | | |
|------|-------------------------------|--|
| 5941 | VALO Cordless Kit – Siyah | |
| 5943 | VALO Cordless Kit – Altın | |
| 5944 | VALO Cordless Kit – Grafit | |
| 5945 | VALO Cordless Kit – Fuşya | |
| 5946 | VALO Cordless Kit – Camgöbeği | |

1 x VALO Kablosuz LED cihazı

4 x Şarj edilebilir pil

1 x Pil şarj cihazı

1 x Şarj ünitesi güç kaynağı

1 x Cihaz braket tutucu

1 x VALO Kablosuz Işık Koruyucu

50 x Barrier sleeve



- | | | |
|------|--|--|
| 5961 | VALO Cordless Şarj Ünitesi Güç Kaynağı | |
| | 1 adet | |

- | | | |
|------|--------------------------------|--|
| 5962 | VALO Cordless Pil Şarj Ünitesi | |
| | 1 adet | |

- | | | |
|------|--------------------------------------|--|
| 5963 | VALO Cordless Şarj Edilebilir Piller | |
| | 2 adet | |

- | | | |
|------|-------------------------------|--|
| 5964 | VALO Cordless Barrier Sleeves | |
| | 500 adet | |

- | | | |
|------|-----------------------------|--|
| 5929 | VALO Cordless Işık Koruyucu | |
| | 1 adet | |

€ 1364

VALO®

VALO®
LED POLİMERİZASYON CİHAZI



- Ultra yüksek enerjili geniş bantlı LED'ler tüm dental materyalleri sertleştirir
- Optimum iletilen ışın demeti tam ve homojen bir polimerizasyon sağlar
- Üç sertleştirme seçeneği – Standart, Yüksek güç ve Xtra güç – kolaylık ve seneklik sunar
- İnce, ergonomik şekli tüm restorasyon alanlarına benzeri görülmemiş erişim olanağı verir
- Eşsiz tek gövdeli tasarım hem son derece dayanıklı hem hafiftir

Kullanımlar

VALO LED ışık cihazı, ışıkla sertleşen tüm dental materyalleri polimerize edecek kapasitede, 395–480 nm arasında yüksek şiddetli ışık üreten özel, geniş dalga boylu ışık yayan bir diyot (LED) kullanır. Bu ışık şiddeti porselene de penetre eder ve kaliteli bir halojen ışığa yakışır şekilde altta yatan rezin simanları da sertleştirme kapasitesine sahiptir. VALO ışık cihazı tıbbi derecede, uluslararası bir güç kaynağına sahiptir ve 100 ila 240 voltluk prizlere uygundur. Cihaz standart bir dental ünit braketinde duracak şekilde tasarlanmıştır veya kitin içindeki braketi kullanmak suretiyle özel bir dayanak yapılabilir.


€ 1154



60° ışık kılavuzu açısı ağızın çok fazla açılmasına sebep olur ve çoğu kez ışığın preparasyonun tüm cephelerine ulaşmasını imkansızlaştırır.



VALO® ışık cihazının ince başı tüm polimerizasyon alanlarına kolay ve doğrudan erişim olanağı sağlar.

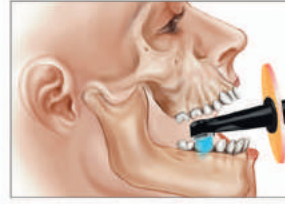

VALO® ışık cihazının yassı tasarımı küçük ağızlarda bile ulaşılması güç alanlara ulaşır.



Rakip ışık cihazları TME veya yumuşak dokuların aşırı gerilmesine sebep olabilir.

5919

VALO Kit

- 1 x VALO LED sertleştirme ışığı – 2,13 m kablo
- 1 x Universal fişli güç kaynağı – 1,83 m kablo
- 1 x Cihaz braket tutucu
- 1 x Işık koruyucu
- 50 x VALO barrier sleeve



5930

VALO Güç Kaynağı

1,83 m kablo



5932

Barrier Sleeves

500 adet



5935

Işık Koruyucu

1 adet



VALO® ve VALO® Cordless

AKSESUARLAR



PointCure™ Lens



Küçük kompozitlerin noktasal sertleştirilmesi veya veneerlerin sabitleme sertleştirilmesi için saydam lensler,

5934 PointCure Lens
2 x Lens

€ 44



EndoGuide™ Lens




Apikal retrodolgu ve diğer dar oyuklar için özel lens.

5938 EndoGuide Lens
2 x Lens

€ 44



ProxiCure™
Ball Lenses

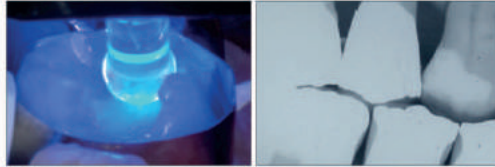


ProxiCure Ball lens konveks proksimal kontakların oluşturulmasını kolaylaştırır. Ölçü ikinci bir basamakta kolayca doldurulur. ProxiCure Ball lensi bandın interproksimal duvarına dayayın; kompozitin içine batırmayın.

5936 ProxiCure Ball Lenses
2 x Lens (1 büyük/1 küçük)

€ 44



TransLume™ Lenses
Yeşil ve Turuncu

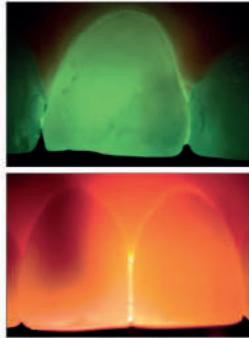

Yeşil lens çatlakları ve yüzey altındaki değişiklikleri bulmak ve göstermekte yardımcıdır.


Turuncu lensin penetrasyon özelliği postlar veya dahili kabarcıkların oluşturduğu ışık engellemesini gösterir.

5937 TransLume Lenses
2 x Lens (1 turuncu/1 yeşil)

€ 44



Black Light Lens

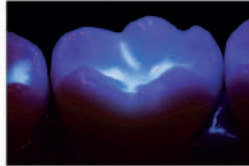

Black Light lensi doğal mireden kolayca ayırt edilmesi için rezin içindeki floresan partiküllerini saptamakta kullanılır.

5939 Black Light Lens
1 x Lens

€ 49



Lensler tekrar kullanılabilir olup, orta düzey bir dezenfektanla dezenfekte edilmelidir.

Montaj braketini VALO ve VALO Cordless ışık cihazları için kullanılabilir ve herhangi bir yüzeye monte edilebilir.

1667 Mounting Bracket
1 x Braket

€ 13

GEMINI®
810 + 980 DIODE LASER

Gemini®

810 + 980 DİYOT LASER

— yeni




- Hızlı ve düzgün kesim için 20 watt'lık azami süper atımlı kapasite
- Çift dalgaboyu teknolojisi 810 nm dalgaboyundaki optimum melanin absorpsiyonu ile 980 nm dalgaboyundaki optimum su absorpsiyonunu birleştirir
- Uç aydınlatması cerrahi bölgede daha iyi görünebilirlik sağlar
- İnce, yenilikçi tasarım olağanüstü net, elektrikli ışıldayan görüntü sağlama özelliğine sahiptir
- Basit kullanıcı arayüzü ve önceden belirlenmiş 19 uygulama kullanım kolaylığını artırır
- Kablosuz ayak pedali ve pil ile çalışma, klinikten kliniğe kolay taşınmasına olanak verir
- Prosedürler arasında sterilizasyon kolaylığı sağlayan otoklavlanabilir el aleti
- ABD'de tasarlanmış ve ABD'de üretilmiş parçalar ve ithal parçalarla montajlanmıştır

Gemini 810 + 980 diyet laser 20 watt'lık azami süper darbeli kapasite ve olağanüstü net, elektrikli ışıldayan görüntü sağlama özelliklerine sahip olan çift dalgaboylu bir yumuşak doku diyet laseridir. Uygulanan prosedür ne olursa olsun yenilikçi Gemini laser prosedürü hızlı, düzgün ve verimli hale getirir.



Diyot Laser Azami Kapasite Karşılaştırması¹

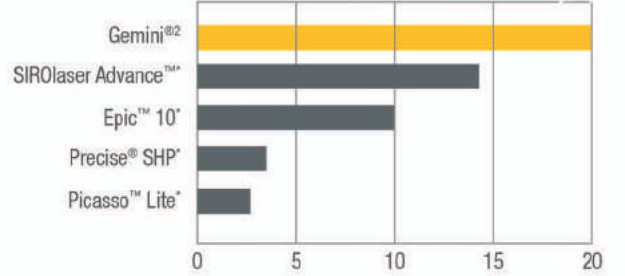

8990 Gemini Laser Kit

- 1 x Güç kaynağı
- 1 x Ayak pedali
- 1 x El aleti
- 10 x 5 mm uç
- 3 x Emniyet gözlüğü seti



€ 9,990

8991 Gemini Power Supply

- 1 x Güç kaynağı



8992 Gemini Foot Pedal

- 1 x Ayak pedali



8993 Gemini 5 mm Pre-Initiated Tip

- 25 x 5 mm uç

8994 Gemini 7 mm Uninitiated Tip

- 25 x 7 mm uç



8995 Gemini Safety Glasses

- 1 x Emniyet gözlüğü



8996 Handpiece Shell

- 1 x El aleti kabı



EndoREZ®
KANAL MÜHÜRLEYİCİ



5900 EndoREZ Kit
1 x 5 ml (8,15 g) çift hazneli şırınga
20 x Mixing tip

€ 106

Buzdolabında saklayın.

- Dünyanın ilk hidrofilik ve kendinden primerli rezin doldurucusu
- Daha kısa sürede daha etkili obtürasyon
- Tam, kusursuz dolum sağlar²
- Gutta perka ile aynı radyoopasiteye sahiptir
- Resin bazlı kor/kompozit materyallere bağlanır
- Gutta perka ile kombine edildiğinde tekrar işlem görebilir³
- Apikal üçte bire şırınga ile iletim sağlar

UltraCal® XS

%30-%35 KALSİYUM HİDROKSİT PATİ



Certified
GF
Gluten-Free

NaviTip 29 ga

- Radyoopak
- Yüksek pH değeri
- Üstün iletim kontrolü

UltraCal XS kalsiyum hidroksit patı, hem şulu hem radyoopak olan benzersiz formüle sahip, pH değeri yüksek (12,5) bir patıdır. Doğrudan yerleştirmeyi mümkün kılan, öngörülebilir bir akış için büyük 29 ga NaviTip kullanılması tavsiye edilir. UltraCal XS pat, Ultradent Citric Acid ve bir NaviTip® FX® kullanılarak kanaldan tamamen çıkarılabilir.

Kalsiyum hidroksitle seanslar arası bir ilaçlama yapılan iki seanslı protokol, tek seanslı bir protokole kıyasla kök kanal sisteminin mikrobiyolojik durumunun daha iyi olması sonucunu vermiştir.¹

1024 UltraCal XS Mini Kit 2'li

€ 26

1027 UltraCal XS Kit
4 x 1,2 ml (1,76 g) şırınga
20 x NaviTip
(Çeşitli 29 ga – her uzunluktan 5 ad)

€ 66

606 UltraCal XS Refill
4 x 1,2 ml (1,76 g) şırınga

€ 43

Ultradent® Citric Acid 20% Solution

Certified
GF
Gluten-Free



NaviTip FX 30 ga

- Hazırlanmış kök kanallarında temizlik/bakım için önerilir
- Mineral ve smear tabakalarını çıkarır
- Hafif viskoz formülü lubrikasyonu kolaylaştırır

Ultradent Citric Acid kanallardan kalsiyum hidroksitin (örn. UltraCal XS) çözülmesi/temizlenmesinde etkili olan hafif asidik bir materyaldir. Ayrıca dentinal duvarlardan smear tabakasının çıkarılması için temizleyici/bakım yapıcı olarak da önerilir. NaviTip ve NaviTip FX ile uygulayın.



UltraCal XS ve Citric Acid ile ilgili kısa bir video izlemek için görüntüleyin.

329 Citric Acid IndiSpense Syringe
1 x 30 ml (31,26 g) şırınga

€ 27



UniCore®

POST VE DRILL SİSTEMİ

- Üstün dayanıklılık
- Estetik ve radyopak
- Renk eşleştirmeli driller ve postlar
- Ambalajlandığı şekilde otoklava girebilir
- Ultradent'in UniCore "Kit of Kits" sistemi post için gereken tüm öğeleri sunar

UniCore postlar cam fiberlerden yapılmıştır. Translüsün ve radyopak UniCore Post, restorasyonun dayanıklılığından taviz vermeksizin, sıkıştırma kuvvetlerine dentinin göstereceği gibi karşılık verir. UniCore Postun hafif konik yapısı dişin doğal anatomisine uyum gösterir ve UniCore Drill'in oluşturduğu post boşluğuna mükemmel uyar. UniCore Postların beş boyut ve rengi UniCore Drill'inkilerle eşleşir. UniCore Drill obtüratörleri çıkararak posta mükemmel uyan bir post bölmesi hazırlamakta benzersiz bir yeteneğe sahiptir. UniCore drill fiber postların, rijit taşıyıcıların ve geleneksel gutta perkaların çıkarılmasını kolaylaştıran, patentli bir ısı üreten uca sahiptir. Drill'in ısı yayan elmas kaplı kısmı diş yapısını korur ve özel olarak tasarlanmış oyukları kanal duvarını dikey değil lateral olarak keser.



UniCore Drill Ultra Güvenli

- Dayanıklı drill 15 kullanıma kadar gutta perka veya rijit taşıyıcıların çıkarılmasında ve beş kullanıma kadar önceden mevcut fiber postların çıkarılmasında kullanılabilir
- Driller ve postlar diş hekimli koltuğunda kullanılmayı basitleştirecek şekilde büyüklüğe göre renk kodludur
- Patentli elmas kaplı kısım erişim açıklıklarında bağlanmayı önler
- Eşsiz tasarımı oyukları kalınlıkların kanaldan hızlı ve tutarlı bir şekilde çıkarılmasını garanti eder
- Isı oluşturan uç tüm obtüratör çıkarma işlemlerini kolaylaştırır

UniCore Post Önceden stres uygulanmış fiberler ve bağlanabilir

- Mikroporöz yüzey mikromekanik retansiyon sağlar
- Diş hekimli koltuğunda kimyasal tedavi gerekmez
- En yüksek ISO standardı ötesinde radyopaktır
- Translüsün post işiği preparasyonun tam derinliği boyunca iletir
- Hafif konik tasarım dişin doğal anatomisini izler
- Tekrar endodontik tedavi gerekirse kolayca çıkarılabilir

Radyoopasite Karşılaştırması



UniCore post önde gelen rakip bir üründen farkedilebilir derecede daha radyopak.

	Boyut 0	Boyut 1	Boyut 2	Boyut 3	Boyut 4
Apikal Ø	0,6 mm	0,8 mm	1,0 mm	1,2 mm	1,5 mm
Koronal Ø	1,0 mm	1,15 mm	1,35 mm	1,55 mm	1,75 mm
Konik	2,1°	1,8°	1,8°	1,8°	1,3°
Uzunluk	19 mm	19 mm	19 mm	19 mm	19 mm
Fiziksel Özellikler		UniCore quartz fiber post			
Esneleme elastisite modülüsü (GPa)		43-44			
Esneklik gücü (MPa)		1.500-1.600			
Gerilme gücü (MPa)		1.200			
30° değerde esneklik modülüsü (MPa)		13 (dentine benzer)			
İnterlaminat kırılma gücü (MPa)		70-80			

7132

UniCore Starter Kit

2 x Matkap (1 ve 2 boylarından 1'er ad)
10 x Post (1 ve 2 boylarından 5'er ad)

€ 125



7120

UniCore Kit "Kit of Kits"

4 x Matkap (1-4 boylarından 1'er ad)
20 x Post (1-4 boylarından 5'er ad)

€ 253



Refill

- Boyut 0 (0,6 mm) – Beyaz
- Boyut 1 (0,8 mm) – Sarı
- Boyut 2 (1,0 mm) – Kırmızı
- Boyut 3 (1,2 mm) – Mavi
- Boyut 4 (1,5 mm) – Yeşil

Matkap

- 7134
- 7121
- 7122
- 7123
- 7124

1 x Matkap

Post

- 7135
- 7125
- 7126
- 7127
- 7128

5 x Post

€ 22

€ 46

Endo-Eze® Tips

Şunlar için tasarlanmıştır: Yapıştırma materyalleri ve hava/su uygulama.

Şunlarla kullanılır: Ultradent şiringaları.

- Çeşitli endodontik işlemlerde kullanılır
- Çeşitli boyutlarda esnek ve güçlü kanülle birlikte sunulur
- Kolayca bükülür



20 ad	100 ad	Gauge – Çap
345	1428	18 ga – 1,25 mm
346	1429	19 ga – 1,06 mm
347	1430	20 ga – 0,90 mm
348	1431	22 ga – 0,70 mm
350	€ 60	30 ga – 0,30 mm
349	€ 18	31 ga – 0,28 mm

Endo-Eze® Irrigator Tip

Şunun için tasarlanmıştır: Ultradent 5 ml şiringa.

- Kimyasalların apeksten taşma riski olmaksızın ideal iletilmelerini sağlar
- Eşsiz tıkanma önleyici uçlu, esnek ve küt bir kanüle sahiptir
- 27 ga (Ø 0,40 mm) Uç



207	20 adet
	€ 13

Inspiral® Brush Tip

Şunlar için tasarlanmıştır: Composite Wetting Resin, Peak Universal Bond, PermaQuick, PQ1, Ultradent® Porcelain Etch, Ultra-Etch, UltraSeal XT plus ve UltraSeal XT hydro.

- Viskoz veya doldurucu materyalleri dahili bir helikal kanal ve yükselti vasıtasıyla pürüzsüzce iletir
- Sıkı, ayarlanabilir fırça fiberleri kabarcıkları en aza indirir
- Ø 1,07 mm Uç



710	20 adet	€ 19
123	100 adet	€ 75
1033	500 adet	€ 317

Capillary Tip

Endodontik kanallarda nemin giderilmesi için Ultradent® Luer Vakum Adaptöre takın.

- Kanalları boşaltır ve paper point kullanımını en aza indirir
- Dar, esnek taper'lı eğimli kanallara ulaşır
- Ø 0,36 mm Uç



341	20 adet	€ 14
3099	50 adet	€ 29

Capillary Tip

Endodontik kanallarda nemin giderilmesi için Ultradent® Luer Vakum Adaptöre takın.

- Kanalları boşaltır ve paper point kullanımını en aza indirir
- Dar, esnek taper'lı eğimli kanallara ulaşır
- Ø 0,48 mm Uç



186	20 adet	€ 14
1425	50 adet	€ 48

Uçlar ve Şiringalar

Intraoral Tip

Şunun için tasarlanmıştır: PermaFlo DC.

- Hassas uygulama olanağı sağlar
- Çift hazneli karıştırma uçlarına bağlanır
- Ø 0,50 mm Uç



5922 20 adet
€ 10

Metal Dento-Infusor® Tip

Şunlar için tasarlanmıştır: Astringedent, Astringedent X, ViscoStat ve ViscoStat Clear.



- Hemostatik ajanları kusursuz şekilde uygular ve yüzeysel pıhtıyı etkin biçimde uzaklaştırır
- Fırça takviyeli küt, eğri kanül sulkus üzerine hafif bir basınç uygulanmasını sağlar
- Ultradent'in ilk ucu olan "MDI" doku düzenlemenin başarılı olması için hala en önemli uç olmaya devam etmektedir
- 19 ga (Ø 1,06 mm) Uç



LOK-TITE

2558 20 adet
€ 17

2559 100 adet
€ 69

2560 500 adet
€ 298

Micro 20 ga Tip

Şunlar için tasarlanmıştır: PermaFlo, PermaFlo Pink, OpalDam ve OpalDam Green.

- Büyük gauge'li kanül sürekli akış sağlar
- Standart akışkan kompozit iletim ucu
- 20 ga (Ø 0,90 mm) Uç



LOK-TITE

1168 20 adet
€ 10

1252 100 adet
€ 39

1437 500 adet
€ 175

Micro 20 ga FX® Tip

Şunun için tasarlanmıştır: Opalescence Boost.

- Standart akışkan iletim ucu
- Çıkıntılı fiberler materyali tüm yüzeye eşit biçimde uygulamak için yayılır
- 20 ga (Ø 0,90 mm) Uç



LOK-TITE

1490 20 adet
€ 11

1405 100 adet
€ 48

1406 500 adet
€ 204

NaviTip® 31 ga İki Yan Portlu Irrigator Tip

Şunlar için tasarlanmıştır: Ultradent® EDTA 18% Solution ve Ultradent® Citric Acid 20% Solution.

- İki yan port irrigantı güvenli bir şekilde iletir, kimyasalların apeksten taşıma olasılığını en aza indirir
- Dünyanın en küçük kanüllerinden biri en karmaşık kanal boşluklarında gezer
- 21 mm Uç uzunluğu
- 31 ga (Ø 0,28 mm) Uç



LOK-TITE

5121 21 mm – 20 adet

€ 40

5122 21 mm – 50 adet

€ 89

NaviTip® 31 ga İki Yan Portlu Irrigator Tip

Şunlar için tasarlanmıştır: Ultradent® EDTA 18% Solution ve Ultradent® Citric Acid 20% Solution.

- İki yan port irrigantı güvenli bir şekilde iletir, kimyasalların apeksten taşıma olasılığını en aza indirir
- Dünyanın en küçük kanüllerinden biri en karmaşık kanal boşluklarında gezer
- 27 mm Uç uzunluğu
- 31 ga (Ø 0,28 mm) Uç



LOK-TITE

5123 27 mm – 20 adet

€ 40

5124 27 mm – 50 adet

€ 89

NaviTip® FX® Tip

Şunlar için tasarlanmıştır: Ultradent® Citric Acid 20% Solution ve bonded post işlemi sırasında Peak SE.

- Türünün tek örneği olan fırça aynı anda temizler, ovar ve irrigasyon yapar
- Rijit 30 ga (Ø 0,30 mm) kanül
- 17 mm Uç uzunluğu



LOK-TITE

Önemli bir bağımsız araştırma enstitüsü tarafından "MÜKEMMEL" ürün olarak listelenmiştir.¹

1452 17 mm – 20 adet

€ 45

NaviTip® FX® Tip

Şunlar için tasarlanmıştır: Ultradent® Citric Acid 20% Solution ve bonded post işlemi sırasında Peak SE.

- Türünün tek örneği olan fırça aynı anda temizler, ovar ve irrigasyon yapar
- Rijit 30 ga (Ø 0,30 mm) kanül
- 25 mm Uç uzunluğu



LOK-TITE

Önemli bir bağımsız araştırma enstitüsü tarafından "MÜKEMMEL" ürün olarak listelenmiştir.¹

1454 25 mm – 20 adet

€ 45

¹ Clinical Research Associates Newsletter, Volume 29, Issue 1, January 2005.

SoftEZ® Tip

Şunun için tasarlanmıştır: Enamelast.

- Uç fiberleri görülebilir, kontrollü materyal iletimi sağlar
- Fırça fiberleri yumuşak uygulamaya olanak sağlar



LOK-TITE

4712 50 adet

€ 50

4711 100 adet

€ 95

Uçlar ve Şiringalar

Micro Capillary™ Tip

Şunlar için tasarlanmıştır: perio materyaller, endodontik ve Ultradent® Luer Vakum Adaptörü.

- Parlak rengi sayesinde yumuşak dokuların yanında kolayca fark edilir
- Dünyanın en küçük kalıplanmış ucudur (iç çapı: 0,20 mm)
- 5 mm Uç uzunluğu
- Ø 0,40 mm Uç



LOK-TITE

1120 20 adet

€ 14

Micro Capillary™ Tip

Şunlar için tasarlanmıştır: perio materyaller, endodontik ve Ultradent® Luer Vakum Adaptörü.

- Parlak rengi sayesinde yumuşak dokuların yanında kolayca fark edilir
- Dünyanın en küçük kalıplanmış ucudur (iç çapı: 0,20 mm)
- 10 mm Uç uzunluğu
- Ø 0,40 mm Uç



LOK-TITE

1121 20 adet

€ 14

NaviTip® Tips

29 ga pat materyallerin iletimi için tasarlanmıştır: EndoREZ, UltraCal XS
30 ga solüsyonları/jellerin iletimi için tasarlanmıştır: File-Eze, Ultradent® EDTA 18% Solution ve Ultradent® Citric Acid 20% Solution

- Apekte kontrollü iletim sağlar
- Esnek, paslanmaz çelik kanül eğimli kanallarda kolayca gezinir
- Şu ölçülerde mevcuttur: 17 mm, 21 mm, 25 mm ve 27 mm uzunluk ve 29 ga (Ø 0,33 mm) veya 30 ga (Ø 0,30 mm) kanül



LOK-TITE

20 adet	29 ga	30 ga
27 mm – Yeşil	5115	1354
25 mm – Mavi	5114	1250
21 mm – Sarı	5113	1349
17 mm – Beyaz	5112	1249
Çeşitli	5116	1351

€ 40

50 adet	29 ga	30 ga
27 mm – Yeşil	1377	1424
25 mm – Mavi	1376	1423
21 mm – Sarı	1374	1422
17 mm – Beyaz	1378	1421
Çeşitli	1379	3319

€ 79

Uçlar ve Şırıngalar

SST™ – Surgical Suction Tip

Şunlar için tasarlanmıştır: Küçük periodontik ve endodontik cerrahilerde Ultradent'in Luer Vakum Adaptörüyle kullanılmak ve Opalescence Boost'un kontrollü emilimi.

- Hassas cerrahi işlemler için idealdir
- Büyük çaplı uç açıklığı
- Ø 2,60 mm Uç



LOK-TITE

1248 20 adet

€ 13

ExperTemp® Mixing Tip

Şunun için tasarlanmıştır: ExperTemp.

- Tek işlemde karıştırır ve iletir



6346 45 adet

€ 38

Ultradent® Mixing Tip

Şunlar için tasarlanmıştır: UltraTemp REZ, UltraTemp, EndoREZ ve PermaFlo DC.

- Tek işlemde karıştırır ve iletir



5920 20 adet

€ 19

White Mac™ Tip

Şunlar için tasarlanmıştır: OraSeal Caulking, OraSeal Putty, Consepsis Scrub ve Opalustre.

- Büyük hacimlerin aktarımı içindir
- Tamamı plastik iletim ucu
- Kolay intraoral iletim için daha büyük çap
- Ø 2,00 mm Uç



661 20 adet

€ 10

1361 100 adet

€ 42

White Mini™ Laser Tip

Şunlar için tasarlanmıştır: OraSeal Caulking, OraSeal Putty, Consepsis Scrub ve Opalustre.

- Büyük hacimlerin aktarımı içindir
- Tamamı plastik iletim ucu
- Büyük gauge viskoz kimyasalları kolayca aktarır
- Ø 1,07 mm Uç



1247 20 adet

€ 10

Luer Lock Kapak

Şunlar için tasarlanmıştır: Tüm Ultradent plastik şırıngalar.

- Kanatlı, polipropilen, plastik luer lock kapak
- Klinikte doldurulan şırıngaları kapatmak için kullanın



204 20 ad – Siyah
205 20 ad – Beyaz

€ 10

Skini Syringe

Şunlar için tasarlanmıştır: EndoREZ ve PermaFlo DC.

- Pistona uygulanan düşük bir güç şırınga içinde basınç yaratır ve apikal iletimin daha hassas olması sağlanır
- Düşük atık miktarı
- İçerik: 0,5 ml



1680 20 adet

€ 17

1681 50 adet

€ 38

1,2 ml Şırınga

Şunlar için tasarlanmıştır: Tüm 30 ml IndiSpense şırıngalar.

- Sıkı Luer Lock yivler uçların çıkmasını önler



124 20 adet

€ 10

157 100 adet

€ 42

ViscoStat® Boş Şırınga

Şunlar için tasarlanmıştır: ViscoStat, ViscoStat Clear, Astringedent ve Astringedent X materyallerinin 30 ml IndiSpense şırıngaları.

- Sıkı Luer Lock yivler uçların çıkmasını önler
- Renkli plastik kimyasalı korumak için ışığa duyarlıdır



1278 20 adet

€ 10

Ultra-Etch® Boş Şırınga

Şunlar için tasarlanmıştır: Ultra-Etch'in 30 ml IndiSpense şırıngaları.

- Sıkı Luer Lock yivler uçların çıkmasını önler
- Mavi renk tanımlamayı kolaylaştırır



129 20 adet

€ 10

5 ml Şırınga

Şunlar için tasarlanmıştır: Klinikte veya diş hekimi gözetiminde uygulanan işlemlerde kullanılan irrigantlar, Ultradent® Citric Acid ve Ultradent® EDTA 18% Solüsyon.

- Şırınga haznesi kanatları optimum kontrol/kaldıraç kullanımı için konumlandırılmıştır



201 10 adet

€ 9,5

Ultradent® Şırınga Kapağı

Şunlar için tasarlanmıştır: Tüm 1,2 ml şırıngalar.

- Kolay, güvenli bir bariyer sağlar
- Temizleme sırasında şırınganın asepsi olmasını garanti eder



249 300 adet

€ 38

I.P.

VALO

GENİŞ SPEKTRUMLU LED
POLİMERİZASYON CİHAZI

VALO

C O R D L E S S
GENİŞ SPEKTRUMLU LED
POLİMERİZASYON CİHAZI



PROUD USA Manufacture
MANUFACTURER

Ultradent is a proud USA
manufacturer. To learn more
visit: ultradent.com/USA

ULTRADENT
PRODUCTS, INC.